

ARTISAN®
TECHNOLOGY GROUP

Your **definitive** source for quality pre-owned equipment.

Artisan Technology Group
(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

Full-service, independent repair center
with experienced engineers and technicians on staff.

We buy your excess, underutilized, and idle equipment
along with credit for buybacks and trade-ins.

Custom engineering
so your equipment works exactly as you specify.

- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship
- Leasing / Rentals / Demos
- ITAR-certified secure asset solutions

Expert team | Trust guarantee | 100% satisfaction

All trademarks, brand names, and brands appearing herein are the property of their respective owners.

Find the *Optronics 60670* at our website: ***Click HERE***

OPTRONICS

Gebrauchs-anweisung

Instruction manual

Manual de instrucciones



DEI-750 CE
Modell S60671/S60670
PAL/NTSC
CE: Richtlinie für medizinische Geräte, Niederspannung und EMV-Richtlinien, UL-544

DEI-750 CE
Model S60671/S60670
PAL/NTSC
CE: Medical Device Directive, low voltage and EMC directives, UL-544

DEI-750 CE
Modelo S60671/S60670
PAL/NTSC
CE: Directiva de aparatos médicos, bajo voltaje y directivas EMC, UL-544

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Wichtiger Hinweis für die Benutzer von OPTRONICS Geräten und Instrumenten

Vielen Dank für ihr Vertrauen in den Namen OPTRONICS. Auch in diesem Produkt steckt unsere ganze Erfahrung und Sorgfalt. Sie und Ihr Haus haben sich damit für ein modernes und hochwertiges Gerät der Firma OPTRONICS entschieden.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung soll helfen, die DEI-750 CE richtig aufzustellen, anzuschließen und zu bedienen. Alle notwendigen Einzelheiten und Handgriffe werden anschaulich erklärt. Bitte lesen Sie deshalb diese Anleitung sorgfältig durch; bewahren Sie zum etwaigen Nachlesen in der mitgelieferten Schutzhülle an gut sichtbarer Stelle beim Gerät auf. Zum schnellen Nachschlagen an einer praktischen und gut sichtbaren Stelle in der Nähe des Geräts aufbewahren.

Important information for users of OPTRONICS instruments

Thank you for your expression of confidence in the OPTRONICS brand name. Like all of our other products, this product is the result of years of experience and great care in manufacture. You and your organization have decided in favor of a modern, high quality, item of equipment from OPTRONICS.

This instruction manual is intended to serve as an aid in the proper setup, installation, and operation of the DEI-750 CE. All essential details of the equipment and all actions required on your part are clearly presented and explained. We ask that you read this manual carefully before proceeding to work with the equipment. Keep it available for ready reference in a convenient and conspicuous location near the equipment.

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Sale restrictions apply to medical device applications only.

Indicaciones importantes para usarios de equipos e instrumentos de OPTRONICS

Agradecemos la confianza que han depositado en la marca OPTRONICS. Este producto, como todos los demás, es el resultado de nuestra amplia experiencia y esmero. Por ello, al decidirse por OPTRONICS se han decidido, tanto Ud. como su empresa, por un producto de precisión moderno y de alta calidad.

El manual de instrucciones le ayudará a montar, poner en marcha utilizar correctamente la cámara DEI-750 CE. Para ello, contiene todas las explicaciones necesarias sobre las particularidades y detalles de su manejo. Recomendamos la lectura detenida de este manual y su colocación cerca del aparato, en un lugar visible, debidamente protegido en la funda de plástico que se adjunta. Mantenga estas instrucciones a mano como referencia inmediata en un lugar conveniente y accesible, cerca del equipo.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Warnungen und Vorsichtshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, und beachten Sie genau die Anleitungen. Die Bezeichnungen **WARNUNG, VORSICHT** und **HINWEIS** haben spezielle Bedeutungen. Wo immer sie in diesem Handbuch verwendet werden, sollten sie genau gelesen werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten.

WARNUNG Eine WARNUNG bedeutet, daß es um die persönliche Sicherheit der Bedienungsperson geht. Die Nichtbeachtung einer WARNUNG kann zu Verletzungen der Bedienungsperson führen.

VORSICHT VORSICHT macht darauf aufmerksam, daß bestimmte Wartungs- oder Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden .

HINWEIS HINWEIS enthalten spezielle Informationen zur leichteren Wartung des Gerätes oder sie erklären wichtige Informationen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- oder Wartungshinweise in den Geräteunterlagen aufmerksam machen.

WARNUNG Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Lesen Sie das ganze Handbuch, bevor Sie die Kamera zusammenbauen und anschließen.

WARNUNG Die elektrische Anlage am Aufstellungsort muß den jeweiligen IEC-, CEC- und NEC-Bestimmungen entsprechen.

VORSICHT Zur Verhütung eines Elektroschocks die Abdeckung nicht vom Gerät abnehmen. Nur von qualifiziertem Personal warten lassen. Die Entfernung der Abdeckung durch unbefugte Personen macht die Garantie nichtig.

Warnings and cautions

Please read this manual and follow its instructions carefully. The words **WARNING**, **CAUTION**, and **NOTE** convey special meanings. When they are used throughout this manual, they should be carefully reviewed to ensure the safe and effective operation of this product.

WARNING A WARNING indicates that the personal safety of the user may be involved. Disregarding a WARNING could result in injury to the user.

CAUTION A CAUTION indicates that particular service procedures or precautions must be followed to avoid possible damage to the product.

NOTE A NOTE indicates special information to improve the ease of maintaining the product, or to clarify important information.



The symbol of an exclamation mark within a triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the product's accompanying documents.

WARNING Read this instruction manual thoroughly and be familiar with its contents prior to using this equipment. Read the entire instruction manual before assembling or hooking up the camera system.

WARNING The electrical installation of the relevant location must comply with the applicable IEC, CEC, and NEC requirements.

CAUTION To reduce the risk of electrical shock, do not remove cover of equipment. Refer servicing to qualified personnel. Removal of covers by unauthorized personnel will void the equipment's warranty.

Advertencias y precauciones

Lea este manual y siga las instrucciones cuidadosamente. Los términos **CUIDADO**, **ADVERTENCIA** y **NOTA** tienen significados muy especiales. Cuan-do aparezcan en alguna parte de este manual, revise esa sección cuidadosamente para asegurar la operación innocua y eficaz de este producto.

¡CUIDADO! Una CUIDADO significa que la seguridad personal del usuario puede verse comprometida. El usuario puede lesionarse si hace caso omiso de una CUIDADO.

ADVERTENCIA ADVERTENCIA indica que hay que seguir ciertos procedimientos de servicio o precauciones para evitar un daño posible al producto.

NOTA NOTA es información especial que sirve para facilitar la mantención del producto o para aclarar información importante.



El símbolo de un triángulo que enmarca un signo de exclamación sirve para avisar al usuario que hay instrucciones de operación y mantenimiento importantes en los documentos adjuntos del producto.

¡CUIDADO! Lea todo este manual de instrucciones y conozca bien todo lo que dice antes de usar el equipo. Lea el manual de instrucciones entero antes de ensamblar o conectar el sistema de la cámara.

¡CUIDADO! La instalación eléctrica del lugar en donde se utilice el equipo debe satisfacer completamente los requisitos aplicables establecidos por los organismos IEC, CEC y NEC.


ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no saque la tapa del instrumento. El servicio técnico debe hacerse por personal calificado. Si personas no autorizadas sacan las tapas del instrumento, queda anulada la garantía del equipo.


Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS


Warnungen und Vorsichtshinweise	Warnings and cautions	Advertencias y precauciones
WARNUNG Das Gerät ist nur dann zuverlässig geerdet, wenn es an einer “Krankenhaus-Steckdose” oder einer entsprechenden (d.h. zum Gebrauch im Operationssaal zugelassenen) Steckdose angeschlossen wird. Stecker und Kabel routinemäßig überprüfen und bei Beschädigung nicht verwenden.	**WARNING** Grounding reliability can only be achieved when the equipment is connected to “Hospital Only” or “Hospital Grade” receptacle (i.e., approved for use in an operating room environment). Routinely inspect electrical plug and cord. Do not use if inspection reveals damage.	**¡CUIDADO!** Una conexión a tierra confiable solamente se puede lograr si el equipo está conectado a un enchufe “Hospital solamente” O “Clasifica-ción para hospital” (es decir, aprobado para uso en un ambiente de sala de operaciones). Revise el cordón eléctrico y tomacorrientes con regularidad. No los use si su inspección revela algún daño.
WARNUNG Von Patienten fernhalten.	**WARNING** Keep out of reach of patients.	**¡CUIDADO!** Mantenga lejos del alcance de los pacientes.
VORSICHT Die Reinigungsanleitung in der Betriebsanleitung lesen. Dieses Gerät nicht sterilisieren.	**CAUTION** Refer to Instruction Manual for proper cleaning instructions. Do not sterilize this product.	**ADVERTENCIA** Consulte el Manual de Instrucciones para las instrucciones de limpieza apropiadas. No esterilice este producto.
VORSICHT Keine Flüssigkeit über dem Gerät lagern.	**CAUTION** Do not store liquids above unit.	**ADVERTENCIA** No almacene líquidos encima de la unidad.
VORSICHT Dieses Gerät darf aufgrund der amerikanischen Bundesgesetze nur durch bzw. auf Verordnung eines Arztes verkauft werden. Einschränkungen bzgl. des Verkaufs beziehen sich nur auf die Verwendung als medizinisches Gerät.	**CAUTION** Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Sale restrictions apply to medical device applications only.	**ADVERTENCIA** Las leyes federales de los Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a un médico o bajo las órdenes de un médico. Las restricciones de venta se refieren únicamente a las aplicaciones de dispositivos médicos.
HINWEIS Bezüglich der Entsorgung oder des Recycling von Komponenten sind die jeweils geltenden Bestimmungen einzuhalten.	**NOTE** Follow local governing ordinances and recycling plans regarding disposal or recycling of device components.	**NOTA** Siga las ordenanzas del gobierno local y los planes de reciclaje referentes al desechado o reciclado de componentes.
VORSICHT Zusatzgeräte, die an die analogen und digitalen Schnittstellen (Signaleingänge und -ausgänge) angeschlossen sind, müssen gemäß den jeweiligen IEC/EN-Normen zertifiziert sein (d.h. IEC 950/EN60950 für Datenverarbeitungsgeräte und IEC 601-1 (EN60601-1)/EN60601-1 für medizinische Geräte). Außerdem müssen alle Konfigurationen der Systemnorm IEC 601-1 (EN60601-1)-1 entsprechen. Jeder, der zusätzliche Geräte an den Signaleingängen oder -ausgängen anschließt, konfiguriert ein medizinisches System und ist deshalb verantwortlich dafür, daß das System den Anforderungen der Systemnorm IEC 601-1 (EN60601-1)-1 entspricht. Im Zweifelsfall bei der zuständigen technischen Abteilung oder der zuständigen Vertretung nachfragen.	**WARNING** Accessory equipment connected to the analog and digital interfaces (signal inputs and signal outputs) must be certified according to the respective IEC/EN standards (i.e. IEC 950/EN60950 for data processing equipment and IEC 601-1 (EN60601-1)/EN60601-1 for medical equipment). Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1 (EN60601-1)-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input parts or signal output parts configures a medical system, and is therefore responsible that the system complies with the requimrenets of the system standard IEC 601-1 (EN60601-1)-1. If in doubt, consult the technical service department or your local representative.	**ADVERTENCIA** Los equipos auxiliares conectados a las interfaces digitales y analógicas (entradas y salidas de señales) deben estar certificados bajo las normas IEC/EN correspondientes (es decir, IEC 950/EN60950 para equipos de procesamiento de datos e IEC 601-1 (EN60601-1)/EN60601-1 para aparatos médicos). Además, todas las configuraciones deben cumplir con la norma de sistema IEC 601-1 (EN60601-1)-1. Cualquier conexión de equipos adicionales a las piezas de entrada o salida de señales constituye una configuración de sistema médico, y por tal motivo la persona que la haga será responsable del cumplimiento de dicho sistema con los requisitos de la norma IEC 601-1 (EN60601-1)-1. En caso de dudas, comun’quese con el departamento de servicio técnico o con el representante local.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

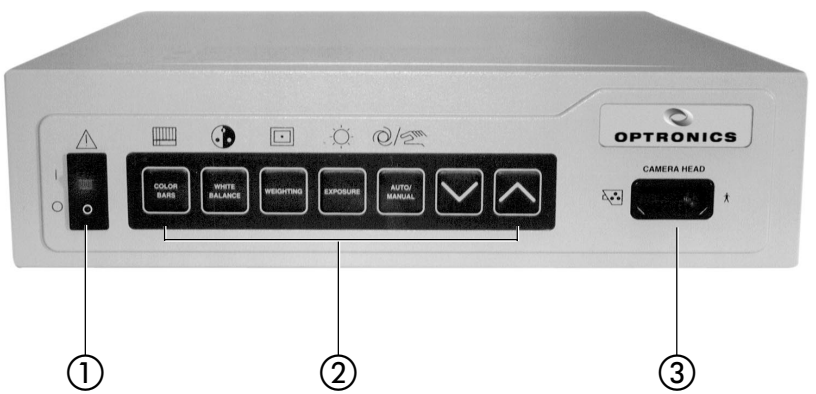


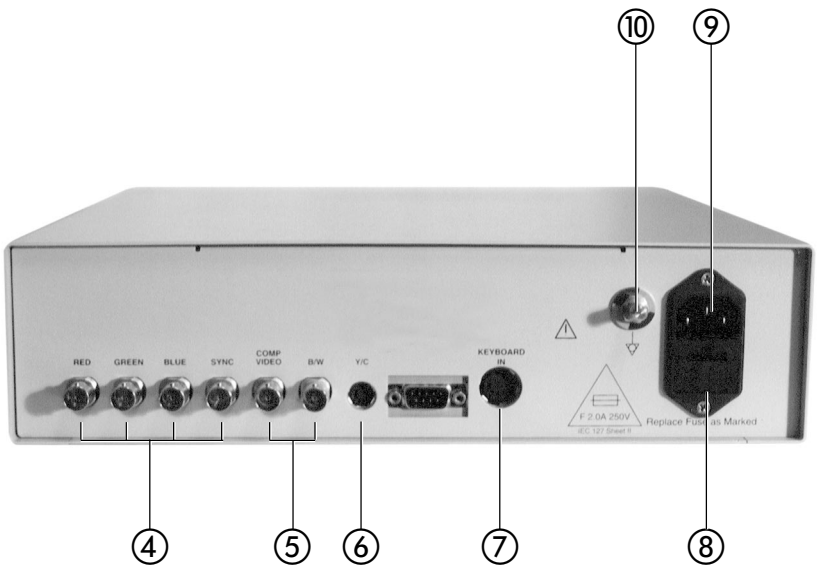

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

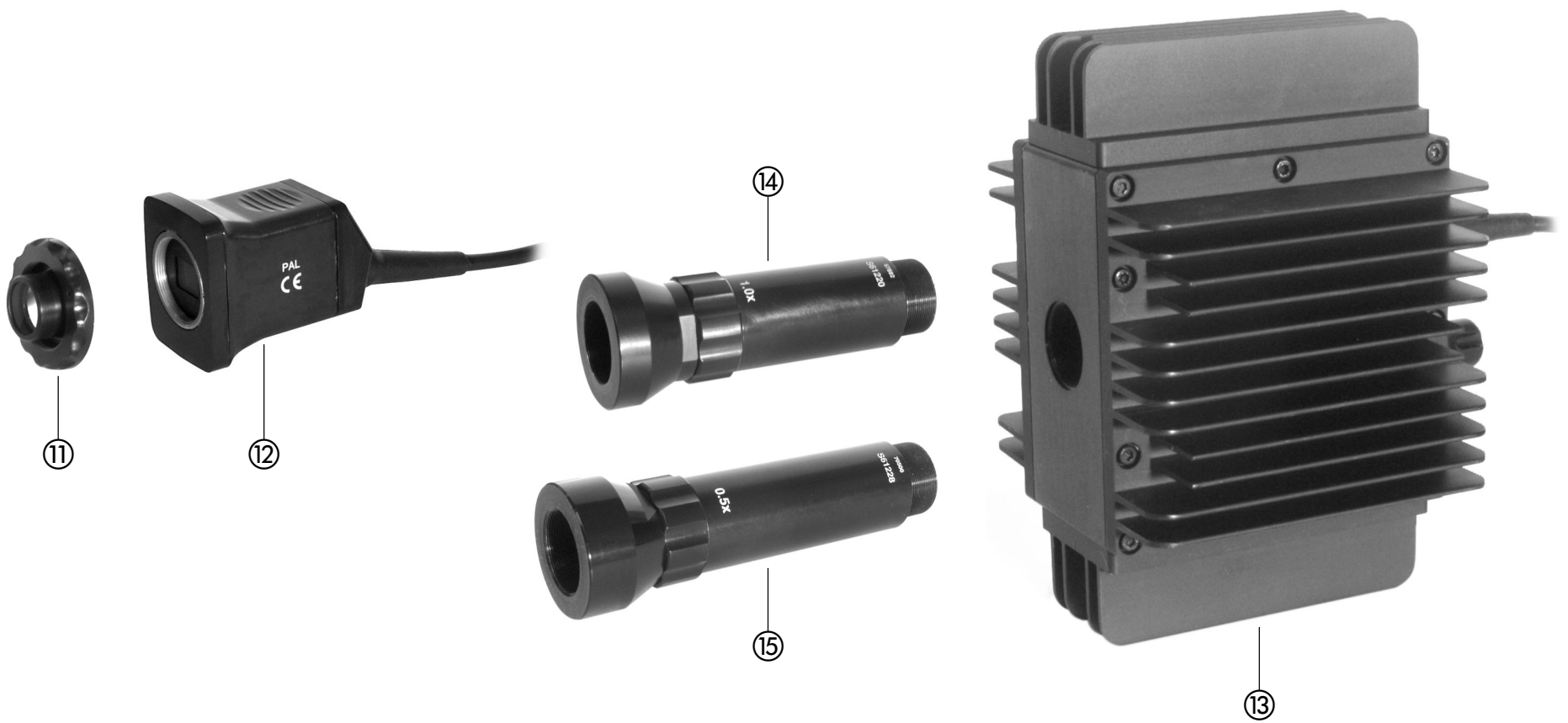

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

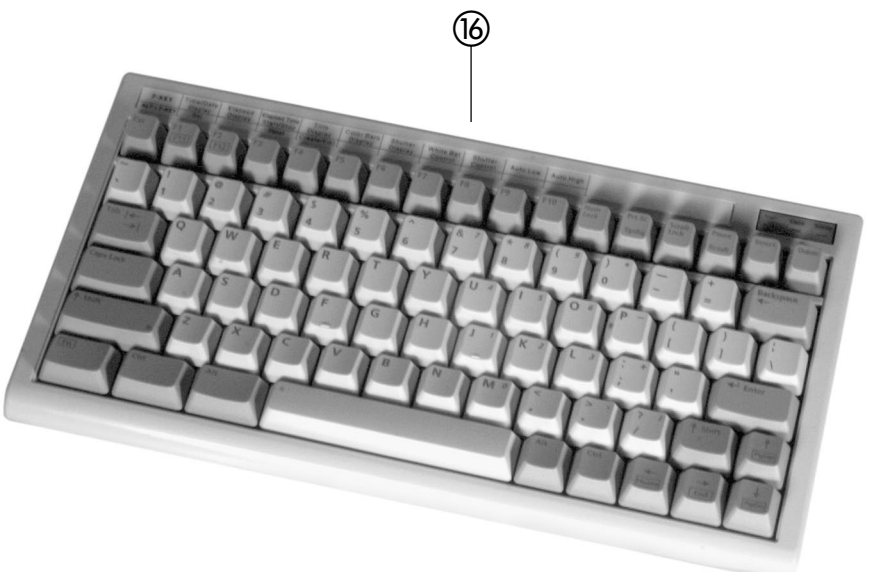

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Bedienungselemente, Anzeigen, Anschlüsse und ihre Funktion

① Netzschalter
② Folientastatur mit:
- Farbbalken
- Weißabgleich
- Gewichtung
- Belichtung
- Auto/Manuell
- Cursortasten

③ Kamera-Anschluß
④ Video-Ausgangsbuchsen RGB-Sync
⑤ BNC-Videoausgangsstecker (Comp.-Video, S-Video)
⑥ Video-Ausgangsbuchsen Y/C
⑦ Anschlußbuchse für Keyboard
⑧ Netzsicherungen
⑨ Netzgerätestecker
⑩ Potentialausgleichsanschluß
⑪ hinterer Brenweitenadapter
⑫ DEI-750 Kamera
⑬ Gekühlter Kamerakopf DEI-750T
⑭ Relaislinse (1.0x)
⑮ Verkleinerungslinse (0.5x)
⑯ Tastatur (wahlweise)

Operating elements, displays, connections and their uses

① Power switch
② Membrane panel with:
- Color bars
- White balance
- Weighting
- Exposure
- Auto/manual
- Down/up arrows

③ Camera cable receptacle
④ RGB-Sync color video output connectors
⑤ BNC video output connectors (comp. video, B/W video)
⑥ Y/C video output connectors
⑦ Keyboard receptacle
⑧ Power fuses
⑨ Power supply cord receptacle
⑩ Potential equalization connector, per DIN 42801
⑪ Back focus adaptor
⑫ DEI-750 camera head
⑬ DEI-750T cooled camera head
⑭ Relay lens (1.0x)
⑮ Reduction lens (0.5x)
⑯ Keyboard (optional)

Elementos de mando, indicadores, conexiones y sus funciones

① Interruptor de la red
② Panel de membrana con:
- Barras de color
- Balance del blanco
- Balance de exposición
- Exposición
- Auto/manual
- Flechas para arriba/abajo

③ Conexión de la cámara
④ Conexiones de salida de vídeo para las señales RGB-Sync
⑤ Conectadores de salida de vídeo BNC (comp. vídeo, vídeo B/N)
⑥ Conexiones de salida de vídeo para señales Y/C
⑦ Conector para el teclado
⑧ Fusibles de la red
⑨ Enchufe de conexión a la red
⑩ Conexión para el regulador de potencial
⑪ Adaptador de profundidad de foco
⑫ DEI-750 cámara
⑬ Cabezal de cámara enfriado con sistema de enfriamiento DEI-750T
⑭ Lente relevador (de relé) (1.0x)
⑮ Lente de reducción (0.5x)
⑯ Teclado (opcional)

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Symbolerläuterungen

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte die Anleitungen genau durch

Strom ein

Strom aus

Potentialausgleich

ACHTUNG: Bei Gebrauch in der Gegenwart von entflammbaren Anästhetika besteht Explosionsgefahr.

VORSICHT: Um einen Elektroschlag zu vermeiden, die Abdeckung nicht entfernen. Wartung nur durch qualifizierte Techniker.

Erdungsschutz

Wechselstrom

Sicherung durch F2.0A, 250 V,
5 x 20 mm Sicherung ersetzen, IEC 127

Weißausgleich

Kamerakabelanschluß

Belichtungsmodus

Automatischer Steuermodus

Manueller Steuermodus

Gewichtung

Farbbalken

Symbols employed

Read the instructions carefully before operating the equipment

Power on

Power off

Equipotentiality

DANGER: Risk of explosion if used in the presence of flammable anesthetics.

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, do not remove cover. Refer servicing to qualified service personnel.

Protective earth (ground)

Alternating current

Replace fuse with F2.0A, 250V,
5 x 20mm fuse, IEC 127

White balance

Receptacle for camera head cable connector

Exposure mode

Automatic control mode

Manual control mode

Weighting

Color bars

Explicación de símbolos

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de hacer funcionar el equipo

Encendido

Apagado

Equipotencialidad

PELIGRO: **Riesgo de explosión si se usa en presencia de anestésicos inflamables.**

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo del choque eléctrico, no saque la tapa. El servicio técnico debe hacerse por personal calificado.

Conexión a tierra (protección)

Corriente alterna

Reemplace el fusible con un fusible
F2.0A, 250V 5 x 20 mm, IEC 127

Balance del blanco

Conexión para el cable de la cámara

Modo de exposición


Modo de control automático

Modo de control manual

Balance de exposición

Barras de color

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

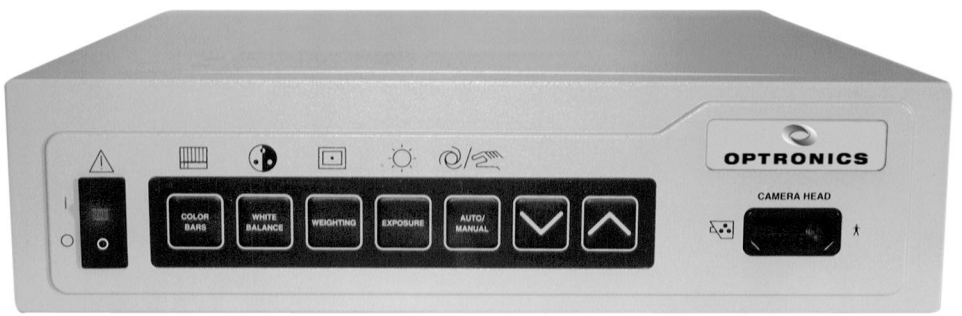

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Inhalt

Warnungen und Vorsichtshinweise (3)
Geräteabbildungen (5)
Bedienungselemente, Anzeigen, Anschlüsse und ihre Funktionen (8)
Symbolerläuterungen (9)

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck (11)

Aufstellen und Bedienungshinweise

Auspacken (15)
Grundausstattung (15)
Inbetriebnahme der DEI-750 CE (16)
Inbetriebnahme (16)
Weißabgleichsfunktionen (19)
Belichtungsregelungs-Funktionen (21)
Farbschattierungskorrektur (24)
Standbild (24)
Verstärkungsfunktionen (25)
Titel-Funktionen (28)
Farbbalken (30)
Kamerarückstellung (30)
Funktionsausgang (31)
Bedienelemente an der Frontplatte (31)
Farbeinstellung (32)
Zusammenfassung der Alt-Befehle (33)
Systemkonfigurations (34)

Gerätebeschreibung

Reinigung und Lagerung (41)
Kundendienst (43)
Garantie (43)

Technische Beschreibung

Fehlersuche (44)
Abschluß des Videosignals (48)
Technische Daten (50)

Contents

Warnings and cautions (3)
Pictures of the instrument (5)
Operating elements, displays, connectors and their uses (8)
Symbols employed (9)

Safety instructions

Intended use (12)

Installation and operating instructions

Unpacking the equipment (15)
Basic equipment (15)
Installing the DEI-750 CE (16)
Operation (16)
White balance functions (19)
Exposure control functions (21)
Color shading correction feature (24)
Freeze frame (24)
Enhancement functions (25)
Titling functions (28)
Color bars (30)
Camera reset (30)
Function exit (31)
Front panel controls (31)
Color adjustment (32)
Summary of ALT commands (33)
System configurations (34)

Description of the instrument

Cleaning and storage after use (41)
Service (43)
Warranty (43)

Technical description

Troubleshooting (44)
Video signal termination (48)
Technical data (50)

Contenido del manual

Advertencias y precauciones (3)
Imágenes del equipo (5)
Elementos de mando, indicadores, conexiones y sus funciones (8)
Explicación de símbolos (9)

Instrucciones de seguridad

Uso previsto (11)

Montaje e instrucciones operativas

Desembalaje (15)
Equipo básico (15)
Puesta en marcha de la DEI-750 CE (16)
Puesta en marcha (16)
Balance del blanco (29)
Funciones del control de exposición (21)
Característica de corrección del sombreado del color (24)
Congelamiento de cuadro (24)
Funciones para mejorar la imagen (25)
Funciones para títulos (28)
Barras de colores (30)
Reinicialización de la cámara (30)
Salida de función (31)
Controles del panel delanterofrontal (31)
Ajuste del color (32)
Resumen de mandos ALT (33)
Configuraciones del sistema (34)

Descripción del equipo

Limpieza y almacenaje (41)
Servicio (43)
Garantía (43)

Descripciones técnicas

Diagnóstico de fallas (44)
Terminación de la señal de vídeo (48)
Ficha técnica (50)

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.

Verwendungszweck

Das Modell DEI-750 CE ist eine Videokamera zum Anschluß an industrielle, wissenschaftliche oder medizinische/chirurgische Mikroskope. Die Verwendung des Geräts für in anderen als die den oben angegebenen Zwecke Gebieten ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Das Modell DEI-750 CE darf nur mit Zubehör und Komponenten verwendet werden, die von Optronics genehmigt wurden oder deren Verwendung nachweislich sicher ist.

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen des Gerätes sind aus Sicherheitsgründen untersagt.

Safety Instructions

Please read these safety instructions carefully before using the instrument.

Intended use

The DEI-750 CE is a video camera for attaching to industrial, scientific, or medical/surgical microscopes. Use of the instrument in fields other than that indicated above is not allowed for safety reasons.

The DEI-750 CE may only be used with accessories and items which have been designated by Optronics as suitable for the instrument or the safe use of which is proven.

Unauthorized conversions or modifications to the instrument are not allowed for safety reasons.

Instrucciones de seguridad

Le rogamos leer con la mayor atención estas instrucciones de seguridad antes de emplear el equipo.

Uso previsto

El producto DEI-750 CE es una cámara de video diseñada para acoplarse a microscopios industriales, cient'ficos o médico-quirúrgicos. Por razones de seguridad, no se permite el uso de este instrumento en ningún otro campo, fuera del anteriormente señalado.

La cámara DEI-750 CE solamente puede usarse con los accesorios y partes disegnados por Optronics como adecuados para el instrumento o con los que se ha comprobado que pueden usarse sin riesgo.


Por razones de seguridad, está prohibido efectuar reformas o cambios arbitrarios en los equipos.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Zum Beweis, daß ein Optronics-System den Niederspannungs- und EMV-Richtlinien entspricht, müssen sowohl Kamerakopf als auch Kamera-Kontrolleinheit (CCU) die CE-Kennzeichnung aufweisen. Wenn bei einer oder mehrerer Komponenten diese CE-Kennzeichnung fehlt, entspricht die Kombination der Komponenten nicht den Niederspannungs- und EMV-Richtlinien.

For an Optronics system to meet the requirements of the Low Voltage, EMC Directives, or Medical Device Directive, both the camera head and CCU must be marked with the CE mark. If any one or more components are not marked with the CE marking, then the combination of components do not meet the Low Voltage, EMC Directives, or Medical Device Directive.

Para que un sistema Optronics llene los requisitos de las Directivas de Bajo Voltaje y EMC, tanto el cabezal de la cámara como la UCC deben tener la marca CE. Si alguno de los componentes no tiene la marca CE, la combinación de componentes no llena los requisitos de las Directivas de Bajo Voltaje y EMC.

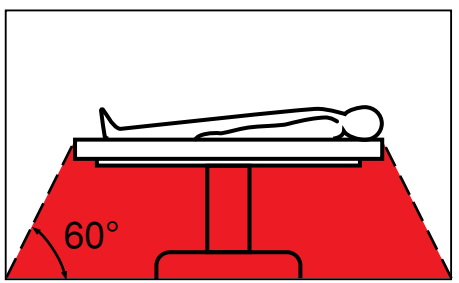

Sicherheitsmaßnahmen für die Installation medizinischer Geräte

Dieses Gerät darf nur von Ärzten oder medizinischen Assistenten verwendet werden, die über die nötige fachliche Ausbildung verfügen und in der Bedienung des Geräts geschult sind.

Es ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt. Dies bedeutet u. a.:

Bei Verwendung von leicht brennbaren und explosionsfähigen Inhalations-Anästhesiemitteln und deren Gemischen darf das Gerät nicht in der dargestellten Gefahrenzone betrieben werden. Solche Mittel sind zum Beispiel Ether pro narcosi (Diethyläther, Cyclopropan) sowie brennbare, leicht Verdampfer Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmittel, die eine explosionsfähige Atmosphäre bilden können (z. B. Waschether, Ether petrolei).

Das Gerät ist mit einer Steckvorrichtung für den Potentialausgleich ausgerüstet. Diese sollte den national gültigen Normen entsprechend angeschlossen werden.

Safety precautions at the site of medical installations

The unit may only be used by physicians and medical assistants who have a corresponding specialized qualification and who have been instructed in the use of the equipment.

The unit may be used in medical rooms installed according to national standards.

It is not intended for use in hazardous zones. This means, for example, that when using easily combustible and explosive inhalation anesthetics or mixtures thereof, the instruments must not be operated inside the demarcated hazard zone. Examples of such substances are: anesthetic ether (diethyl ether, cyclopropane) as well as combustible, volatile skin cleansers and skin disinfectants which may create an explosive atmosphere (e.g. detergent ether, petroleum ether).

The instrument is equipped with a connector for attaching a ground line. It should be connected according to national standards.

Precauciones de seguridad en el sitio de instalaciones médicas

Este equipo debe ser manejado únicamente por médicos y asistentes médicos cualificados y capacitados para su uso.

El equipo no está previsto para ser utilizado en áreas expuestas a posibles explosiones. Esto significa entre otras cosas:

Si se emplean productos anestésicos para inhalación fácilmente inflamables y explosivos o sus mezclas, no podrá utilizarse el equipo en las zonas calificadas como peligrosas por este motivo. Algunos de estos productos son, por ejemplo, éter para narcosis (éter dietílico, ciclopropano), así como productos de limpieza y desinfección de la piel inflamables, fácilmente volátiles que pueden crear una atmósfera explosiva (por ejemplo, éter de lavado, éter de petróleo). El equipo está provisto de una conexión equipotencial. La conexión debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la norma nacional vigente.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz des Gerätes

Vor der Anwendung des Gerätes hat sich der Anwender von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes zu überzeugen.

Während der Behandlung unter Verwendung der DEI-750 CE muß der Patient mit der üblichen medizinischen Sorgfalt behandelt und beobachtet werden. Dazu gehört insbesondere die Sorge um sterile Applikationsbedienungen, sofern die Art des Eingriffs dies erfordert.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den EMV-Grenzwerten gemäß 89/336/EEC und den Ergänzungen 92/31/EEC sowie 93/68/EEC. Diese Grenzwerte dienen zum Schutz vor schädlichen Störungen beim typischen medizinischen Einsatz. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt eventuell Hochfrequenzenergie ab und kann schädliche Störungen anderer, in der Nähe verwendeter Geräte verursachen, falls es nicht gemäß den Anleitungen installiert und verwendet wird. Es besteht jedoch keine Garantie, daß bei einer bestimmten Anwendung keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen anderer Geräte verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, so sollte versucht werden, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Das Empfangsgerät neu ausrichten oder aufstellen
- Den Abstand zwischen den Geräten vergrößern
- Das Gerät an der Steckdose eines anderen Strommkreises als die übrigen Geräte anschließen
- Den Hersteller oder Kundendiensttechniker um Rat fragen.



WARNUNG: Dies ist ein Gerät der Klasse A. Bei Verwendung im Haushalt kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen. In diesem Fall sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Safety precautions when operating the instrument

It is the user's responsibility to make sure the instrument is safe and operates properly before using the instrument.

During treatment with the DEI-750 CE the patient must be treated and kept under observation with the usual medical care. This includes keeping a check on the progress of treatment, as well as monitoring sterile application conditions where required by the type of intervention.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for the EMC Directive 89/336/EEC with amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference with other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device
- Increase the separation between the equipment
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) is connected
- Consult the manufacturer or field service technician for help.



WARNING: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Medidas de seguridad durante el empleo del equipo

El usuario debe asegurarse de la seguridad de funcionamiento y el buen estado del aparato antes de cada aplicación.

Durante el procedimiento con la DEI-750 CE, el paciente debe ser tratado y observado con los cuidados médicos habituales.

Esto incluye los controles del desarrollo del proceso de tratamiento y la vigilancia de los valores vitales y anestésicos.

Este equipo se ha examinado y encontrado que cumple con los límites para la Directiva EMC 89/336/EEC con las enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC. Estas especificaciones han sido diseñadas para proveer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación médica típica. El equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a otros aparatos instalados en la vecindad. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a otros equipos, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario a que trate de corregir esta situación aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique el aparato receptor
- Aumente la separación de los equipos
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito eléctrico diferente al que está conectado el otro equipo (equipos)
- Consulte con el fabricante o el técnico de servicio de campo para obtener ayuda.



¡CUIDADO! Este es un producto clasificado por la FCC (Estados Unidos) como perteneciente a la Clase A. En zonas residenciales puede causar radiointerferencia. En tal caso, el usuario deberá tomar las medidas correctivas adecuadas si se le requiere hacerlo.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Auspacken

Entnehmen Sie die DEI-750 CE und das Zubehör vorsichtig der Verpackung.
Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf eventuelle Beschädigungen.
Sollte die Lieferung Anlaß zur Reklamation geben, so wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller oder Lieferanten.
Wenn möglich, bewahren Sie die Originalverpackung auf, sie kann bei einem Transport des Gerätes nützlich sein.

Unpacking the instrument

Carefully unpack the DEI-750 CE and remove the unit and its accessories from their packaging. Check for missing items and evidence of shipping damage.

File any complaints with the manufacturer or supplier immediately.

If possible, retain the original packing materials for later use; these can come in handy when the unit must be transported.

Desembalaje

Extraer cuidadosamente la cámara y sus accesorios de la caja.

Revisar si el envio está completo y comprobar posibles averías de transporte.

En caso de reclamaciones, dirigirse immediatamente a fábrica o a la empresa suministradora.

Es recomendable guardar el embalaje original para volver a utilizarlo en un posible transporte posterior del equipo.

Grundausstattung

1 Kamera
1 Linse/Adapter
1 Kamera-Kontroll-Einheit (CCU)
1 Satz RGB Verbindungskabel
1 Y/C-Verbindungskabel
1 BNC-Verbindungskabel
1 Netzkabel
1 Gebrauchsanweisungen
1 Tastatur

Basic equipment

1 Camera head
1 Lens/adaptor
1 Camera control unit (CCU)
1 Set of RGB connecting cables
1 Y/C connecting cable
1 BNC connecting cable
1 Power cord
1 Instruction manual
1 Keyboard

Equipo básico

1 Cámara
1 Lente/adaptador
1 Unidad de control de la cámara (CCU)
1 Set de cables de conexión RGB
1 Cable de conexión Y/C
1 Cable de conexión BNC
1 Cable de alimentación
1 Manual de instruccion
1 Teclado

Das Gerät verfügt über einen Stecker der Klasse ⑩ zum Anschließen einer Erdleitung.

Die Erdleitung sollte von einem Elektriker installiert werden.

The equipment is equipped with a connector ⑩ for attaching a ground line.

The ground line should be installed by a qualified electrician.

El equipo está provisto de un conector ⑩ que se acopla a la línea a tierra.

La línea a tierra debe ser instalada por un electricista calificado.

Installation medizinischer Geräte

Hinweis: Die DEI-750 CE darf in medizinisch genutzten Räumen nur benutzt werden, wenn diese nach den national gültigen Vorschriften installiert sind.

Sie ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt. Bei Verwendung von explosiven Narkosegasen dürfen die Geräte nicht in der dargestellten Gefahrenzone betrieben werden.

Medical installations

Note: The DEI-750 CE may be used only in medical facilities having electrical installations conforming to applicable national, state, and local electrical codes.

This instrument is not intended for use in hazardous zones. Do not operate the instrument within demarcated hazard zones while explosive anesthetic gases are in use.

Instalaciones médicas

Nota: La DEI-750 CE sólo podrá usarse en espacios médicos cuyas instalaciones cumplan las normas locales que fuesen aplicables.

El equipo no está previsto para ser utilizado en áreas expuestas a posibles explosiones. Si se usan gases anestésicos explosivos, el aparato no deberá emplearse en las zonas señaladas como peligrosas.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Inbetriebnahme der DEI-750 CE

Kamera-Kontrolleinheit (CCU) auf ebene Fläche stellen.

Es ist darauf zu achten, daß nach allen Seiten genügend Abstand zu anderen Geräten und Gegenständen besteht.

Vor dem Anschließen des Geräts feststellen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der des örtlichen Stromnetzes entspricht.

WARNUNG: Die Videokamera vor Gebrauch stets testen. Vor jedem Verfahren sicherstellen, daß das richtige Videobild auf allen Video-monitoren erscheint.

Installing the DEI-750 CE

Set the CCU on a flat surface.

Make sure there is sufficient distance on all sides from other equipment and objects.

Before plugging in the equipment, make sure that the voltage on the nameplate corresponds to the voltage of the local power line.

WARNING: Test the video camera before each procedure. Ensure that the proper video image appears on all video monitors before beginning each procedure.


Puesta en marcha de la DEI-750 CE

Colocar el CCU sobre una superficie plana.

Asegúrese de que exista suficiente distancia entre el equipo y otros equipos y objetos.

Antes de conectar el equipo, asegúrese de que el voltaje impreso en la placa de especificaciones corresponda al voltaje de la red eléctrica local.

¡CUIDADO!: Pruebe la cámara de video antes de cada intervención. Asegúrese de que aparece la imagen de video apropiada en cada monitor de video antes de comenzar la intervención.

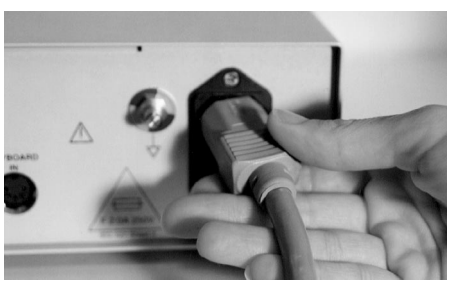

Netzkabel anschließen, Netzkabel bis zum Anschlag in CCU-Buchse ⑨ einschieben.

WARNUNG: Für den Einsatz als medizinisches Gerät ein für Krankenhäuser zugelassenes Stromkabel verwenden.

Connect power cord. Insert power cord into power cord receptacle ⑨ as far as it will go.

WARNING: For medical applications always use hospital grade power cord with this camera.

Conectar el cable de alimentación, introduciendo el enchufe hasta el tope en el receptáculo del cable de alimentación ⑨.

¡CUIDADO!: Para aplicaciones médicas utilice siempre cables conectores de potencia de grado hospitalario con esta cámara.




Kamerakopf-Anschlußstecker in Buchse ③ einstecken.

Plug camera head connector into receptacle ③.

Introducir el enchufe del cabezal de la cámara en el receptáculo ③.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

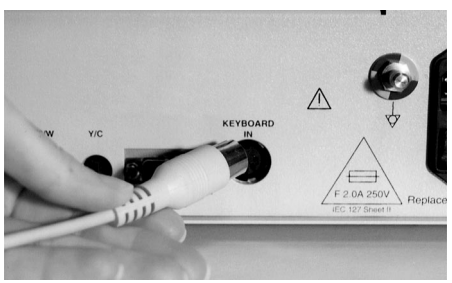Aufstellen und Bedienungshinweise	Installation and operating instructions	Montaje e instrucciones operativas
	Kamera-Kontrolleinheit mit Monitor verbinden. Je nach Anschlußmöglichkeit Ihres Monitors können Sie die Verbindung herstellen über — RGB-Sync-Anschluß (Buchse ④) — Y/C-Anschluß (Buchse ⑥) — BNC-Anschluß (Buchse ⑤). *Hinweis: Die bestmögliche Bildqualität erhalten Sie bei Anschluß über den RGB-Sync-Anschluß.*	Connect the camera control unit to the video monitor to be used. Depending upon the types of video input connectors provided on the video monitor, this connection can be generated using either the CCU's — RGB/Sync output connectors ④ — Y/C output connector ⑥, or its — BNC video output connector ⑤. *Note: Best picture quality will be obtained using the CCU's RGB/Sync connectors.*	Conectar la unidad de control de la cámara con el monitor. Según la posibilidad de conexión de su monitor, ésta puede realizarse mediante uno de los siguientes CCU's: — Conexión RGB-Sync (conectar ④) — Conexión Y/C (conectar ⑥) — Conexión BNC (conectar ⑤) *Nota: Obtendrá la mejor calidad de imagen si utiliza la conexión RGB-Sync.*
	Gegebenenfalls Keyboard-Anschlußkabel in Buchse ⑦ einstecken. *Hinweis: Beim Anschließen des Keyboard muß sich der Netzschalter der CCU immer in AUS-Stellung befinden, da sonst die Keyboard-Software nicht initialisiert wird.* *Eine ausführliche Beschreibung der Tastaturfunktionen befindet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der ALT-Steuerbefehle" auf Seite 32.*	If using the optional keyboard, plug keyboard connecting cable into socket ⑦. *Note: When connecting the keyboard, the power switch on the CCU must always be in the OFF position or else the keyboard software will not be initialized.* *For full details of keyboard functions and operations please refer to the section "Summary of ALT commands" on page 32.*	Para emplear el teclado opcional introducir el cable de conexión en el conectar ⑦. *Nota: Al conectar el teclado, el interruptor principal de la CCU debe hallarse en la posición «AUS» (desconectado), ya que en caso contrario no se inicializará el software del teclado.* *Para detalles completos sobre las funciones y operaciones del teclado, por favor consulte la sección "Resumen de comandos ALT" en la página 32.*
	Deras mitgelieferte BrennpunktHinterfokaladapter mit C-FassungKlemme am Kamerakopf befestigen und mit der Hand im Uhrzeigersinn festschrauben. Bei Verwendung des gekühlten Kamerakopfes die Relais- bzw. Verkleinerungslinse am Kamerakopf befestigen und mit der Hand im Uhrzeigersinn festschrauben.	Attach the included c-mount backfocus adaptor to the camera head, threading clockwise until hand-tight. When using the cooled camera head, attach the relay or reduction lens to the camera head, threading clockwise until hand-tight.	Conecte el adaptador de retrofoco de montura en C al cabezal de la cámara. Apriete con la mano enroscándolo en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando use el cabezal de cámara con sistema de enfriamiento, conecte el lente de relé o de reducción al cabezal de la cámara. Apriete con la mano enroscándolo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté manualmente apretado.
	Kamerakopf im Uhrzeigersinn mit der Hand auf das Mikroskop aufschrauben.	Attach the camera head to the microscope, threading clockwise until hand-tight.	Conecte el cabezal de la cámara al microscopio, enroscándolo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede apretado con la mano.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Aufstellen und Bedienungshinweise

Installation and operating instructions

Montaje e instrucciones operativas



Kamera-Kontrolleinheit und Monitor einschalten.

Nach jedem Einschalten erscheint auf dem Monitor ein Farbtestbild. Wenn der Kamerakopf nach Einschalten noch nicht mit der CCU verbunden ist, verbleiben die

Switch on the camera control unit and the video monitor.

Each time the CCU is switched on, a color test-pattern will appear on the video monitor screen. If the camera head is not connected to the CCU upon power up, the color bars will remain on until the head is plugged in.

Encender la unidad de control de la cámara y el monitor.

Cada vez que se conecte el CCU aparecerá un test de color en el monitor. Si no se conecte el cabezal al CCU al encender el equipo, el test de



Sämtliche Kamerafunktionen werden über die Tastatur gesteuert. Nur der Weißabgleich kann auch von der Frontplatte aus gesteuert werden. Die meisten Tastaturfunktionen sind auf dem Aufkleber über der obersten Tastenreihe angegebenbeschrieben. Im allgemeinen wird durch Drücken einer dieser Tasten ein bestimmter Kamera-Modus eingestellt. Die aktuelle Funktion mit den entsprechenden Einstellungen erscheint in einer Textzeile am unteren Bildrand des Monitors. Zu vielen dieser Funktionen gehören Parameter oder Einstellungen, die mit den Pfeiltasten in der rechten unteren Ecke der Tastatur ([↑], [↓]) oder den Pfeiltasten an der Frontplatte ders Kamera-prozessors geändert werden können. Zum Verlassen einer Funktion diesselbe Funktionstaste erneut drücken bzw., [Alt][SPACE] oder eine andere Funktionstaste drücken.

Die Funktionstasten der Tastatur sind in dieser Anleitung in eckigen Klammern angegeben, z.B. [EXPOSURE].

All camera functions are controlled from the keyboard. Only the white balance function can be controlled from the camera controller front panel. Most of the keyboard functions can be found on the label above the top row of keys. In general, pressing one of these keys will enter the camera into the corresponding mode. The current function and its corresponding setting will be displayed on the monitor as a line of text along the bottom. Many of the functions have associated parameters or selections which can be changed using the up and down arrow keys in the lower right corner of the keyboard ([↑], [↓]), or the arrow keys on the camera processor front panel. To exit a function, press the same function key again, press [Alt] [SPACE], or press another function key.

Keyboard function keys are indicated in this document within brackets, such as: [EXPOSURE].

Todas las funciones de la cámara se controlan desde el teclado. Solamente la función de balance del blanco puede controlarse también desde el control del panel frontal de la cámara. La mayoría de las funciones del teclado pueden encontrarse en la etiqueta que está por encima de la fila superior de teclas. En general, si presiona una de esas teclas, la cámara inicia la función correspondiente. La función actual y sus características correspondientes aparecen en la pantalla del monitor en forma de línea de texto en el borde inferior de la pantalla. Muchas de las funciones tienen selecciones o parámetros asociados que pueden cambiarse con las teclas de dirección “hacia arriba” y “hacia abajo” situadas en la esquina inferior derecha del teclado ([↑], [↓]), o las teclas de dirección en el panel frontal de control de la cámara. Para salir de una función, presione nuevamente la tecla de la función correspondiente, las teclas [Alt][SPACE], o alguna otra tecla de función.

Las teclas de función del teclado se indican en este documento dentro de paréntesis cuadrados, como por ejemplo: [EXPOSURE].

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com



Weißabgleichsfunktionen

Vor Verwendung der Kamera muß ein Weißabgleich vorgenommen werden, um eine genaue Farbwiedergabe zu erzielen. Jede Komponente eines Kamera- oder Mikroskopsystems kann einen bedeutenden Einfluß auf den Weißabgleich haben. Aus diesem Grund wird empfohlen, daß das gesamte optische und Illuminatorsystem vor Durchführung montiert wird, bevor mit der Kamera ein Weißabgleich durchgeführt wird. Es ist darauf zu achten, daß sich vor dem Durchführen des Weißabgleichs keine anderen Filter als mit Ausnahme von Graufiltern im optischen Pfad des Mikroskops befinden.

Weißabgleich [WHITE BALANCE]

Durch Betätigen der Taste WHITE BALANCE kann der derzeit gültige Weißabgleichs-Einstellmodus abgerufen werden. Mit den Pfeiltasten kann einer der fünf nachfolgend erläuterten Modi gewählt werden.

AWB
Modus für den Weißabgleich der Kamera anhand eines weißen Objekts. In den meisten Fällen das zuverlässigste Weißabgleichsverfahren für Weißlicht-Illumination.

Anschließend die Eingabetaste (Enter) drücken.

Vor dem Weißabgleich den Belichtungsmodus auf Auto stellen (nicht Auto+ oder Auto- wählen) und einen weißen, nicht glänzenden Gegenstand so aufstellen, daß er den Blickwinkel der Kamera fast ganz ausfüllt. Dabei kann es sich um eine leere Stelle auf einem Diarahmen oder um ein weißes Blatt Papier handeln. Anschließend die Taste für den Eintreten drücken. Während der Weißabgleich abläuft, erscheint die Anzeige “White Balancing...”. Wenn der Weißabgleich erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die Anzeige “White Balance OK”.

Wenn kein Weißabgleich durchgeführt werden konnte, erscheint eine der folgenden Anzeigen:

White balance functions

Prior to using the camera, it is important to perform a white balance operation to ensure accurate color reproduction. Each component of a camera/ microscope system can have a significant effect on the white balance. For this reason, it is recommended that the entire optical and illumination system be assembled before white balancing the camera. Be certain that no filters other than neutral density filters are in the optical path of the microscope prior to white balancing.

White balance setting [WHITE BALANCE]

The WHITE BALANCE key displays the current mode for setting white balance. The arrow keys are used to select from 5 modes described below.

AWB
This mode allows the camera to be white balanced to a white object. This is generally the most accurate method for white balancing when using a white light illumination.

Before starting a white balance, set exposure mode to “Auto” (do not use Auto+ or Auto-) and arrange a white, non-shiny object to fill most of the camera’s field of view. This can be a blank place on a slide, a piece of white paper, etc. Next press the enter button. During the cycle the message

“White Balancing...” will be displayed. If the white balance is successful, the message will change to “White Balance OK.”

If the white balance cycle fails, one of these messages will appear:

Funciones de balance del color blanco (balance del blanco)

Antes de usar la cámara es importante efectuar una operación de balance del blanco para garantizar una fiel reproducción de los colores. Cada componente de un sistema cámara/ microscopio puede tener efecto significativo en el balance del blanco. Por tal razón se recomienda que los sistemas óptico y de iluminación se ensamblen antes de efectuar el balance del blanco en la cámara. Antes de efectuar el balance del blanco, asegúrese de que solamente haya filtros neutros en el trayecto óptico del microscopio.

Balance del blanco [WHITE BALANCE]

La tecla BALANCE DEL BLANCO (WHITE BALANCE) sirve para indicar la modalidad actual para del fijarajuste del el balance del blanco. Se usan las teclas de flechas para seleccionar entre las 5 modalidades descritaos a continuación.

AWB
Esta modalidad permite a la cámara lograr un balance del blanco con un objeto blanco. Este método generalmente es el más exacto para lograr el balance del blanco cuando se usa una iluminación con luz blanca.

Luego Seguidamente, pulse el botón de entrada (Enter).

Antes de comenzar un balance del blanco, ajuste la modalidad de exposición a “Auto” (no use Auto + ni Auto -) y coloque un objeto blanco sin brillo para que ocupe la mayor parte del campo de visión de la cámara. El objeto blanco puede ser un espacio vacío en un portaobjetos, un trozo de papel blanco, etc. En seguida, presione el botón de entrar. Durante el ciclo, aparece el mensaje “White balancing...“ (“Balance del blanco...“) en la pantalla. Si el balance del blanco se realiza con éxito el mensaje cambia a “White Balance OK” (“Balance del blanco correcto”).

Si el ciclo de balance del blanco falla, aparecerá uno de los siguientes mensajes:

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

White Bal Fail – Color
Diesas bedeutet, daß die Farbtemperatur des Lichts außerhalb des 2000 bis 6000 K-Bereichs der Kamera liegt. Versuchen, die Beleuchtung stärker einzustellen und auf Farbfilter im optischen Pfad prüfen.

White Bal Fail – Dark
Dieas bedeutet, daß das Bild ist für einen genauen Weißabgleich zu dunkel ist. Versuchen Sie, die Beleuchtung stärker einzustellen, die Belichtungszeit zu erhöhen, eine Irisblende zu öffnen oder Filter aus dem im optischen Pfad zu entfernen.

White Bal Fail – Bright
Dieas bedeutet, daß das Bild ist für einen genauen Weißabgleich zu hell ist. Versuchen, Sie, die Beleuchtung schwächer einzustellen, die Belichtungszeit zu verringern, eine Irisblende zu schließen oder Graufilter in den optischen Pfad einzufügen.

Die Weißabgleichseinstellung wird imn einem nicht-flüchtigen Speicher in der Kamera-Kontroll-Steuer-Kontrolleineheit (CCU) gespeichert. Dadurch ist kein erneuter Weißabgleich beim Wiedereinschalten der Kamera erforderlich, es sei denn, es wurden Änderungen am System vorgenommen (Lichtquelle, Mikroskop usw.).

Es ist zu beachten, daß es sich bei den meisten Illuminatorreglern um elektrische Dimmer handelt, und daß eine Einstellungsänderung eine starke Auswirkung auf die Farbtemperatur der Beleuchtung hat. Außerdem ist die Farbgenauigkeit der Kamera dann am besten, wenn die Farbtemperatur der Beleuchtung hoch ist. Es ist daher zu empfehlen, den Illuminator ständig auf seinen Höchstwert einzustell-en. Wenn die Illuminatoreinstellung geändert wurde, ist es ratsam, erneut einen Weißabgleich durchzuführen.

Hinweis: Wenn die Weißabgleichsfunktion aktiviert wird und die Kamera auf eine lange Belichtungszeit (1/4 Sekunde oder länger) eingestellt ist, kann es ziemlich lange dauern, bis der Zyklus abgeschlossen ist. Falls erforderlich kann der Zyklus durch Aus- und Einschalten der Kamera abgebrochen werden.

White Bal Fail – Color
This means that the color temperature of the light is out of the 2000K to 6000K range of the camera. Try turning up the illumination and check for colored filters in the optical path.

White Bal Fail – Dark
This means that the image is too dark for an accurate white balance. Try turning up the illumination, increasing the camera exposure time, opening an iris, or removing filters in the optical path.

White Bal Fail – Bright
This means that the image is too bright for an accurate white balance. Try turning down the illumination, decreasing the camera exposure time, closing an iris, or adding neutral density filters to the optical path.

The white balance setting is stored in nonvolatile memory in the camera control unit. This means that the camera should not need to be re-white balanced when the camera is turned back on, provided nothing in the system has changed (light source, microscope, etc.).

Please note that most illuminator controls are electrical “dimmers,” and changing their settings has a significant effect on the illumination color temperature. Also, camera color accuracy is best when the illuminator color temperature is high. Therefore, it is recommended that the illuminator be set to maximum at all times. If the illuminator setting is changed, a new white balance operation is recommended.

Note: If the white balance function is activated when the camera is set for a long exposure time (1/4 second or more), a considerable amount of time may elapse before the cycle is complete. If necessary, the cycle can be aborted by turning the camera off, then on again.

White Bal Fail – Color
Esto significa que la temperatura de color de la luz está fuera del margen de 2000K a 6000K de la cámara. Intente aumentar la intensidad de la iluminación y revise si hay filtros coloreados en el trayecto óptico.

White Bal Fail – Dark
Esto significa que la imagen es demasiado oscura para poder hacer correctamente un balance del blanco. Intente aumentar la intensidad de la iluminación, el tiempo de exposición de la cámara, la apertura de algún iris (diafragma) o retirar filtros del trayecto óptico.

White Bal Fail – Bright
Esto significa que la imagen es demasiado brillante para realizar correctamente un balance del blanco. Intente disminuir la iluminación, el tiempo de exposición de la cámara, la apertura de algún iris (diafragma), o agregar filtros de densidad neutra en el trayecto óptico.

El ajuste de balance del blanco se almacena en memoria no volátil (permanente) en la unidad de control de la cámara. Esto significa que no es necesario rebalancear el blanco en la cámara al apagarla y volverla a encenderla, siempre que no se hayan producido cambios en el sistema (fuente de iluminación, microscopio, etc.).

Sírvase observar que la mayoría de los controles de iluminación son reóstatos o potenciómetros eléctri-cos, y que la modificación de sus ajustes tiene un efecto significativo en la temperatura de color de la iluminación. Además, la exactitud de la cámara con respecto al color es mayor cuando la temperatura del color de la iluminación es elevada. Por tanto, se recomienda que la fuente de iluminación se ajuste al máximo en todo momento. Si cambia el ajuste de la fuente luminosa, se recomienda efectuar otra operación de balance del blanco.

Nota: Si la función de balance del blanco se activa cuando la cámara está ajustada para un tiempo de exposición prolongado (1/4 de segundo o más), puede transcurrir bastante tiempo antes de que el ciclo se complete. De ser necesario, puede abortarse el ciclo apagando la cámara y volviéndola a encender.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

2800K
Weißabgleichsmodus für die meisten gewöhnlichen Glühlampen-Lichtquellen wie z.B. Haushaltsglühbirnen. Eignet sich auch für gedimmte Hochintensitätslampen wie z.B. Mikroskopilluminatoren.

3200K
Weißabgleichsmodus für hochintensive Glühlampen wie z.B. Quaz-Halogen-Lampen und die meisten auf maximale Helligkeit eingestellten Mikroskopilluminatoren.

5600K/fluorescence
Weißabgleichsmodus für die Tageslichtillumination, ferner für die optimale Farbwiedergabe von fluoreszenten Subjekten.

Manual white balance
Modus, in dem der Benutzer den Weißabgleich der Kamera manuell mit Hilfe der Rot- (Alt-RED) und Blauverstärkung (Alt-BLUE) vornehmen kann. Siehe Abschnitt “Wahl der Rot- bzw. Blauverstärkung” auf Seite 26.

2800K
This mode sets the camera white balance for most normal incandescent lighting such as household light bulbs. This setting is also appropriate for high intensity bulbs, which are being dimmed, such as microscope illuminators.

3200K
This mode sets the camera white balance for high intensity incandescent lighting such as quartz halogen bulbs, and most microscope illuminators at maximum brightness.

5600K/fluorescence
This mode sets the camera white balance for daylight illumination. It is also the setting for use with fluorescent subjects for best color rendition.

Manual white balance
This mode allows the user to manually change the white balance of the camera by using the red gain (Alt-red) and blue gain (Alt-blue) adjustments. See “Set red, blue, gains” section on page 26.

2800K
Esta modalidad fijaajusta el balance del blanco de la cámara para la mayoría de la iluminación incandescente normal, como por ejemplo con los focos de luz caseros. Esta calibración también es apropiada para focos de alta intensidad, que se atenúan, como es el caso de los iluminadores de microscopio.

3200K
Esta modalidad fijaajusta el balance del blanco de la cámara para la iluminación incandescente de elevada gran intensidad, como los focos de halógeno de cuarzo, y la mayoría de los iluminadores de microscopio con iluminacióna brillantez máxima.

5600K/fluorescencia
Esta modalidad fijaajusta el balance del blanco de la cámara para la luz natural de día. También es el ajuste apropiado para objetos fluorescentes, para una mejor obtención (rendición) del color.

Balance manual del blanco manual
Esta modalidad permite al usuario cambiar manualmente el balance del blanco de la cámara mediante el ajuste de la ganancia del rojo [Alt-rojo (Alt-red)] y la ganancia del azul [Alt-azul (Alt-blue)]. Vea la sección “FijarAjuste de las ganancias del rojo y o del azul” en la página 26.

Belichtungsregelungs-Funktionen

Die Belichtungsfunktion der Kamera bestimmt, wieviel Licht von der CCD aufgezeichnet wird, sowie die Höhe der Signalverstärkung, die zur Darstellung des Signals erforderlich ist. Die Belichtungsfunktion der Kamera wird auf zwei verschiedene Weisen Arten eingestellt. Im manuellen Betriebsmodus stellt die Bedienungsperson die Verschlußzeit manuell ein. Die Verstärkung ist auf einen festenbestimmten Wert voreingestellt. Im automatischen Betriebsmodus analysiert die Kamera das Bild und findet automatisch die beste Kombination von Verschlußzeit und Verstärkung. Im automatischen Betriebsmodus überwacht die Kamera ständig den Inhalt der Aufnahmeszene und paßt sich schnell Beleuchtungsänderungen der Szene an wie z.B. beim Wechseln vom Dunkel- zum Hellfeld.

Exposure control functions

The camera exposure functions determine how much light is recorded by the CCD, as well as the amount of gain that is applied to the signal before it is displayed. There are two basic ways in which the camera exposure is set. In manual mode, the user manually sets the shutter speed. The gain is preset to a fixed level. In automatic mode, the camera analyzes the image and automatically finds the “best” combination of shutter speed and gain. In automatic mode, the camera is constantly monitoring the scene content, and will quickly accommodate changes in scene illumination such as when switching from darkfield to brightfield.

Funciones del control de exposición

Las funciones de exposición de la cámara determinan la cantidad de luz que registra el CCD, al igual que la cantidad de ganancia que se aplica a la señal antes de que pueda verse en la pantalla. Hay dos maneras básicas en que puede establecerse el valor de exposición en la cámara. En la modalidad manual, el usuario establece manualmente la velocidad del obturador. El valor de ganancia está preestablecido a un nivel fijo. En la modalidad automática, la cámara analiza la imagen y automáticamente encuentra la “mejor” combinación de velocidad de obturación y ganancia. En la modalidad automática, la cámara continuamente está analizando el contenido de la escena y podrá, por lo tanto, acomodarse rápidamente a los cambios de su iluminación, tales como cuando se pasa de un objeto poco iluminado a uno con iluminación brillante.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Einstellen der Belichtung [EXPOSURE]

Mit der EXPOSURE-Taste wird der jeweilige Belichtungsmodus eingestellt. Auf dem Monitor wird der aktuelle Belichtungsmodus (auto oder manuell) sowie die Verschlußzeit angezeigt. Je nachdem, ob sich die Kamera im automatischen oder manuellen Belichtungsmodus befindet, haben die Pfeiltasten zwei verschiedene Funktionen. Im automatischen Betriebsmodus verringert oder erhöhent sie man die Belichtung um eine Stufe, wodurch das Bild heller oder dunkler wird. Die 5 automatischen Einstellungen werden auf dem Monitor wie folgt angezeigt: Auto, Auto -, Auto +, Auto - - und Auto ++. Im manuellen Betriebsmodus kann die Bedienungsperson mit den Pfeiltasten eine beliebige Verschlußzeit wählen. Die Pfeiltasten wiederholt drücken, bis die gewünschte Verschlußzeit eingestellt ist gewählt wurde.

Set exposure [EXPOSURE]

The EXPOSURE key will enter the camera into the set exposure mode. The monitor will display the current exposure mode (auto or manual) along with the current shutter speed. The arrow keys have two effects, depending on whether the camera is in auto or manual exposure mode. In auto mode, the arrow keys will increase or decrease the exposure by one stop, resulting in a brightening or darkening of the image. The 5 auto settings are indicated on the monitor with “Auto,” “Auto - ,” “Auto +,” “Auto - -,” and “Auto ++.” In manual mode, the arrow keys allow the user to select from any of the available shutter speeds. Press the arrow keys repeatedly until the desired shutter speed is selected.

Establecer el valor de exposición [EXPOSURE]

La tecla de exposición [EXPOSURE] coloca a la cámara en la modalidad de ajuste del valor de exposición. En la pantalla aparece la modalidad de exposición actual (automática o manual) junto con la velocidad de obturación actual. Las teclas de dirección (teclas de flechas) tienen dos efectos, según si la cámara está en la modalidad de exposición automática o manual. En la modalidad automática, las teclas de dirección aumentan o disminuyen el valor de exposición en una unidad focal (f/stop), para aumentar o disminuir la iluminación de la imagen. Los cinco ajustes automáticos se indican en el monitor como “Auto”, “Auto -”, “Auto +”, “Auto - -” y “Auto ++”. En la modalidad manual, las teclas de dirección permiten al usuario seleccionar cualquiera de las posibles velocidades de obturación. Presione repetidamente las teclas de dirección hasta que seleccione la velocidad de obturación deseada.

Umschalten zwischen manueller und automatische Belichtung [AUTO/MANUAL]

Mit der Taste AUTO/MANUAL schaltet man zwischen der automatischen und manuellen Belichtung hin und her. Nach dem Drücken der Taste werden der aktuelle Belichtungsmodus und die Verschlußzeit angezeigt. Die Belichtung kann dann mit den Pfeiltasten geändert werden.

Select auto/manual exposure [AUTO/MANUAL]

The AUTO/MANUAL key toggles the exposure mode between auto and manual. After pressing the key, the current exposure mode and shutter speed will be displayed. The arrow keys can then be used to change the exposure.

Seleccionar la exposición automática/manual [AUTO/MANUAL]

La tecla AUTO/MANUAL permite alternar la modalidad de exposición entre automática y manual. Después de presionar la tecla se muestra la modalidad de exposición y la velocidad de obturación en uso al momento. Las teclas de dirección pueden usarse para cambiar el valor de exposición.

Einstellen der Verschlußzeitgrenze [ALT] [L]

Mit der Tastenkombination Alt-L wird der Betriebsmodus zum Einstellen der Verschlußzeitgrenze gewählt. In diesem Betriebsmodus kann die längst mögliche Verschlußzeit geändert werden, wenn die Kamera auf die automatische Belichtungsart eingestellt ist. Während sich die Kamera in diesem Betriebsmodus befindet, wird auf dem Monitor die gegenwärtige Grenze angezeigt, die dann mit den Pfeiltasten geändert werden kann.

Set shutter speed limit [Alt] [L]

The Alt-L key combination enters the camera into the set shutter speed limit mode. This mode allows the user to change the longest allowed shutter speed when the camera is in auto exposure mode. While in this mode, the monitor will display the current limit, which can then be changed with the arrow keys.

Seleccionar el límite de la velocidad de obturación [Alt] [L]

Al combinar las teclas Alt-L, la cámara se coloca en la modalidad de selección del límite de la velocidad de obturación. Esta modalidad permite al usuario cambiar la velocidad de obturación más lenta (larga) cuando la cámara está en la modalidad de exposición automática. En esta modalidad, la pantalla del monitor muestra la velocidad de obturación actual, que luego puede modificarse con las teclas de dirección.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Wahl der automatischen Belichtungsbewertung [Alt] [W]

Mit der Tastenkombination Alt-W wird die Wahlfunktion für automatische Belichtungsbewertung der Kamera eingeschaltet. In dieser Betriebsart kann der Benutzer das Verfahren ändern, anhand dessen die Kamera im automatischen Belichtungsmodus die günstigste Belichtung ermittelt. Auf dem Monitor wird das jeweils angewendete Verfahren angezeigt; es kann mit Hilfe der Pfeiltasten geändert werden.

– FULL SCREEN der Mittelwert für den gesamten Bildschirminhalt wird zugrunde gelegt. Dies ist die Option für den Normalfall.
– WINDOW (FENSTER) verwendet das Mittel des zentralen Bildschirmbereichs. Nützlich, wenn der äußere Umkreis nicht wichtig oder durch das optische System verdeckt ist.
– PEAK das hellste Objekt innerhalb des gesamten Gesichtsfelds wird zugrunde gelegt. Empfohlen für die Abbildung kleiner, heller Details, z.B. fluoreszierendenter Strukturen oder reflektierender Metallflächen.

Set auto exposure weighting [Alt] [W]

The Alt-W key combination enters the camera into the set auto exposure weighting mode. This mode allows the user to change the method the camera uses to determine the best exposure in auto exposure mode. While in this mode, the monitor will display the current method, which can then be changed with the arrow keys.

– FULL SCREEN uses the average of the total screen content. This is best for general use.
– WINDOW uses the average of a central area of the screen. This is useful if the outer boundary is either unimportant or obscured by the optical system.
– PEAK uses the brightest feature within the entire scene. This is useful when imaging small bright features such as fluorescent structures or reflective metal surfaces.

FijeAjuste de la compensación de autoexposición [Alt][W]

La combinación de teclas Alt-W coloca a la cámara en la modalidad de fijarajuste de la compensación de autoexposición. Esta modalidad permite al usuario cambiar el método usado por la cámara para determinar la mejor exposición en la modalidad de autoexposición. Cuando la cámara está en esta modalidad, el monitor muestra el método actual, el que luego se puede cambiar con las teclas de flechas.

– PANTALLA COMPLETA ENTERA (FULL SCREEN) usa el promedio del contenido total de la pantalla. Esto es lo mejor para el uso general.
– La función WINDOW (VENTANA) utiliza el promedio de una parte central de la pantalla. Esto es útil si los límites exteriores no son importantes o han sido oscurecidos por el sistema óptico.
– PICO (PEAK) usa el elemento más brillante dentro de todo el campo. Esto resulta útil cuando se toman imágenes de elementos pequeños y brillantes, tales como estructuras fluorescentes o superficies metálicas reflexivasreflectantes.

Wahl der Gammakurve [Alt] [G]

Mit der Tastenkombination Alt-G wird die Betriebsart Gammamodusenwahl-Betriebsart aktiviert, in der der Benutzer die vom Kameraprozessor verwendete Gammakurve ändern kann. Der jeweils gültige Gammawert wird auf dem Monitor angezeigt und kann mit Hilfe der Pfeiltasten geändert werden. Bei einem Gammawert von 1,.0 ist das Reaktionsverhalten der Kamera linear; diese Einstellung eignet sich vor allem für die quantitative Analyse. Bei einem Gammawert von 0,.7 entsteht eine nichtlineare Ansprechkurve der Kamera, um die der Nichtlinearität des Monitors zu kompensierenent-spricht. Dieser Wert ist für die Mehrzahl der visuellen und qualitätsorientierten Arbeiten zu empfehlen.

Set gamma [Alt] [G]

The Alt-G key combination enters the camera into the set gamma mode. This mode allows the user to change the gamma curve used in the camera processor. While in this mode, the monitor will display the current gamma, which can then be changed with the arrow keys. A gamma of 1.0 gives the camera a linear response, which is useful for quantitative analysis. A gamma of 0.7 gives the camera the proper nonlinear response to correct for the non-linearity of the monitor. The 0.7 gamma should be used for most visual and qualitative work.

FijarAjuste de valor gamma [Alt][G]

La combinación de teclas Alt-G coloca a la cámara en la modalidad de fijarajuste de valor gamma. Esta modalidad permite al usuario cambiar la curva de gamma usada en el procesador de la cámara. Cuando la cámara está en esta modalidad, el monitor muestra la curva de gamma actual, la que luego se puede cambiar con las teclas de flechas. Con una un valor gamma de 1.0, la respuesta de la cámara es lineal, lo que es útil para los análisis cuantitativos. Con una un valor gamma de 0.7, la cámara adquiere la respuesta no lineal adecuada para corregir la no linearidad del monitor. La El valor gamma de 0.7 debe usarse para la mayoría del trabajo visual y cualitativo.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Farbschattierungskorrektur

Durch die Farbschattierungskorrektur wird die Hintergrundschattierung von rosa bis grün bei kontrastarmen Subjekten korrigiert, so daß mit der Kamera ein beliebiges Verkleinerungslinsen-Videoadapter ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit verwendet werden kann.

Farbschattierungskorrektur [Alt] [C]

Weißabgleich der Kamera durchführen. Auf der Tastatur die Tasten Alt-C drücken. Auf dem Monitor erscheint eine Meldung, die die aktuelle Farbkorrektur als Wert zwischen -100 und +100 wiedergibt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann dieser Wert erhöht bzw. verringert werden. Ist der gewünschte Wert eingestellt, kann die Meldung mit den Tasten Alt-C ausgeblendet werden.

Erneuten Weißabgleich durchführen.

Color shading correction feature

The color shading feature corrects pink to green background shading on low contrast subjects. This allows the camera to be used with any reduction lens video adaptor without compromising color accuracy.

Color shading correction [Alt] [C]

White balance the camera. Press Alt-C on the keyboard. A color correction message with a value between -100 and +100 will appear on the monitor. To increase or decrease the value, use the arrow keys on the keyboard. Once the desired value is achieved, turn off the monitor message by pressing Alt-C. White balance the camera again.

Característica de corrección del sombreado del color

La característica de corrección del sombreado del color corrige el sombreado de fondo del rosado al verde cuando el material tiene poco contraste. Esto permite usar la cámara con cualquier adaptador de vídeo con lente de reducción sin alterar la exactitud del color.

Corrección del sombreado del color [Alt] [C]

Haga el balance del blanco de la cámara. Oprima Alt-C en el teclado. Aparecerá un mensaje de corrección del color en el monitor, con un valor entre -100 y +100. Para aumentar o disminuir el valor, use las teclas de flechas en el teclado. Cuando alcance el valor deseado, oprima Alt-C para que desaparezca el mensaje en el monitor. Vuelva a hacer el balance del blanco de la cámara.

Standbild

Die Standbildfunktion eignet sich zur Erfassung vorübergehender Ereignisse oder zur Reduzierung des Bleicheffekts um da Bleichen fluoreszenter Objekte zu reduzieren. Standbilder können anschließend mit einer der folgenden Verstärkungsfunktionen modifiziert werden: Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Blau- und Rotausgleich.

Hinweis: Bei Verwendung der Standbildfunktion muß das Objekt stationär sein, um stabile und flimmerfreie Bilder zu erhalten.

Standbild Ein/Aus [FREEZE FRAME]

Mit dieser Taste kann das auf dem Monitor dargestellt Bild eingefroren“ werden. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird das Standbild wieder zur direkten Videodarstellung. Wenn Freeze Frame aktiviert ist, werden bei eingeschalteter Belichtungsfunktion die Buchstaben FF zusammen mit dem aktuellen Belichtungswert angezeigt.

Freeze frame

Freeze frame can be used to capture transient events, or to minimize bleaching of fluorescent subjects. Frozen images can be subsequently modified with any of the enhancement functions: contrast, brightness, sharpness, red offset, blue offset.

Note: When using freeze frame, the subject must be stationary in order to obtain stable, flicker-free images.

Freeze frame on/off [FREEZE FRAME]

Pressing this button allows the user to “freeze” the displayed image on the monitor. Pressing the button again will restore the display to “live” video. When freeze frame is on, the letters “FF” will appear along with the current exposure when the Exposure function is turned on.

Congelamiento de cuadro

El congelamiento de cuadro (freeze frame) puede usarse para captar eventos transitorios o para minimizar el blanqueo de objetos fluorescentes. Las imágenes congeladas pueden modificarse posteriormente con cualquiera de las funciones para mejorar la imagen: contraste, brillantez, nitidez, compensación del rojo, compensación del azul.

Nota: Cuando se use el congelamiento de cuadro, el objeto debe estar inmóvil para obtener imágenes estables y sin parpadeo.

Congelamiento de cuadro activado/desactivado [FREEZE FRAME]

Si el usuario presiona este botón, puede “congelar” la imagen que aparece en la pantalla. Si vuelve a presionar el botón, regresa a la imagen en la condición de vídeo “en vivo”. Cuando el congelamiento de cuadro está activado, las letras “FF” aparecen junto con el valor de exposición actual cuando está activada la función de exposición (Exposure).

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Verstärkungsfunktionen

Die Verstärkungsfunktionen dienen zur Verbesserung der Klarheit von vorhandenen Bildern. Es handelt sich dabei um digitale Bildverarbeitungsfunktionen für Direktbilder oder Standbilder.

Enhancement functions

The enhancement functions are used to provide additional clarity to existing images. They are all digital processing functions, and can be applied to either live or frozen images.

Funciones para mejorar la imagen

Las funciones para mejorar la imagen se utilizan para aumentar la claridad de las imágenes existentes. Todas son funciones de procesamiento totalmente digitales y pueden aplicarse a imágenes vivas o congeladas.

Einstellen des Kontrasts [CONTRAST]

Mit dieser Taste wird der Kontrastmodus eingestellt. In diesem Modus kann das Kontrastgefälle eingestellt werden. Wenn sich die Kamera in diesem Modus befindet, zeigt der Monitor die aktuelle Kontrasteinstellung an, die dann mit den Pfeiltasten geändert werden kann. Die normale Kontrasteinstellung ist 0. Der Kontrast läßt sich stufenweise bis auf +16 erhöhen oder bis auf -16 verringern. Eine höhere Kontrasteinstellung ist hilfreich für die bessere Darstellung von Details und Konturen. Eine geringere Kontrasteinstellung eignet sich für die Darstellung von Objekten mit einem zu hohen Kontrast oder zur Hervorhebung von um Farbunterschieden anstelle von Helligkeitsunterschieden hervorzuheben. Im allgemeinen muß die Kontrastfunktion zusammen mit der Helligkeitsfunktion verwendet werden, um ein optimales Bild zu erzielen (siehe unten).

Set contrast [CONTRAST]

This key enters the camera into the set contrast mode. This mode allows the user to change the contrast slope of the image. While in this mode, the monitor will display the current contrast setting, which can then be changed with the arrow keys. The normal contrast setting is 0. The contrast can be increased in steps up to a setting of +16 or decreased to a setting of -16. Increased contrast is useful for improving visibility of details or contours. Decreased contrast is useful for subjects with excessive contrast, or as a means to accentuate color differences rather than brightness differences. In general, the contrast function will need to be used in conjunction with the brightness function to achieve the optimal image (see below).

Ajuste del contraste [CONTRAST]

Esta tecla coloca a la cámara en la modalidad de ajuste del contraste. Esta modalidad permite al usuario cambiar la curva de contraste de la imagen. Cuando esta modalidad está activada, la pantalla muestra el ajuste del contraste actual, que luego puede cambiarse con las teclas de dirección. El ajuste normal para el contraste es 0. El contraste puede aumentarse en incrementos hasta un ajuste máximo de +16, ó disminuirse hasta un ajuste de -16. El incremento del contraste es útil para aumentar la visibilidad de detalles o contornos. La disminución del contraste es útil para la observación de objetos con contraste excesivo, o para acentuar las diferencias de color más que las diferencias de brillantez. En general, hay que usar la función de contraste junta con la función de brillantez para lograr la imagen óptima (ver más abajo).

Einstellen der Helligkeit [BRIGHTNESS]

Mit dieser Taste wird der Helligkeitsmodus eingestellt. In diesem Modus kann die allgemeine Bildhelligkeit eingestellt werden. Wenn sich die Kamera in diesem Modus befindet, zeigt der Monitor die aktuelle Helligkeitseinstellung an , die dann mit den Pfeiltasten geändert werden kann. Die normale Helligkeitseinstellung ist 0. Die Helligkeit läßt sich stufenweise bis auf +32 erhöhen oder bis auf -32 verringern. Eine höhere Helligkeitseinstellung ist hilfreich für die bessere Darstellung von Details in dunklen Bereichen. Eine geringere Helligkeitseinstellung eignet sich für die Unterdrückung unwichtiger Details in dunklen Bildbereichen. Im allgemeinen muß die Helligkeitsfunktion zusammen mit der Kontrastfunktion verwendet werden, um ein optimales Bild zu erzielen (siehe oben).

Set brightness [BRIGHTNESS]

This key enters the camera into the set brightness mode. This mode allows the user to change the overall brightness of the image. While in this mode, the monitor will display the current brightness setting, which can then be changed with the arrow keys. The normal contrast setting is 0. The brightness can be increased in steps up to a setting of +32 or decreased to a setting of -32. Increased brightness is useful for improving visibility of features in dark areas. Decreased brightness is useful for suppressing unimportant features in dark areas of the image. In general, the brightness function will need to be used in conjunction with the contrast function to achieve the optimal image (see above).

Ajuste de la brillantez [BRIGHTNESS]

Esta tecla coloca a la cámara en la modalidad de ajuste de la brillantez. Esta modalidad permite al usuario cambiar la brillantez general de la imagen. Cuando esta modalidad está activada, la pantalla muestra el ajuste de la brillantez actual, que luego puede cambiarse con las teclas de dirección. El ajuste normal de la brillantez es 0. La brillantez puede aumentarse en incrementos hasta un ajuste máximo de +32, ó disminuirse hasta un ajuste de -32. El aumento de la brillantez es útil para mejorar la visibilidad de las características en áreas oscuras de la imagen. La disminución de la brillantez es útil para suprimir características sin importancia en áreas oscuras de la imagen. En general, la función de brillantez debe usarse junto con la función de contraste para lograr la imagen óptima (ver más arriba).

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Einstellen der Schärfe [SHARPNESS]

Mit dieser Taste wird der Schärfemodus eingestellt. In diesem Modus kann die allgemeine Detailver-stärkung des Bilds eingestellt werden. Wenn sich die Kamera in diesem Modus befindet, zeigt der Monitor die aktuelle Schärfeeinstellung an , die dann mit den Pfeiltasten geändert werden kann. Die normale Schärfeeinstellung ist 0. Die Schärfe läßt sich stufenweise bis auf +20 erhöhen. Eine höhere Schärfeeinstellung ist hilfreich für die bessere Darstellung feiner Details und Konturen im Bild.

Set sharpness [SHARPNESS]

This key enters the camera into the set sharpness mode. This mode allows the user to change the overall detail enhancement of the image. While in this mode, the monitor will display the current sharpness setting, which can then be changed with the arrow keys. The normal sharpness setting is 0. The sharpness can be increased in steps up to a setting of +20. Increased sharpness is useful for improving visibility of fine details and contours in the image.

Ajuste de la nitidez [SHARPNESS]

Esta tecla coloca a la cámara en la modalidad de ajuste de la nitidez. Esta modalidad permite al usuario cambiar el realce general del detalle de la imagen. Cuando esta modalidad está activada, la pantalla muestra el ajuste de nitidez actual, que luego puede cambiarse con las teclas de dirección. El ajuste normal de la nitidez es 0. La nitidez puede aumentarse en incrementos hasta un ajuste máximo de +20. El aumento de la nitidez es útil para mejorar la visibilidad de detalles finos y contornos finos en la imagen.

Wahl der Rot- bzw. Blauverschiebung [RED], [BLUE]

Mit diesen Tasten wird die Kamera in den Rot- bzw. Blauverschiebungs-Einstellmodus versetzt. In diesem Modus kann die allgemeine Farbabstufung eingestellt werden. Wenn sich die Kamera in diesem Modus befindet, zeigt der Monitor die aktuelle Einstellung an , die dann mit den Pfeiltasten geändert werden kann. Die normale Einstellung ist 0. Die gewählte Farbe läßt sich stufenweise bis auf +32 erhöhen oder bis auf -32 verringern. Positive Roteinstellun-gen lassen das Bild rötlicher erscheinen, während negative Roteinstellungen das Bild grüner erscheinen lassen. Positive Blaueinstellungen lassen das Bild bläulicher erscheinen, während negative Blaueinstellungen das Bild gelblicher erscheinen lassen.

Set red, blue offsets [RED], [BLUE]

These keys enter the camera into the set red or blue offset modes. These modes allow the user to change the overall color bias of the image. While in these modes, the monitor will display the current setting, which can then be changed with the arrow keys. The normal setting is 0. The selected color can be increased in steps up to a setting of +32 or decreased to a setting of -32. Positive red settings will make the image appear more red, while negative red settings will make the image appear more green. Positive blue settings will make the image appear more blue, while negative blue settings will make the image appear more yellow.

FijarAjuste de compensación los offsets del rojo y o del azul [RED], [BLUE]

Estas teclas colocan a la cámara en laos modalidades de fijarajuste de los offsetcompensación del rojo o del azul. Estas modalidades permiten al usuario cambiar la desviación del color general de la imagen. Cuando estas modalidades están activadas, la pantalla muestra el ajuste actual, que luego puede cambiarse con las teclas de dirección. El ajuste normal es 0. El color seleccionado puede aumentarse en incrementos hasta un ajuste máximo de +32, ó disminuirse hasta un ajuste de -32. Los ajustes positivos del rojo harán que la imagen se torne más rojiza, mientras que los ajustes negativos harán que la imagen se torne más verde. Los ajustes positivos del azul harán que la imagen se torne más azul, mientras que los ajustes negativos harán que la imagen se torne más amarilla.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Wahl der Rot- bzw. Blauverstärkung [Alt] [RED], [Alt] [BLUE]

Mit diesen Taste wird die Kamera in den Rot- bzw. Blauverstärkungs-Einstellmodus versetzt. Diese beiden Modi bieten dem Benutzer die Möglichkeit, den Weißabgleich der Kamera manuell zu verändern, was besonders dann von Vorteil ist, wenn kein automatischer Weißabgleich durchgeführt werden kann oder der Benutzer die Farbwiedergabe der Kamera zur Erhöhung der Aussagekraft der Abbildung manipulieren möchte (Hinweise zum Weißabgleich siehe Abschnitt “Weißabgleich” Seite 20). In diesen beiden Modi wird die aktuelle Einstellung auf dem Monitor angezeigt und kann mit den Pfeiltasten verändert werden. Der Einstellbereich reicht von 0 (Minimum) bis 255 (Maximum).

Set red, blue gains [Alt] [RED], [Alt] [BLUE]

These keys enter the camera into the set red or blue gain modes. These modes allow the user to change the white balance of the camera manually. This is useful in situations where the camera cannot be automatically white balanced or where the user would like to modify the color rendition of the camera to improve the appearance of the image. (See “White balance setting” section on page 20 for information about white balance). While in these modes the monitor will display the current setting, which can be changed with the arrow keys. The values range from 0 (minimum) to 255 (maximum).

FijarAjuste de las ganancias del rojo y o del azul [Alt] [RED], [Alt] [BLUE]

Estas teclas colocan a la cámara en las modalidades de fijarajuste de la ganancia del rojo o del azul o rojo. Estas modalidades permiten al usuario cambiar el balance del blanco de la cámara en forma manual. Esto es útil cuando no puede hacerse el balance del blanco automáticamente en la cámara o cuando el usuario desea modificar el la rendición del color obtenido con la cámara para mejorar el aspecto de la imagen. (Vea la sección “FijarAjuste del el balance del blanco” en la página 20 para información sobre el balance del blanco). Cuando la cámara está en estaos modalidades, el monitor muestra el ajuste actual, que el cuál puede cambiarse con las teclas de flechas. Los valores varían entre 0 (mínimo) y 255 (máximo).

Farbverstärkung [Alt] [WHITE BALANCE]

Mit dieser Tastenkombination wird die Kamera in den Farbverstärkungs-Wahlmodus versetzt. Bei aktivierter Farbverstärkung erscheinen farbige Objekte brillanter und satter, während Objekte in ungesättigten Farben (Weiß- und Grautöne) dunkler abgebildet werden. Dies ist dann von Nutzen, wenn Merkmale durch Einfärbung hervorgehoben werden, beispielsweise eingefärbte Zellen oder mit verschiedenen Fluoreszenzfarben markierte Subjekte. Mit den Pfeiltasten kann die Farbverstärkung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Set color enhancement [Alt] [WHITE BALANCE]

This key combination enters the camera into the set color enhancement mode. When color enhancement is on, colored objects will appear brighter and more vivid (saturated) while unsaturated objects (whites and grays) will appear darker. This is useful when the subject matter uses color as a means of differentiating features, such as stained cells and multi-dyed fluorescence subjects. Use the arrow keys to turn color enhancement on and off.

FijarAjuste del el realce del color [Alt] [WHITE BALANCE]

Esta combinación de teclas coloca a la cámara en la modalidad de fijarajuste del el realce del color. Cuando está encendidose activa el realce del color, los objetos coloreados se ven más brillantes y más intensos vívidos (saturados), y mientras que los objetos no saturados (blancos y grises) se ven más oscuros. Esto es útil cuando se usa el color para diferenciar las características del material examinado, tal como es en el caso con de preparaciones de células teñidas y el de material teñido con múltiples tintes fluorescentes. Use las teclas con flechas para encender activar y apagar desactivar el realce del color.

Rückstellen der Verstärkung [RESET]

Mit dieser Taste werden Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Rot- und Blauausgleich auf ihre Ausgangswerte rückeingestellt (0). Durch das erneute Drücken dieser Taste werden die vorherigen Einstellungen wieder aufgerufen. Mit dieser Funktion kann man schnell zwischen der verstärkten und normalen Darstellung hin- und herschalten, um die Auswirkungen der Verstärkung besser bewerten zu können.

Enhancement reset [RESET]

This key sets the contrast, brightness, sharpness, red offset, and blue offset to their default settings (0). Pressing the key a second time will restore the settings to their prior values. This function enables the user to quickly toggle between enhanced and unenhanced operation in order to better evaluate the effects of the enhancements.

Inicialización de las funciones para mejorar la imagen [RESET]

Esta tecla fija las funciones de contraste, brillantez, nitidez, ajuste del rojo y ajuste del azul en sus valores automáticos (0). Al presionar esta tecla nuevamente los ajustes vuelven a sus valores previos. Esta función le permite al usuario alternar rápidamente entre la operación mejorada y la no mejorada, para poder evaluar mejor el efecto de las mejoras.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Titel-Funktionen

Der Kameraprozessor verfügt über eine integrierte Titelfunktion, mit der Bilder mit einem alphanumerischen Text versehen werden können. Wenn der Titelmodus aktiviert ist, dient die Tastatur zum Eingeben des gewünschten Textes. Es sind fünf Textseiten vorgesehen vorhanden, die beschrieben und angezeigt dargestellt werden können. Auf jede Seite passen 10 Textzeilen zu je 24 Zeichen pro Zeile.

Titel bearbeiten editieren/Titel anzeigen/ Titel ausschalten [TITEL]

Durch Drücken der Taste TITLE wird der Titelbearbeitungsmodus editier-Modus aktiviert, in dem man Text in die angezeigte Titelseite eingeben kann. Wenn der Titelbearbeitungsmodus editier-Modus aktiviert ist, erscheint die Anzeige Title Edit sowie die jeweilige Seitenzahl am unteren Bildschirmrand. Im Textbereich erscheint ein blinkender Cursor und zeigt an, wo der Text beginnen soll. Der gewünschte Ttext wird über die Tastatur eingegeben.

Durch das erneute Drücken der Taste TITLE wechselt die Kamera in den Titelanzeige-Modus, in dem nur der jeweilige Text dargestellt wird, ohne daß ein Ändern des Texts möglich ist.

Wenn die Taste TITLE ein drittes Mal gedrückt wird, erlöscht die Titelanzeige.

Cursor-Bewegung [↓], [↑], [←], [→]

Im Titelbearbeitungsmodus editier-Modus kann der Cursor mit den vier Pfeiltasten in der unteren rechten Ecke der Tastatur an eine beliebige Textstelle bewegt werden.

Titling functions

The camera processor has a built-in titling generator, which allows the user to annotate images with alphanumeric text. When in the title edit mode, the keyboard is used as a typewriter to enter desired text. There are five “pages” of text which can be written to and displayed. Each page can hold 10 lines of text, 24 characters per line.

Title edit/title display/title off [TITLE]

Pressing the TITLE key causes the camera to enter title edit mode, which allows the user to enter text into the current title page. When in title edit mode, the message “Title Edit” will appear at the bottom of the monitor along with the current page number. A flashing cursor will appear in the text area, indicating where the text will be placed. To enter text, simply type the desired message from the keyboard.

Pressing the TITLE key again switches the camera into title display mode, which only displays the current text and does not allow the text to be changed.

Pressing the TITLE key a third time turns the title display off.

Cursor movement [↓], [↑], [←], [→]

In title edit mode, the four arrow keys in the lower right corner of the keyboard can be used to position the cursor anywhere in the text area.

Funciones para títulos

El procesador de la cámara tiene un generador de títulos integrado, que permite al usuario hacer anotaciones sobre las imágenes, con texto alfanumérico. Cuando está en la modalidad de redacción de títulos, el teclado sirve como máquina de escribir para introducir el texto deseado. Hay cinco “páginas” de texto en las que puede escribirse y que aparecen en la pantalla. Cada página puede contener hasta 10 líneas de texto, con 24 caracteres por línea.

Redacción de títulos/Visualización de títulos/Desactivación de títulos [TITLE]

Al presionar la tecla TITLE la cámara inicia la modalidad de redacción de títulos, que permite al usuario la introducción de texto en la página de títulos actual. Cuando la cámara está en la modalidad de redacción de títulos, aparece el mensaje “Title Edit” (“Redacción de títulos”) en el borde inferior de la pantalla junto con el número de la página actual. Un cursor intermitente aparece en el área de texto, indicando el lugar donde se colocará el texto. Para introducir texto, simplemente teclee el mensaje deseado.

Si vuelve a presionar la tecla TITLE, la cámara cambia a la modalidad de visualización de títulos, que solamente permite la observación del texto actual, sin permitir su modificación.

Si presiona la tecla TITLE por tercera vez, se desactiva la función de visualización de títulos.

Movimiento del cursor [↓], [↑], [←], [→]

En la modalidad de redacción de títulos, las cuatro teclas de dirección (con flechas) que están en la esquina inferior derecha del teclado, pueden utilizarse para colocar el cursor en cualquier posición en el área de texto.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Seite nach oben/Seite nach unten [Fn] [PgUp], [Fn] [PgDn]

Durch die Tastenkombinationen Fn-PgUp und Fn-PgDn läßt sich die jeweilige Seitennummer im Titeleditier- oder Titelanzeige-Modus erhöhen bzw. oder verringern. Es sind insgesamt fünf Seiten vorhanden.

Hinweis: Die Taste Fn befindet sich in der linken unteren Ecke der Tastatur und die Tasten PgUp und PgDn sind gleichzeitig die nach oben und unten weisenden Pfeiltasten in der rechten unteren Ecke der Tastatur.

Page up/page down [Fn] [PgUp], [Fn] [PgDn]

The Fn-PgUp and Fn-PgDn key combinations increment or decrement the current page number when in title edit or title display mode. There are a total of five pages.

Note: The Fn key is in the lower left corner of the keyboard, and the PgUp and PgDn keys are also the up and down arrow keys in the lower right corner of the keyboard.

Página superior/Página inferior [Fn][PgUp], [Fn][PgDn]

Las combinaciones de las teclas Fn-PgUp y Fn-PgDn incrementan o disminuyen el numero de la página actual cuando se está en las modalidades de redacción de títulos o de visualización de títulos. Hay un número total de cinco páginas.

Nota: La tecla Fn está en la esquina inferior izquierda del teclado; las teclas PgUp y PgDn son también las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, y están en la esquina inferior derecha del teclado.

Überschreibe-/Einfügemodus [INSERT]

Mit der Einfügetaste kann man im Texteditor zwischen dem Überschreibe- und Einfügemodus hin- und herwechseln, wenn sich die Kamera im Titeleditier-Modus befindet. Im Überschreibemodus erscheint der Cursor als blinkendes weißes Quadrat, und das eingegebene Zeichen ersetzt lediglich das unter dem Cursor befindliche Zeichen durch ein neues. Im Einfügemodus erscheint der Cursor als blinkender Unterstrich, und das eingegebene Zeichen wird inmittelbar links neben dem Cursor eingefügt; die anderen Zeichen werden von der Cursorposition aus nach rechts verschoben.

Replacement mode/insert mode [INSERT]

The Insert key toggles the text editor between replacement mode and insert mode when the camera is in title edit mode. In replacement mode, the cursor appears as a flashing white square, and typing a character simply replaces the character under the cursor with the new one. In insert mode, the cursor appears as a flashing underscore, and typing a character inserts the new character immediately to the left of the cursor and shifts the characters to the right of the insertion point.

Modalidad de sustitución/Modalidad de inserción [INSERT]

La tecla Insert alterna el control de texto entre la modalidad de sustitución de texto y la de inserción de texto cuando la cámara está en la modalidad de redacción de títulos. En la modalidad de sustitución de texto, el cursor aparece como un cuadrado blanco parpadeante y la introducción de un carácter simplemente reemplaza el carácter cubierto por el cursor con el carácter introducido. En la modalidad de inserción, el cursor aparece como un subrayado parpadeante y la introducción de un carácter inserta este inmediatamente a la izquierda del cursor y mueve los caracteres hacia la derecha del punto de inserción.

Zeichen an der Cursorposition löschen [DELETE]

Mit der Taste Delete wird das unter dem Cursor befindliche Zeichen im Titeleditier-Modus gelöscht.

Delete current character [DELETE]

The Delete key causes the character underneath the cursor to be deleted when in title edit mode.

Borrado del carácter actual [DELETE]

La tecla Delete borra el carácter que se encuentra cubierto por el cursor cuando se está en la modalidad de redacción de títulos.

Zeichen vor der Cursorposition löschen [BACKSPACE]

Mit der Taste Backspace“ wird im Titelbearbeitungsmodus editier-Modus das links vom Cursor befindliche Zeichen gelöscht.

Delete previous character [BACKSPACE]

The Backspace key causes the character to the left of the cursor to be deleted when in title edit mode.

Borrado del carácter previo [BACKSPACE]

La tecla Backspace borra el carácter a la izquierda del cursor cuando se está en la modalidad de redacción de títulos.

Seite löschen [Alt] [DELETE]

Mit der Tastenkombination Alt-Delete wird im Titeleditier-Modus der gesamte Text auf der Seite gelöscht.

Clear current page [Alt] [DELETE]

The Alt-Delete key combination causes all text in the current page to be deleted when in title edit mode.

Borrado de la página actual [Alt] [DELETE]

La combinación de las teclas Alt-Delete borra el texto en la página actual cuando se está en la modalidad de redacción de títulos.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Alle Seiten löschen [Ctrl] [DELETE]

Mit der Tastenkombination Ctrl-Delete wird im Titeleditier-Modus der gesamte Text auf allen Seiten gelöscht.

Clear all pages [Ctrl] [DELETE]

The Ctrl-Delete key combination causes all text in all pages to be deleted when in title edit mode.

Borrado de todas las páginas [Ctrl] [DELETE]

La combinación de las teclas Ctrl-Delete borra el texto en todas las páginas cuando se está en la modalidad de redacción de títulos.

Farbbalken

Die Kamera-SteuerKontrolleinheit (CCU) verfügt über einen integrierten Farbbalken-Generator. Diese Funktion hilft beim Einstellen des Monitors (siehe Abschnitt “Einstellen des Farbmonitors“ in dieser Anleitung), beim Erstellen eines Vorspanns für die Videoaufzeichnung oder bei der für die Fehlersuche bei in einem Videosystem. Beim verwendeten Muster handelt es sich um das SMPTE-Farbbalkenmuster, das Balken in allen jeder Primär- und Sekundärfarben sowie ein Pluge-Signal enthält, das zur Helligkeitseinstellung des Monitors dient verwendet wird.

Color bars

The camera control unit has a built in color bar generator. This is useful for adjusting the monitor (see “Adjusting Color Monitor” section in this manual), providing a leader for videotape recording, or for troubleshooting a video system. The pattern used is the SMPTE color bar pattern which includes bars of each primary and secondary color and a pluge signal, which is used to set the brightness level of the monitor.

Barras de colores

La unidad de control de la cámara tiene un generador de barras de color integrado. Esto es útil para el ajuste del monitor (véase la sección “Ajustando el monitor a colores” en este manual), para proveer una señal de inicio para la grabación de una cinta de vídeo, o para el diagnóstico de fallas en un sistema de vídeo. El patrón de barras usado es el patrón de barras a colores SMPTE, el cuál incluye barras de cada color primario y secundario, además de una señal de inyección que se utiliza para ajustar el nivel de brillantez del monitor.

Farbbalken Ein/Aus [COLOR BARS]

Mit dieser Taste wird das Farbbalken-Testmuster ein- oder ausgeschaltet. Wenn die Farbbalken aktiviert sind, können außer der Titelfunktion keine der übrigen Kamerafunktionen aufgerufen werden.

Color bars on/off [COLOR BARS]

This key toggles the color bar test pattern on and off. When color bars are on, all camera functions are disabled except for titling.

Barras de colores activado/desactivado [COLOR BARS]

Esta tecla alterna la prueba del patrón de barras de colores entre activada y desactivada. Cuando las barras de colores están activadas, todas las funciones de la cámara se inactivan excepto la función de títulos.

Kamerarückstellung

Mit der Rückstellfunktion werden sämtliche Kameraparameter auf einen ihren Ausgangswert zurückgestellt. Dadurch kann eine bekannte Kameraeinstellung erzielthalten werden, wenn man die Einstellungen nicht kennt.

Camera reset

The camera reset function sets all camera parameters to default states. This is a convenient way to put the camera into a known state if the settings are unknown.

Reinicialización de la cámara

La función de inicialización de la cámara fija todos los parámetros de la cámara en sus valores automáticos. Esta es una manera conveniente de ajustar la cámara a valores conocidos si se desconocen sus ajustes actuales.

Standard-Rückstellung [Alt] [RESET]

Mit der Tastenkombination Alt-RESET wird eine Standard-Rückstellung aktiviert. Sämtliche Verstärkungsfunktionen werden ausgeschaltet, die Kamera wird in den automatischen Belichtungsmodus versetzt, die Gewichtung wird auf den vollen Bildschirm eingestellt und der Weißabgleich auf 2800 K eingestellt, die Farbbalken, die Standbildfunktion und die Titelfunktion werden ausgeschaltet.

Standard reset [Alt] [RESET]

The Alt-RESET key combination initiates a standard reset. All enhancements are turned off, the camera is placed in auto exposure mode, the weighting is set to full screen, the white balance is set to 2800K, the color bars are turned off, freeze frame is turned off, and titling is turned off.

Inicialización normal [Alt] [RESET]

La combinación de las teclas Alt-RESET produce la inicialización. Se inactivan todas las funciones para mejorar la imagen, la cámara se coloca en la modalidad de exposición automática, la imagen se procesa en pantalla completa, el balance del blanco se ajusta a 2800K, las barras de colores se inactivan, el congelamiento de cuadro se inactiva y también se inactiva la redacción de títulos.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Funktionsausgang

Eine aktivierte Funktion wird in der Zeile am unteren Rand des Monitors angezeigt (EXPOSURE, AUTO usw.). Eine Funktion kann durch das erneute Drücken der jeweiligen Funktionstaste oder mit Hilfe der allgemeinen Beendigungs-Funktion beendet ausgeschaltet werden.

Allgemein beenden [Alt] [SPACE]

Mit der Tastenkombination Alt-SPACE können beliebige Funktionen schnell beendet werden; dabei wird gleichzeitig der Text am unteren Bildschirmrand gelöscht ([SPACE] ist die Leertaste im unteren Bereich unten an der Tastatur).

Standard-Belichtungsmodus

Wenn am unteren Bildschirmrand kein Text erscheint, befindet sich die Kamera wieder im Standard-Belichtungsmodus. Durch Drücken der Pfeiltasten wird die Belichtung entsprechend geändert.

Bedienelemente an der Frontplatte

Auf der Frontplatte des Kameraprozessors befinden sich Knöpfe für die Farbbalken, den Weißabgleich, die GewichtungBewertung, die Belichtung, Automatik- bzw. manuellen Betrieb sowie die Aufwärts- und die Abwärtspfeiltaste, die funktionell den Auf- und Abwärtspfeiltasten der Tastatur entsprechen. Sie können verwendet werden, wenn die Tastatur defekt ist oder keine Tastatur zur Verfügung steht. Wenn eine der Funktionen “Belichtung” und “Bewertung” aktiviert ist, können die Werte mit den Pfeiltasten an der Frontplatte verändert werden. Drückt man beide Pfeiltasten gleichzeitig, wird die Kamera auf die Standardwerte zurückgestellt.

Function exit

A currently active function will be indicated along the bottom line of the monitor (“EXPOSURE,” “AUTO,” etc.). A function can be exited by pressing its function key again, pressing another function key, or by using the general exit function.

General exit [Alt] [SPACE]

The Alt-SPACE key combination allows the user to quickly exit any function, and simultaneously clear the text at the bottom of the screen ([SPACE] is the spacebar at the bottom of the keyboard).

Default exposure mode

If no text appears on the bottom of the monitor image, the camera defaults to exposure set mode. Pressing the up or down keys on the keyboard will change the exposure accordingly.

Front panel controls

The camera processor front panel has buttons for Color Bars, White Balance, Weighting, Exposure, Auto/Manual, Up Arrow, and Down Arrow which are functionally identical to their counterparts on the keyboard. These controls can be used if the keyboard is malfunctioning or missing. If the Exposure or Weighting functions are enabled, use the up and down arrow buttons on the front panel to change the settings. Press the up and down arrow buttons simultaneously to initiate a standard reset of the camera.

Salida de función

La función que está activa aparece en la parte inferior de la pantalla (“EXPOSURE,” “AUTO,” etc.). Para salir de una función, presione nuevamente la tecla correspondiente, presione la tecla para otra función, o utilice la función de salida general.

Salida general [Alt] [SPACE]

La combinación de las teclas Alt-SPACE le permite al usuario salir de cualquier función, borrando simultáneamente el texto en la parte inferior de la pantalla ([SPACE] es la barra espaciadora en la parte inferior del teclado).


Modalidad de exposición automática

Si no aparece texto en la parte inferior de la imagen en el monitor, la cámara automáticamente se coloca en la modalidad de ajuste de exposición. Si presiona las teclas de dirección arriba y dirección abajo, puede cambiar el valor de exposición.

Controles del panel delanterofrontal

El panel delantero frontal del procesador de la cámara tiene botones para las Barras de colores, Balance del blanco, Compensación, Exposición, Automático/Manual, Flecha hacia arriba, Flecha hacia abajo, los que funcionalmente son funcionalmente idénticoas a su las teclas equivalentes en el teclado. Estos controles pueden usarse si el teclado está funcionando mal o si no hay teclado. Si se activan las funciones Exposición y Compensación, se usan los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para cambiar los ajustes. Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo simultáneamente para lograr una reinicialización estándar dereinicializar la cámara de manera estándar.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

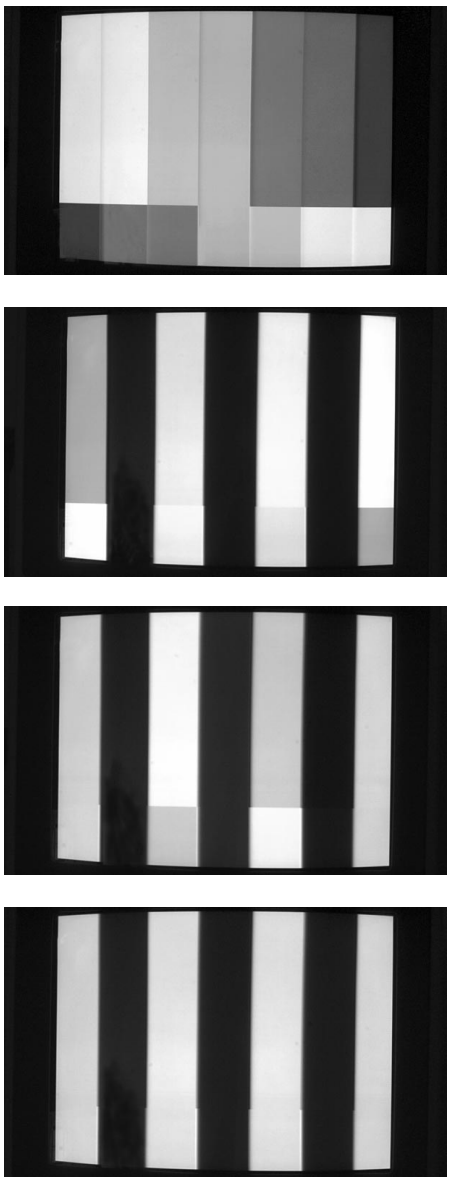

Farbeinstellung mit den SMPTE-Farbbalken

HINWEIS: Die unten beschriebenen Einstellungen gelten nur für Composite- oder Y/C-Videosignale. Bei den meisten RGB-Monitoren ist die Farbe ab Werk eingestellt, und Farbintensität oder Farbtonabstufung können nicht manuell eingestellt werden. Im RGB-Modus können lediglich BRIGHTNESS (HELLIGKEIT) und CONTRAST (KONTRAST) eingestellt werden.

1) Den SMPTE-Farbbalken-Generator durch Drücken der Taste COLOR BARS aktivieren.
2) *Kontrasteinstellung*
   Den Kontrast auf auf die höchste Bildhelligkeit einstellen, ohne daß es dabei zu Überstrahlen oder Verzerrungen kommt.
3) *Einstellen der Helligkeit*
   Die Helligkeitsregelung des Monitors so einstellen, daß bis der rechte Pluge -Balken wie abgebildet gerade sichtbar ist.
4) Für die beiden folgenden Einstellungen (Farbstärke und Phase) die Blau-Taste des Monitors - falls vorhanden - drücken. Andernfalls durch einen blauen Wratten 47B-Filter auf den Monitor blicken.
5) *Einstellen der Farbstärke*
   Die Farbstärkeregelung am Monitor einstellen, bis die Intensität der angezeigten Balken übereinstimmt (nur blau eingeschaltet oder durch einen blauen Wratten 47B-Filter betrachtet).
6) *Einstellung der Phase (Farbton, Nuance)*
   Die Phasenregulierung am Monitor einstellen, bis die Intensität der angezeigten Balken übereinstimmt (nur blau eingeschaltet oder durch einen blauen Wratten 47B-Filter betrachtet).
7) Wenn eine korrekte Einstellung erzielt wurde, die Blau-Taste erneut drücken (oder den Filter zur Seite legen). Die farben müßten jetzt korrekt sein.
8) Die taste COLOR BARS erneut drücken, um zur normalen Kamerafunktion zurückzukehren.

Color adjustment using SMPTE-type color bars

NOTE: The adjustments below are for composite or Y/C video only. Most monitors in RGB mode have preset color by the manufacturer, and color intensity or hue cannot be manually adjusted. Only the BRIGHTNESS and CONTRAST adjustment can be performed in RGB mode.

1) Activate the SMPTE-type color bar generator by pressing the COLOR BARS key.
2) *Contrast adjustment*
   Set contrast for brightest possible image without blooming or distortion.
3) *Brightness adjustment*
   Set the brightness control on the monitor until the right hand “pluge” bar is just visible, as shown.
4) For the next two adjustments (chroma and phase), press the *blue only* button on the monitor, if so equipped. Otherwise, view the monitor through a blue Wratten 47B filter.
5) *Chroma (color) adjustment*
   Adjust the chroma (or color) control on the monitor until the indicated bars match in intensity (*blue only* on, or viewed through blue 47B filter).
6) *Phase (hue, tint) adjustment*
   Adjust the phase (or hue, tint) control on the monitor until the indicated bars match in intensity (*blue only* on, or viewed through blue 47B filter).
7) When the correct results have been achieved, press the *blue only* button again (or set aside the blue filter). The colors should now be accurate.
8) Press the COLOR BARS key again to return to normal camera operation.

Ajuste del color mediante las barras de colores tipo SMPTE

NOTA: Los ajustes que siguen son solamente para vídeo compuesto o Y/C (amarillo/cian). La mayoría de los monitores en la modalidad de RGB (rojo, verde, azul) tienen colores prefijados por el fabricante; por consiguiente, la intensidad del color y el tinte no pueden ajustarse manualmente. En la modalidad RGB sólo puede ajustarse la brillantez ([BRIGHTNESS]) y el contraste ([CONTRAST]).

1) Para activar el generador de barras de colores tipo SMPTE, presione la tecla COLOR BARS.
2) *Ajuste del contraste*
   Ajuste el contraste para la máxima brillantez posible de la imagen sin que se produzcan zonas opacas o distorsión.
3) *Ajuste de brillantez*
   Ajuste el control de la brillantez en el monitor hasta que la barra de la señal de inyección, a la derecha, apenas pueda verse, como se indica.
4) Para los próximos dos ajustes (cromático y fase), presione el botón solamente-azul en el monitor, si está presente. Si no existe este botón, observe la pantalla a través de un filtro azul Wratten N° 47B.
5) *Ajuste cromático*
   Ajuste el control del color (croma) de la pantalla hasta que las barras indicadas tengan igual intensidad (solamente-azul activado, o vistas a través del filtro azul N° 47B).
6) *Ajuste de fase (tinte o tonalidad)*
   Ajuste el control de fase (tinte o tonalidad) de la pantalla hasta que las barras indicadas tengan igual intensidad (solamente-azul activado, o vistas a través del filtro azul N° 47B).
7) Cuando obtenga los resultados correctos, presione nuevamente el botón solamente-azul (o retire el filtro azul). En este momento los colores deben verse con exactitud.
8) Presione nuevamente la tecla COLOR BARS para volver a la operación normal de la cámara.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Zusammenfassung der ALT-Befehle

[Alt] [W]
Wahl der automatischen Belichtungsbewertung

[Alt] [L]
Wahl der Verschlußzeitbegrenzung für automatische Belichtung

[Alt] [G]
Wahl der Gammakurve

[Alt] [WHITE BALANCE]
Farbverstärkung ein/aus

[Alt] [RED]
Rotverstärkung

[Alt] [BLUE]
Blauverstärkung

[Alt] [DELETE]
Sämtlichen Text auf dieser Titelseite löschen

[Ctrl] [DELETE]
Sämtlichen Text auf allen Titelseiten löschen

[Alt] [RESET]
Die Standard-Rückstellung der Kamera aktivieren

[Alt] [SPACE]
Die gegenwärtig aktivierte Funktion beenden

[Ctrl] [Alt] [F]
Einzelfeldmodus ein/aus

[Alt] [C]
Farbschattierungskorrektion

Summary of ALT commands

[Alt] [W]
Set auto exposure weighting

[Alt] [L]
Set auto exposure shutter speed limit

[Alt] [G]
Set gamma

[Alt] [WHITE BALANCE]
Set color enhancement on/off

[Alt] [RED]
Set red gain

[Alt] [BLUE]
Set blue gain

[Alt] [DELETE]
Clear all text in current title page

[Ctrl] [DELETE]
Clear all text in all title pages

[Alt] [RESET]
Initiate standard reset of camera

[Alt] [SPACE]
Exit current function

[Ctrl] [Alt] [F]
Single field mode on/off

[Alt] [C]
Color shading correction

Resumen de mandos ALT

[Alt] [W]
FijarAjusta la compensación de la autoexposición

[Alt] [L]
FijarAjusta el límite de velocidad del obturador en autoexposición

[Alt] [G]
FijarAjusta el valor gamma

[Alt] [WHITE BALANCE]
FijarActiva/Desactiva el ajuste el de realce de colores en encendido/apagado

[Alt] [RED]
FijarAjusta la ganancia del rojo

[Alt] [BLUE]
FijarAjusta la ganancia del azul

[Alt] [DELETE]
Borra el texto en la página de títulos actual

[Ctrl] [DELETE]
Borra el texto en todas las páginas de títulos

[Alt] [RESET]
Inicializa la cámara a sus valores normales

[Alt] [SPACE]
Salida de la función actual

[Ctrl] [Alt] [F]
FijarActiva/Desactiva el ajuste de la modalidad de campo único en encendido/apagado

[Alt] [C]
Corrección de sombra de color

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Systemkonfiguration 1


Videosystem
Tastatur
Y/C Recorder
Composite-Videomonitor

System configuration 1

Video system
Keyboard
Y/C recorder
Composite video monitor

Configuración del sistema 1

Sistema de vídeo
Teclado
Grabadora Y/C
Monitor de vídeo compuesto

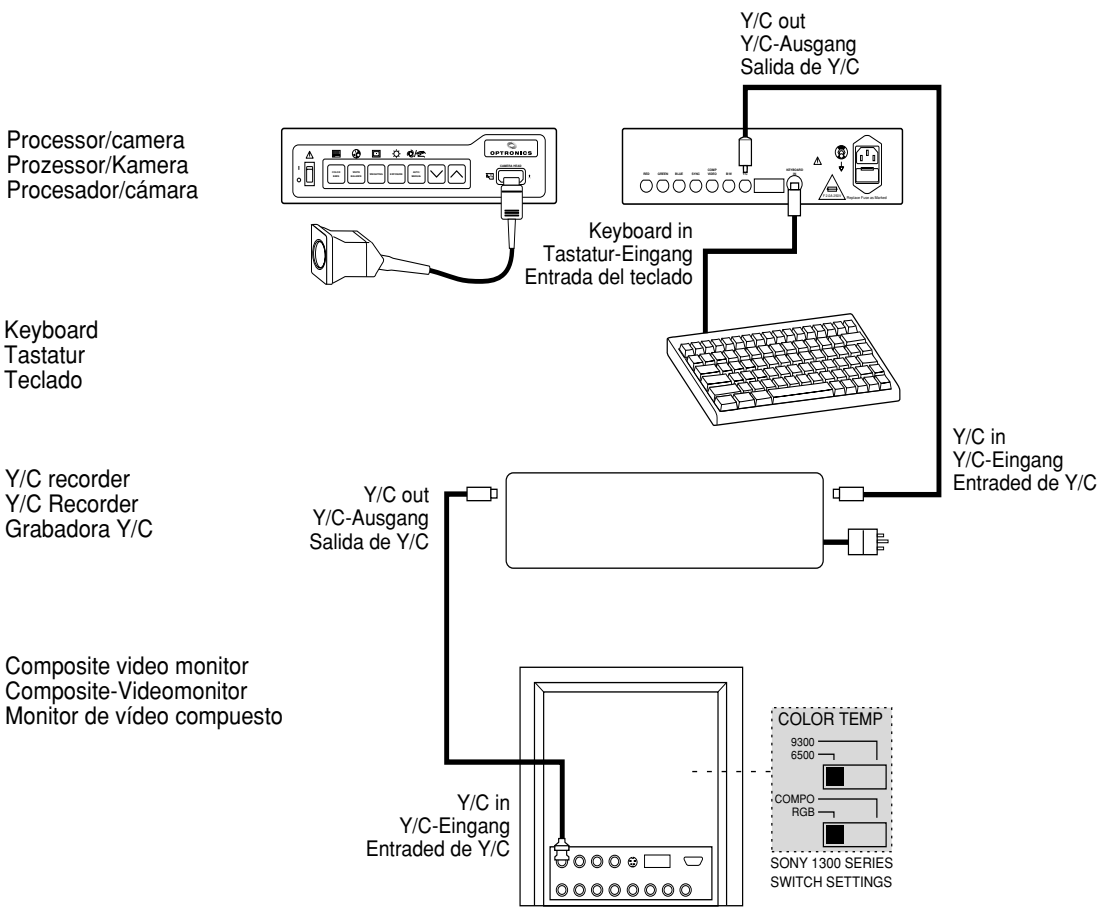

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Systemkonfiguration 2


Videosystem
Tastatur
RGB Videomonitor

System configuration 2

Video system
Keyboard
RGB video monitor

Configuración del sistema 2

Sistema de vídeo
Teclado
Monitor de vídeo RGB

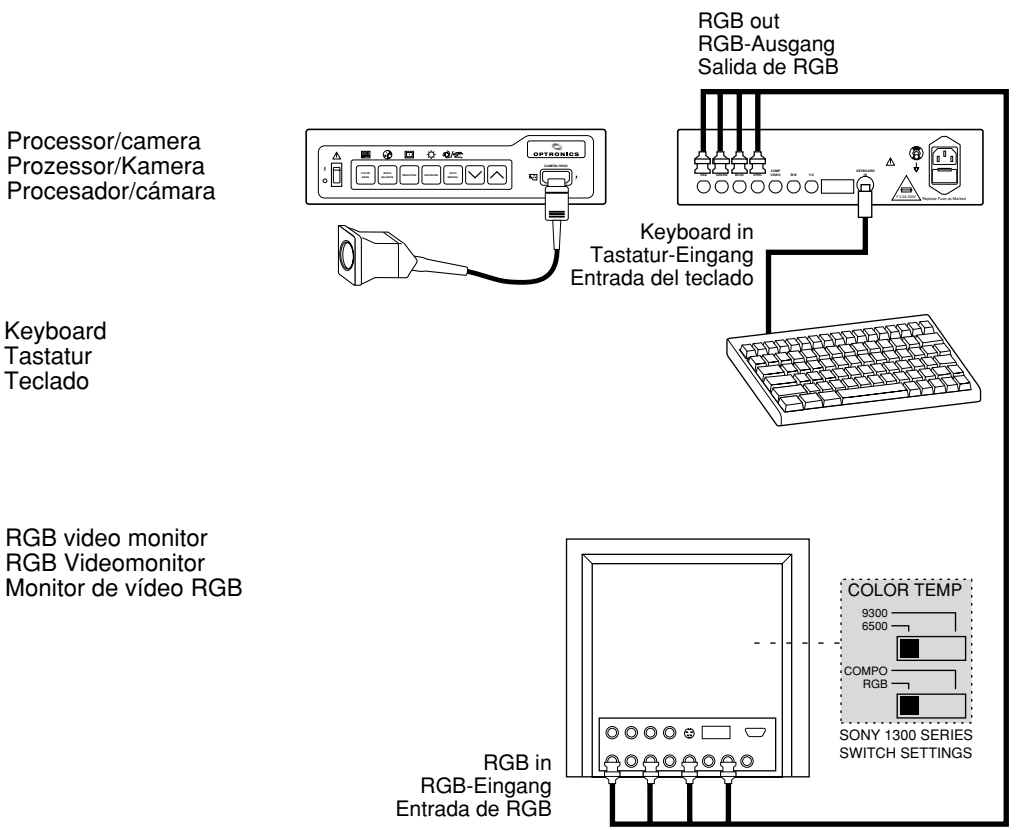

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Systemkonfiguration 3


Videosystem
Tastatur
Videorecorder
Composite-Videomonitor

System configuration 3

Video system
Keyboard
Video cassette recorder
Composite video monitor

Configuración del sistema 3

Sistema de vídeo
Teclado
Grabadora de videocasetes
Monitor de vídeo compuesto

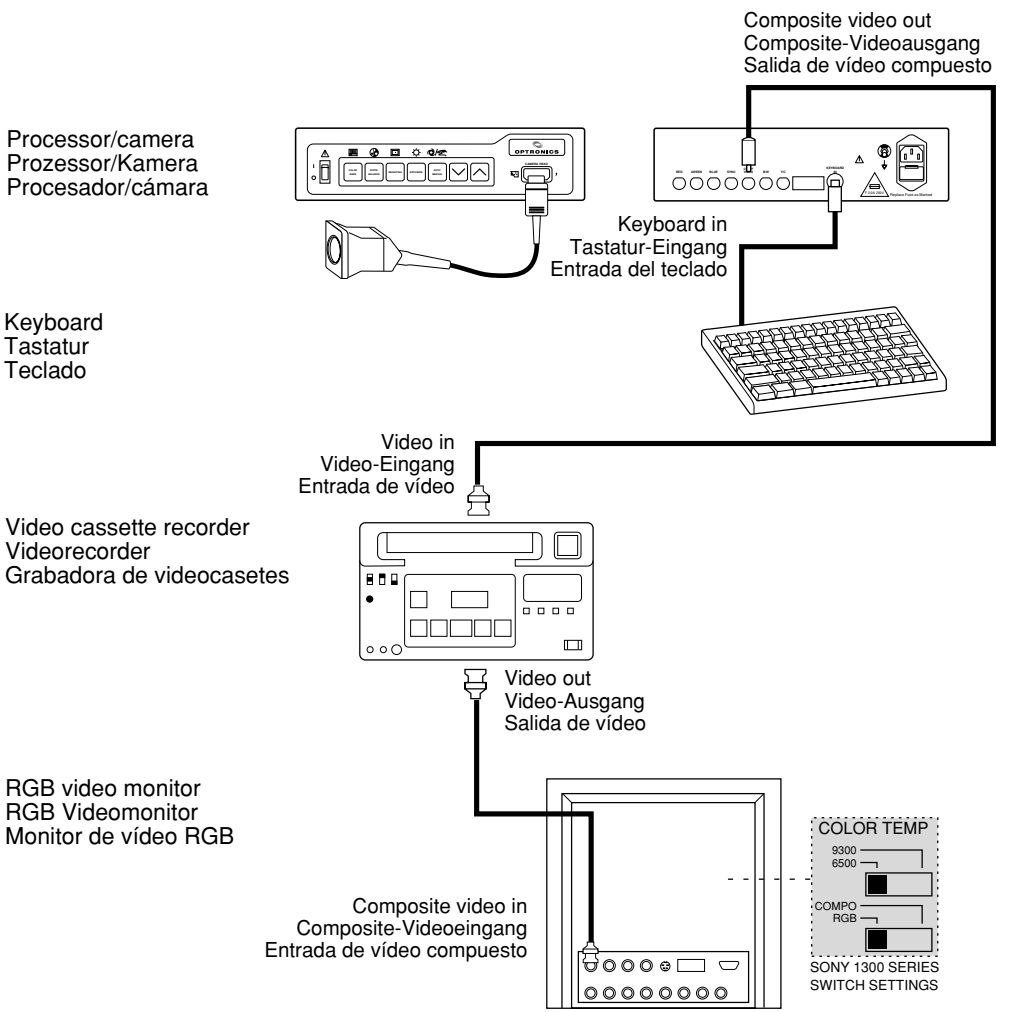

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Systemkonfiguration 4


Videosystem
Tastatur
Videorecorder
Bilddrucker oder Plattenaufzeichnung
Composite-Videomonitor

System configuration 4

Video system
Keyboard
Video cassette recorder
Video printer or disk recorder
Composite video monitor

Configuración del sistema 4

Sistema de vídeo
Teclado
Grabadora de videocasetes
Impresora de vídeo o grabadora de disco
Impresora de vídeo compuesto

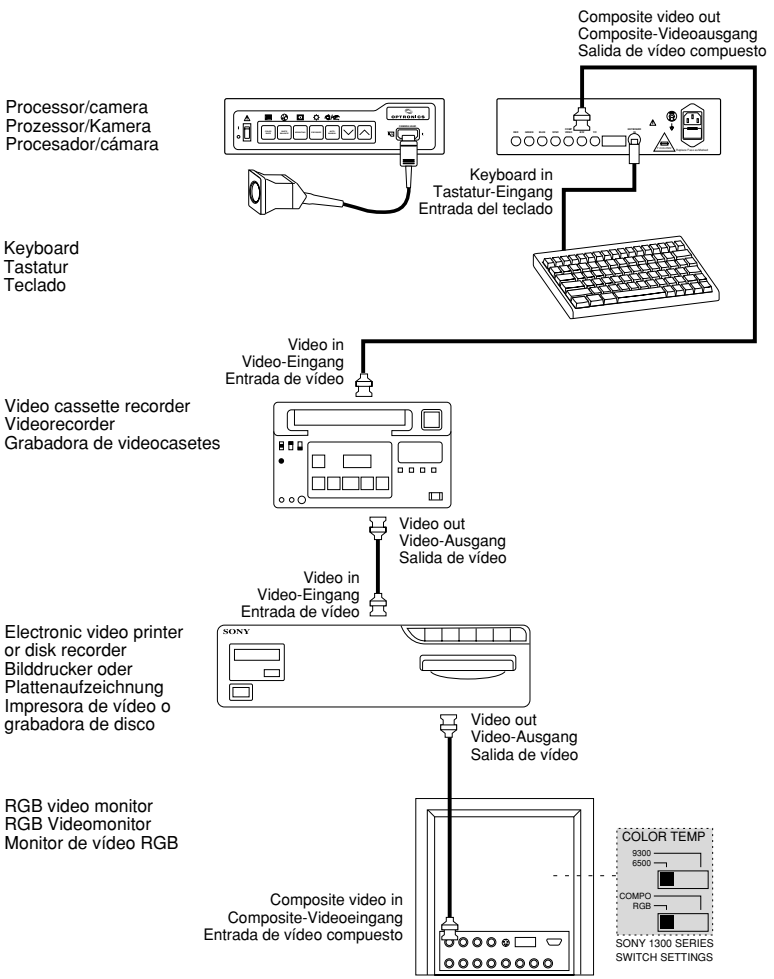

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Systemkonfiguration 5


Videosystem
Tastatur
Composite-Videomonitor
Zusätzlicher Videomonitor

System configuration 5

Video system
Keyboard
Composite video monitor
Additional video monitor

Configuración del sistema 5

Sistema de vídeo
Teclado
Monitor de vídeo compuesto
Monitor de vídeo adicional

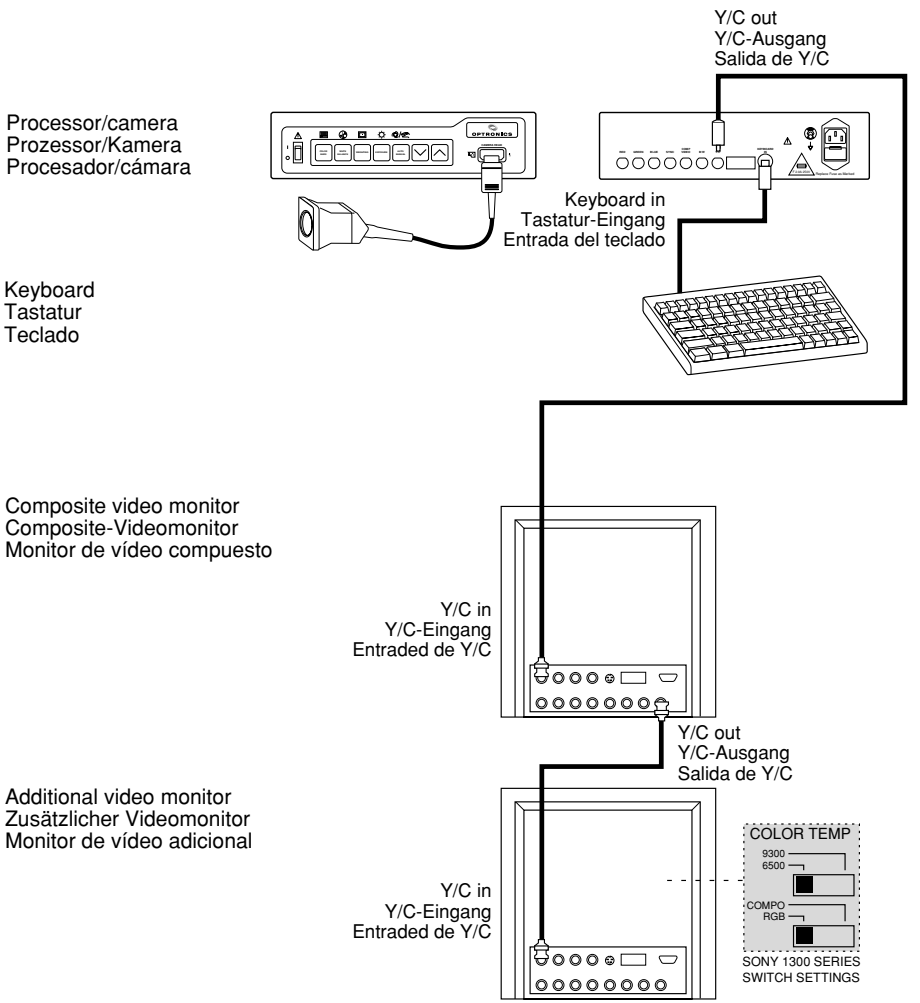

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Systemkonfiguration 1


Videosystem
Tastatur
Sony UP5000 Bilddrucker
RGB Videomonitor

System configuration 6


Video system
Keyboard
Sony UP5000 video printer
RGB video monitor

Configuración del sistema 6

Sistema de vídeo
Teclado
Impresora de vídeo Sony UP5000
Monitor de vídeo RGB

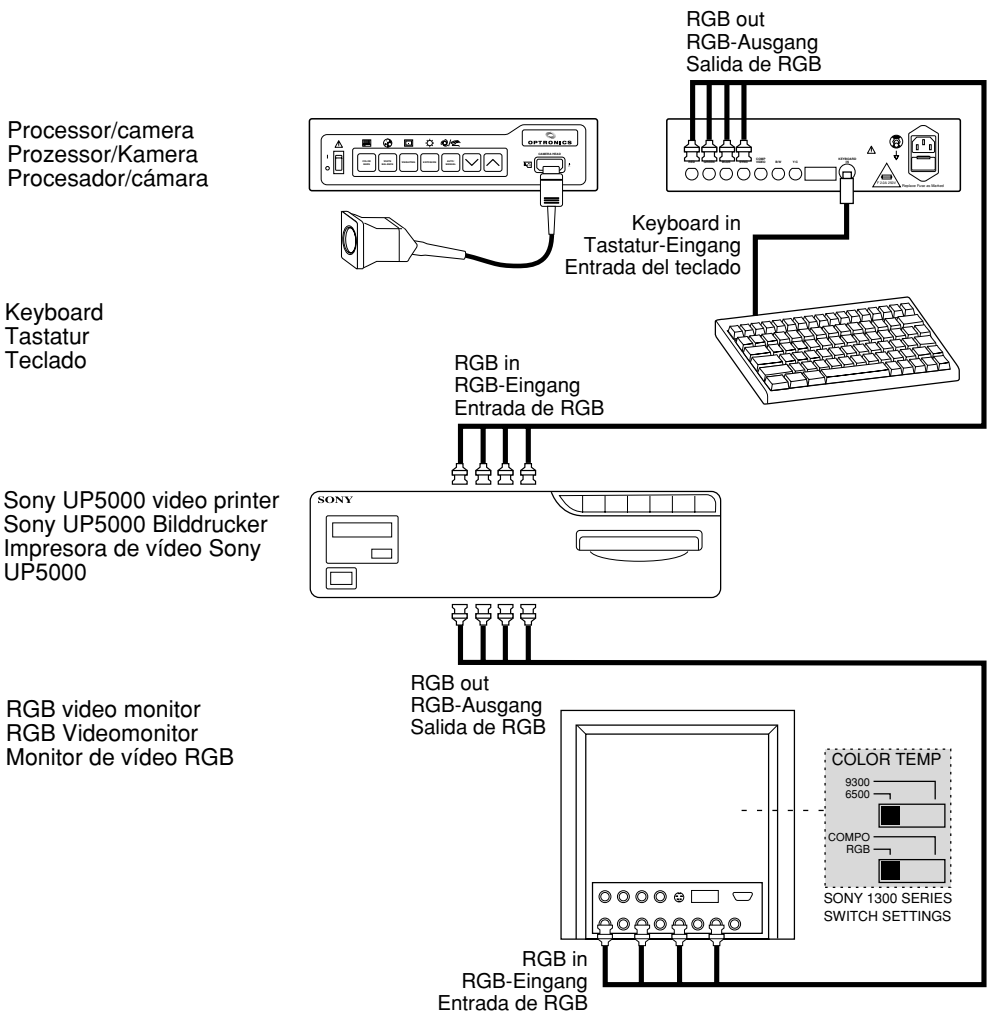

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

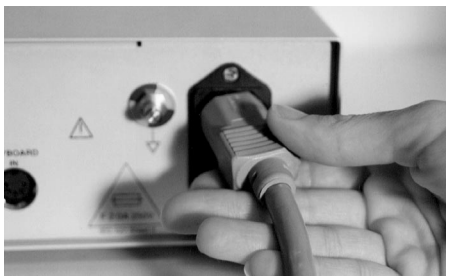

Sicherungswechsel

Gerät ausschalten und Netzverbindung lösen.

VORSICHT: Nur Sicherungen gem. IEC 127, Blatt II, Typ F verwenden.

Fuse replacement


Switch off the instrument and remove the power plug from the electrical outlet.

CAUTION: Use only fuses approved to IEC 127 Sheet II, Type F for replacement.

Cambio de fusibles

Desconectar el equipo y desenchufar la conexión a la red.

ADVERTENCIA: Utilice solamente fusibles aprobados en la IEC 127 hoja II, Tipo F.

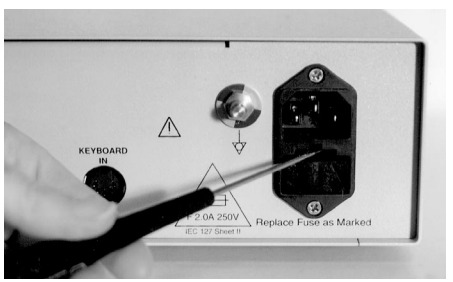

Netzsicherungshalter ⑧ mit einem Werkzeug lösen.

Remove the power fuse holder ⑧ with a screwdriver or other tool.

Desprender la abrazadera de seguridad del portafusibles ⑧ con la ayuda de un destornillador.



Neue Sicherungen einsetzen.

Vorsicht: Nur die angegebenen Sicherungswerte verwenden.

	100–240 VAC
Netzsicherungen	2 x F2.0A

Insert new fuses of the appropriate rating.

Caution: Only use fuses of the correct rating.

	100–240 VAC
Power fuses	2 x F2.0A

Colocar fusibles nuevos.

Advertencia: Colocar solamente los fusibles con los valores recomendados!

	100–240 VAC
Fusibles de la red	2 x F2.0A



Sicherungschalter ⑧ wieder einsetzen.
Netzverbindung wieder herstellen.
Funktionsprüfung durchführen.

Replace and tighten the caps of the fuse holder ⑧.
Reconnect the power cord.
Test the instrument for proper operation.

Recolocar el portafusibles ⑧.
Volver a conectar a la red.
Controlar el funcionamiento.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com



Reinigung und Lagerung

Kamerakopf

1. Falls die Kamerakopf gereinigt werden muß, kann sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abewischt werden.
2. Mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.
3. Die Kamerakopf in ihrer Schutzhülle aufbewahren. Das Kamerakopfkabel bei der Lagerung nicht zu eng aufwicheln und nicth knicken.

Kamerakontrolleinheit

1. Falls die Kamerakontrolleinheit gereinigt werden muß, kann sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abewischt werden.
2. Mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.
3. Die Kamerakontrolleinheit in ihrer Schutzhülle aufbewahren.

VORSICHT: Die Kamera nicht außerhalb der Schutzhülle, im direkten Sonnenlicht oder in einer extrem heißen Umgebung aufbewahren.

WARNUNG: Kamerakopf oder Prozessor nicht desinfizieren oder sterilisieren.

Cleaning and storage after use

Camera head

1. Clean the camera head with a damp cloth.
2. Dry thoroughly with a soft towel.
3. Replace the camera head into its box. Do not coil the camera cable tightly.

Camera processor

1. Clean the processor cover with a damp cloth.
2. Dry thoroughly with a soft towel.
3. Replace the camera processor into its box.

CAUTION: Do not store the camera in direct sunlight or excessive heat.

WARNING: Do not disinfect or sterilize the camera head or processor.

Limpieza y almacenaje

Cámara

1. Si la cámara necesita una limpieza, frótela con un paño o una esponja humedecidos. Seque bien con una toalla suave o una gasa quirúrgica.
2. Seque bien con una toalla suave.
3. Almacene la cámara en su estuche protector. No forme un rollo apretado con el cable del cabezal ni permita que el cable qude pinzado o torcido cuando lo esté guardando.


Control de la cámara

1. Si la unidad de control de la cámara necesita una limpieza, frótela con un paño o una esponja humedecidos. Seque bien con una toalla suave o una gasa quirúrgica.
2. Seque bien con una toalla suave.
3. Almacene la unidad de control de la cámara en su estuche protector.

ADVERTENCIA: No almacene la cámara a la luz directa del sol o en un ambiente muy caluroso, esté o no dentro de su estuche protector.

¡CUIDADO! No desinfecte ni esterilice el cabezal de la cámara ni el procesador.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

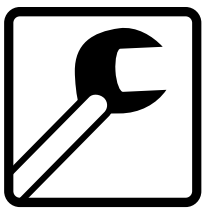

Wartung

Eine vorbeugende Wartung ist nicht zwingend erforderlich. Regalmäßige Wartungen können aber dazu beitragen, eventuelle Störungen frühzeitig zu erkennen und so die Sicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen. Wartungsdienste können bei ihrer zuständigen Gebietsvertretung oder beim Hersteller erfragt werden.

Wartungsinformationen können vom Hersteller angefordert werden.



WARNUNG: Für einen sicheren Betrieb der Videokamera alle 12 Monate folgende Überprüfungen vornehmen:

1. Prüfung des Leckstroms vom Chassis < 100µA.
2. Prüfung der Erdimpedanz < 0.1 Ohm.
3. Prüfung des Stromverbrauchs ≤ Nennleistung.

Maintenance operations

Performance of preventive maintenance is not essential. Regular maintenance can, however, contribute to identifying potential problems before they become serious, thus enhancing the instrument's reliability and extending its useful operating life. Maintenance services can be obtained from your local representative or from the manufacturer.

Information on maintenance can be obtained from the manufacturer.



WARNING: To ensure safe operation of the video camera, you should perform the following procedures every 12 months:

1. Check leakage current from chassis < 100µA.
2. Check ground impedance < 0.1 ohms.
3. Check power consumption ≤ rated power.

Mantenimiento

El equipo no precisa forzosamente de mantenimiento preventivo. Sin embargo, un mantenimiento periódico puede contribuir a reconocer a tiempo posibles averías y así aumentar la seguridad y la duración del aparato. El servicio de mantenimiento es ofrecido por el concesionario o por la central.

Las instrucciones para el mantenimiento pueden conseguirse a través del fabricante.



¡CUIDADO!: Para asegurar el funcionamiento seguro de la cámara de video, efectúe los siguientes procedimientos cada 12 meses:

1. Revise el chasis para verificar que la pérdida de corriente < 100 µA.
2. Revise la impedancia de tierra para verificar que < 0.1 ohmios.
3. Revise la alimentación de electricidad y el consumo de energía.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Kundendienst

Sämtliche Wartungs- und Einstellungsarbeiten sind von qualifiziertem Kundendienstpersonal auszuführen. Kamerakopf oder Prozessorgehäuse NICHT ÖFFNEN - dies führt zur Entstehung von Schäden und zum ERLÖSCHEN DER GARANTIE.

Service

Refer all servicing and adjustments to qualified service personnel. DO NOT open camera head or processor chassis as this will result in damage and VOIDING OF WARRANTY.

Servicio

Refiera todo el servicio y reparaciones a personal calificado de servicio. NO ABRA el cabezal de la cámara ni el chasis del procesador, ya que esto puede dañar el equipo y ANULAR LA GARANTÍA.



Garantie

Die Kameras unterliegen einer zweijährigen Garantie, gültig ab Kaufdatum, auf Material- und Herstellungsdefekte oder Störungen, die beim ordnungsgemäßen Gebrauch auftreten. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die unsachgemäß verwendet, behandelt, installiert oder betrieben wurden oder die von nicht autorisiertem Wartungspersonal verändert, eingestellt oder repariert wurden.

Bei Auftreten von Funktionsstörungen muß das Gerät an **Optronics** oder einen autorisierten Vertreter eingesandt werden. Vor Rücksendungen ist von **Optronics** eine Rücksendegenehmigungsnummer (Return Materials Authorization) einzuholen. **Optronics** wird das Gerät reparieren und an den Kunden zurücksenden.

Wenn nach Überprüfung durch das Kundendienstpersonal festgestellt wird, daß die Funktionsstörung auf unsachgemäße oder falsche Behandlung zurückzuführen ist, so treffen die Garantiebestimmungen nicht zu. Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät erhält der Kunde einen Kostenvoranschlag für die Reparatur.

Optronics ist nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts verantwortlich, wenn es von autorisiertem Personal gewartet und entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet wird.

Wenn das Gerät auf eineArt und Weise verwendet wird, die nicht von **Optronics** spezifiziert wurde, kann die Schutzfunktion des Geräts beeinträchtigt werden.

Warranty

The cameras are covered by a one year warranty applicable from the date of sale against defects in materials and workmanship or malfunctions under normal use and service. This warranty does not apply to any unit which has been subject to misuse, abuse, neglect, improper installation or operation or that has been altered, adjusted, or tampered with by any person other than authorized service personnel.

Should a malfunction occur, the unit must be returned to **Optronics** or to its authorized representative. Before returning the unit, the customer must first call **Optronics** to obtain a "Return Materials Authorization" number. **Optronics** will repair the unit and return it to the customer.

If, upon examination by authorized service personnel, it is determined that the malfunction is due to misuse or abuse, warranty provisions will not apply. An estimate of the cost of repair work will be given to the customer prior to servicing and repairing the unit.

Optronics is responsible for the effects on safety, reliability and performance of the equipment only if it is serviced by authorized personnel and used in accordance with the Operating Manual Instructions.

If the equipment is used in a manner not specified by **Optronics**, the protection provided by the equipment may be impaired.

Garantía

Las cámaras tienen una cobertura garantizada de un año en efecto a partir de la fecha de compra, contra defectos de materiales y mano de obra o funcionamiento defectuoso durante uso normal y servicio normal. Esta garantía no se aplica a las unidades que han sido sujetas a uso incorrecto, abuso, negligencia, instalación u operación inapropiadas o que se hayan alterado, ajustado o modificado por alguien que no forme parte del personal de servicio autorizado.

Si hay funcionamiento defectuoso, la unidad debe devolverse a **Optronics** o a su representante autorizado. Para devolver la unidad, el cliente debe llamar primero a **Optronics** para conseguir obtener un número de “Autorización de devolución de materiales”. **Optronics** reparará la unidad y la enviará de nuevo al cliente.

Una vez que el personal autorizado haga un examen del equipo, si se determina que el funcionamiento defectuoso se debe a uso incorrecto o abuso, no se aplicarán las disposiciones de la garantía. Se hará un estimado del costo de la reparación, que se entrega al cliente antes de proceder a reparar la unidad.

Optronics se hace responsable de la seguridad, confiabilidad y funcionamiento solamente si el personal autorizado hace las reparaciones y servicio y el equipo se utiliza de acuerdo con las Instrucciones del Manual de Operaciones.

Si el equipo se utiliza en una manera no especificada por **Optronics**, puede dañarse la protección provista por el equipo.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Fehlersuche

Symptom:
Kein Video - Netzanzeige nicht erleuchtet

Mögliche Ursachen:
Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.
Kameraprozessor ist nicht eingesteckt.
Fehlerhafte Sicherung.

Abhilfe:
Netzkabel fest in den Netzanschluß stecken.
Prüfen, ob die Wandsteckdose unter Strom steht.
Prüfen, ob der Prozessorschalter eingeschaltet ist.
Sicherungen austauschen.

Troubleshooting

Symptom:
No video – power light off.

Possible causes:
Power cord is not properly connected to power cord connector.
Camera processor not plugged in.
Defective power fuse.

Remedy:
Push power cord firmly into power cord connector.
Check that there is electricity to the wall outlet.
Check that processor switch is turned on.
Exchange fuses.

Diagnóstico de fallas

Signo:
No hay señal de vídeo – la luz de encendido está apagada.

Causas posibles:
El cable de alimentación no está bien conectado a su conector.
El procesador de la cámara no está enchufado.
El fusible eléctrico tiene un defecto.

Solución:
Empuje firmemente el cable de alimentación en su conector.
Compruebe que exista electricidad en la toma de la pared.
Compruebe que el interruptor del procesador esté en posición de encendido.
Cambie los fusibles.

Symptom:
Kein Video - Netzanzeige leuchtet.

Mögliche Ursachen/Abhilfe:
Prüfen, ob der Monitor angeschlossen und eingeschaltet ist.
Monitor anschließen und einschalten.
Prüfen, ob das Videokabel (Comp, Y/C, RGB) vom Kameraprozessor zum Monitor eingesteckt ist.
Prüfen, ob der Kamerakopf angeschlossen ist.
Prüfen, ob die Schalterinstellungen des Monitors korrekt sind (korrektes Video im Kanal oder TV/Leitungsschalter auf Leitung geschaltet).
Prüfen, ob alles Zubehör (VCR, Bilddrucker usw,) eingeschaltet und auf Leitung geschaltet sind.
Prüfen, ob die VCR-Aufzeichnungstaste eingeschaltet ist. Bei einigen Videorecordern muß die Record-Taste gedrücktsein, damit sie funktionieren.
Bei Verwendung eines Fernsehempfängers prüfen, ob das Videokabel vom Prozessor an die Video - Eingänge angeschlossen ist (nicht die Antennen-Eingänge).
Die Videokabel durch die Zusatzgeräte verfolgen, d.h. Video-Ausgang zu Video-Eingang, Video-Ausgang zu Video-Eingang usw.

Symptom:
No video – power light on.

Possible causes/remedy:
Check that monitor is plugged in and turned on.
Plug in monitor and turn on.
Check that video (comp, Y/C, RGB) cable from camera processor to monitor is connected.
Check that camera head is plugged in.
Check that monitor is appropriately switched (correct video in channel or TV/line switch turned to “line”).
Check that all accessories (VCR, video printer, etc.) are turned on and switched to “line?”
Check that VCR record button is on. Some VCRs require the record button to be depressed to operate.
If using a TV receiver, check that the video cable from processor is connected to “video” inputs (not antenna inputs).
Trace video cables through accessories, i.e., video out to video in, video out to video in, etc.

Signo:
No hay señal de vídeo – la luz de encendido está iluminada.

Causas y soluciones posibles:
Compruebe que el monitor esté enchufado y el interruptor esté en posición de encendido.
Enchufe y encienda el monitor.
Compruebe que el cable de vídeo (comp, Y/C, RGB) que conecta el procesador de la cámara con el monitor esté enchufado.
Compruebe que el cabezal de la cámara esté ensamblado.
Compruebe que el monitor tenga la selección correcta (vídeo correcto en el canal o el selector de TV/línea en selección “línea”).
Compruebe que todos los accesorios periféricos (grabadora de vídeo, impresora de vídeo, etc.) estén encendidos y estén en selección “línea?”.
Compruebe que el botón de grabación de la grabadora de vídeo (VCR) esté activado. Algunas grabadoras de vídeo exigen que el botón de grabación esté oprimido antes de poder funcionar.
Si se está utilizando un receptor de TV, compruebe que el cable de vídeo que viene del procesador esté conectado a las entradas de “vídeo” (no a las entradas de antena).
Revise el recorrido de los cables de vídeo por los accesorios periféricos, p.ej.: salida de vídeo a entrada de vídeo, salida de vídeo a entrada de vídeo, etc.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Symptom:
Unterbrochenes Video.

Mögliche Ursache/Abhilfe:
Alle Anschlüsse prüfen: Kamerakopf-Kabel zu Prozessor und Videokabel zu und von allen Zubehörkomponenten.
Das Kamerakopf-Kabel am Prozessor und am Kamerakopf hin- und herbewegen – wenn das Bild flackert in den Kundendienst- und Garantie-Informationen nachsehen, wie ein defektes Gerät zurückgesandt werden kann.
Prüfen, ob die Videokabel defekt sind.
Prüfen, ob das Problem mit einer anderen Videoquelle weiterbesteht (z.B. die Kamera vom System abnehmen und das Videoband mit einem Videorecorder und Monitor abspielen).
Das Problem zu isolieren versuchen, indem nach einer funktionierenden Komponente gesucht wird, mit der alle anderen Komponenten geprüft werden.

Symptom:
Intermittent video.

Possible causes/remedy:
Check all connections: camera head cable to processor and video cables to and from all accessory components.
Wiggle camera head cable at processor and camera head – if picture flashes, refer to Service and Warranty for information on how to return a malfunctioning unit.
Check video cables to determine if bad.
See if problem exists with another video source (for example, remove camera from system and play back tape on VCR and monitor).
Try to isolate problem by finding one component that works and testing all other components with it.

Signo:
Vídeo intermitente.

Causas y soluciones posibles:
Revise todas las conexiones: el cable del cabezal de la cámara al procesador y los cables de vídeo que van y vienen de todos los accesorios periféricos.
Mueva el cable que va del cabezal de la cámara al procesador: si la imagen parpadea, consulte la sección de Servicio y garantía para obtener información sobre la devolución de una unidad que funciona mal.
Revise los cables de vídeo para determinar si están dañados.
Vea si existe el mismo problema con otra fuente de vídeo (por ejemplo, desconecte la cámara del sistema y haga funcionar la videocasetera para observar en el monitor un videocasete grabado).
Trate de aislar el problema: busque un componente que funcione y úselo para hacer pruebas con los demás componentes.

Symptom:
Schlechte Farbqualität.

Mögliche Ursache/Abhilfe:
Den Weißabgleich bei korrekter Beleuchtung und vollständig angeschlossenem System wiederholen, wobei die Kamera auf einen weißen Gegenstand gerichtet ist.
Den Monitor einstellen, wobei die Bedienungselemente in der Arretier- oder mittleren Position sind.
Den Monitor abschließen, wenn er die letzte Systemkomponente ist. Ist er jedoch nicht die letzte Komponente, stattdessen die letzte Komponente abschließen (siehe Abschnitt Abschließen des Videosignals).
Prüfen, ob sich der Prozessor an einem kühlen, gut belüfteten Ort befindet.
Wenn keine Farbe erscheint, die Farbregelung am Monitor stärker einstellen.
Wenn zuviel Farbe erscheint (oder die Farbintensität zu groß ist), die Farbregelung am Monitor schwächer einstellen.
Der Sony UP5000 Bilddrucker kann zu Farbverlagerungen im System führen. Siehe Systemkonfiguration 6, um die Kamera von druckerbedingten Problemen zu isolieren.
Die Schaltereinstellungen an der Rückseite von Monitoren der Reihe SONY 1300 prüfen. Die Schalter sollten auf RGB und 6500 stehen.

Symptom:
Bad color.

Possible causes/remedy:
Repeat the white balance procedure with correct illumination, with complete system hooked up, pointing the camera at a white object.
Adjust monitor, starting with controls in detent or center position.
Terminate monitor if it is the last component in the system. If it is not the last component, leave the monitor unterminated and terminate the last component in line (refer to section Video Signal Termination).
Check that processor is in a cool, well-ventilated area.
If no color, turn up color on monitor.
If too much color (or color too intense), turn down color on monitor.
The Sony UP5000 video printer can introduce color shifts to the system.
See System Configuration 6 to isolate the camera from printer-related problems.
Check rear panel switch settings on SONY 1300 series monitors. Switches should be set to RGB and 6500.

Signo:
Mal color.

Causas y soluciones posibles:
Repita el balance del blanco con la iluminación correcta, con todo el sistema conectado y dirigiendo el lente de la cámara hacia un objeto blanco.
Ajuste el monitor comenzando con los controles en la posición en que normalmente se detienen o centrados, según corresponda.
Termine eléctricamente el monitor si es el último componente del sistema. Si no es el último, deje el monitor sin terminarlo eléctricamente y termine el último accesorio periférico en línea (consulte la sección Terminación de la señal de vídeo).
Compruebe que el procesador se encuentre en un lugar fresco y bien ventilado.
Si no hay color, aumente el nivel de color en el monitor.
Si el color es excesivo (o muy intenso), disminuya el nivel de color en el monitor.
La videoimpresora Sony UP5000 puede causar cambios de los colores en el sistema. Vea la sección Configuración del Sistema 6 para determinar cómo aislar la cámara de problemas con la impresora.
Revise el ajuste de los interruptores en el panel posterior de los monitores Sony Serie 1300. Los interruptores deben estar ajustados a RGB y 6500.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

	Symptom: Bild rollt. *Mögliche Ursache/Abhilfe:* Vertikalablenkung und Zeilenfrequenzregelung am Monitor einstellen.	*Symptom:* Rolling picture. *Possible causes/Remedy:* Adjust vertical or horizontal hold on the monitor.	*Signo:* Deslizamiento de la imagen. *Causas y soluciones posibles:* Ajuste el control horizontal o vertical de detención de imagen, según corresponda.
	Symptom: Video unterbrochen. *Mögliche Ursache/Abhilfe:* Prüfen, ob der Kabelstecker des Kamerakopfs ganz in die Prozessorbuchse gesteckt ist.	*Symptom:* Occasional video. *Possible causes/Remedy:* Check that camera head cable connector is inserted completely into processor receptacle.	*Signo:* Vídeo ocasional. *Causas y soluciones posibles:* Compruebe que el conector del cable del cabezal de la cámara esté completamente insertado en el correspondiente enchufe del procesador.
	Symptom: Störungen *Mögliche Ursache/Abhilfe:* Prüfen, ob sich die Störungen ändern, wenn das Kabel des Kamerakopfs hin- und herbewegt wird. Falls das zutrifft, ist in den Kundendienst- und Garantie-Informationen nachsehen, wie ein defektes Gerät zurückgesandt werden kann. Eine andere Steckdose versuchen, an der nach Möglichkeit kein anderes elektrisches Gerät angeschlossen ist. Der Bilddrucker UP5000 von Sony kann Störungen im System verursachen. Siehe Systemkonfiguration 6, um die Kamera von druckerbedingten Problemen zu isolieren.	*Symptom:* Disturbance or interference. *Possible causes/Remedy:* Check if interference changes when the camera head cable is wiggled. If so, refer to Service and Warranty for information on how to return a malfunctioning unit. Try a different electrical outlet, preferably with no other equipment plugged into it. The Sony UP5000 video printer can introduce interference to the system. See System Configuration 6 to isolate the camera from printer-related problems.	*Signo:* Alteración o interferencia. *Causas y soluciones posibles:* Compruebe si la interferencia cambia al mover el cable del cabezal de la cámara. Si es así, consulte la sección Servicio y garantía para información sobre la devolución de una unidad que funciona mal. Intente con otra toma eléctrica, que preferentemente no tenga ningún otro equipo enchufado. La impresora de vídeo Sony UP5000 puede causar interferencia en el sistema. Vea la sección Configuración del Sistema 6 para determinar cómo aislar la cámara de problemas con la impresora.
	Symptom: Körniges poder rauschendes Bild. *Mögliche Ursache/Abhilfe:* Intensität der Lichtquelle erhöhen. Monitor einstellen, wobei sich die Bedienungselemente zunächst in der Arretier- oder mittleren Position befinden.	*Symptom:* Grainy or noisy image. *Possible causes/Remedy:* Increase intensity of light source. Adjust monitor, starting with controls in detent or center position.	*Signo:* Imagen granulosa o con ruido electrónico. *Causas y soluciones posibles:* Aumente la intensidad de la fuente luminosa. Ajuste el monitor, comenzando con los controles en la posición en que normalmente se detienen o centrados, según corresponda.
	Symptom: Flecken im Bild. *Mögliche Ursache/Abhilfe:* Optische Flächen des Kamerakopfs, der Linse oder des Adapters reinigen.	*Symptom:* Spots on image. *Possible causes/Remedy:* Clean optical surfaces of camera head and lens or adaptor.	*Signo:* Manchas en la imagen. *Causas y soluciones posibles:* Limpie las superficies ópticas del cabezal de la cámara y del lente o adaptador.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Symptom:
Bild zu dunkel oder zu hell.

Mögliche Ursache/Abhilfe:
Die Stärke der Lichtquelle einstellen.
Die Helligkeit des Monitors einstellen.
Die Bedienungselemente für Kontrast, Bild oder Schärfe am Monitor einstellen, dabei mit der Arretier- oder mittleren Position beginnen.
Auf Wunsch kann das automatische Belichtungssystem übersteuert werden, indem die Taste für die manuelle Blendeneinstellung gedrückt und die verschiedenen Verschlußzeiten durchlaufen werden, bis die gewünschte Belichtung erreicht wurde.
Der Bilddrucker UP5000 von Sony kann Störungen im System verursachen. Siehe Systemkonfiguration 6, um die Kamera von druckerbedingten Problemen zu isolieren.

Symptom:
Picture too dark or too bright.

Possible causes/Remedy:
Adjust level of light source.
Adjust monitor brightness.
Adjust contrast, picture, or sharpness controls on monitor, starting with detent or center position.
If desired, the automatic exposure system may be overridden by pressing the manual shutter key, and shuttering through the various speeds until desired exposure is achieved.
The Sony UP5000 video printer can introduce interference to the system. See System Configuration 6 to isolate the camera from printer-related problems.

Signos:
Imagen muy oscura o muy brillante.

Causas y soluciones posibles:
Ajuste el nivel de la fuente luminosa.
Ajuste la brillantez del monitor.
Ajuste los controles de contraste, de imagen o de nitidez en el monitor, comenzando con los controles en posición de detención o centrados, según corresponda.
Si se desea, el sistema de control automático de exposición puede desactivarse presionando la tecla de obturador manual y haciendo funcionar el obturador por las diferentes velocidades de obturación hasta que se alcance la exposición deseada.
La impresora de vídeo Sony UP5000 puede causar interferencia en el sistema. Vea la sección Configuración del Sistema 6 para determinar cómo aislar la cámara de problemas con la impresora.

Symptom:
Allgemein

Mögliche Ursache/Abhilfe:
Versuchen, das fehlerhafte Gerät (Monitor, Kamera, Viderecorder usw.) zu identifizieren, bevor die Kamera wegen einer Bildstörung (Geräusch, Störung, Farbfehler usw.) zurückgesandt wird. Falls die Kamera Ursache des Problems ist, in den Kundendienst- und Garantie-Informationen nachsehen, wie ein defektes Gerät zurückgesandt werden kann. Das Problem mit Video aufzeichnen und das Videoband mit dem Gerät einschicken. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es befinden sich keine vomAnwender zu wartenden Teile in dieser Kamera.

Symptom:
General.

Possible causes/Remedy:
Try to isolate problem equipment (monitor, camera, VCR, etc.) before returning camera for abnormal image (noise, interference, bad color, etc.). If the camera does seem to be the problem, refer to Service and Warranty for information on how to return a malfunctioning unit.
Video tape the problem and include the tape when returning the equipment for repair. Do not attempt to repair equipment. There are no user-serviceable parts inside the camera.

Signo:
Problemas generales.

Causas y soluciones posibles:
Intente aislar el equipo que está dando problema (monitor, cámara, videocasetera, etc.) antes de devolver la cámara debido a imagen anómala (ruido electrónico, interferencia, mal color, etc.). Si es la cámara la que parece causar el problema, consulte la sección Servicio y garantía para obtener información sobre la devolución de una unidad que está funcionando mal. Grabe el problema en una cinta de vídeo e inclúyala cuando devuelva el equipo para su reparación.
No intente reparar el equipo. La cámara no contiene partes que pueda reparar el usuario.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Abschluß des Videosignals

Bei einem Videosystem wird ein Signal erzeugt und durch mehrere elektronische Geräte geleitet. Diese Signal wird immer durch ein Übertragungskabel (Video-Koaxialkabel) mit einer charakteristischen Impedanz von 75 Ohm geleitet.

Der Endpunkt des übertragenen Videosignals muß abgeschlossen werden, da sonst Reflektionen auftreten, die auf dem Monitorbild zu einer inkorrekten Helligkeitseinstellung und/oder Geisterbildern führen. Der Abschluß erfolgt mit Hilfe eines Abschlußwiderstands von 75 Ohm am Endpunkt des Signals.

Der Monitor empfängt und erzeugt (passiv) ein Videosignal. Dieses wird nur abgeschlossen, wenn der Monitor als letztes Gerät in einem Videosystem das Signal empfängt. Viele Geräte wie z.B. Videorecorder und Bilddrucker empfangen und regenerieren (aktiv) Videosignale.

Der Abschluß erfolgt automatisch über den internen Stromkreis des Geräts oder indem an der Rückseite des Geräts ein Schalter manuell auf die Position *Term* oder *75 Ohm* gestellt wird.

Um festzustellen, ob ein Gerät des Videosystems manuell abgeschlossen werden muß, ist aus der Rückseite des Geräts zu ersehen. Ist ein Abschlußschalter vorhanden, so ist der manuelle Abschluß ratsam und eine entsprechende Entscheidung muß getroffen werden. Ist kein Schalter vorhanden, erfolgt der Abschluß nach Bedarf automatisch durch das Gerät.

Video signal termination

In a video system, a signal is generated and transmitted through various electronic devices. This signal is always carried on a transmission wire (video coaxial cable) having a characteristic impedance of 75 ohms.

The end point of the transmitted video signal must be terminated, otherwise signal reflections may occur, causing incorrect brightness and/or ghosting effects to appear on the monitor image. Termination is accomplished by applying a 75 ohm resistance to the signal at its end point.

The monitor receives and *passively* generates a video signal. It is terminated only when the monitor is the last device hooked up consecutively in a video system receiving the signal. Many devices such as VCRs and video printers receive as well as *actively* regenerate video signals.

Termination is accomplished automatically through the device's internal circuitry or manually by the operator flipping a rear switch on the device to the *Term* or *75 ohm* position.

To determine if a device in your video system requires manual termination, check the rear of the unit. If a termination switch exists, manual termination is indicated and a decision whether or not to terminate must be made. If a switch is not found, the device will automatically apply termination as needed.

Terminación de la señal de vídeo

En un sistema de vídeo una señal se genera y transmite a través de diversos componentes electrónicos. Esta señal siempre va por un cable de transmisión (cable coaxial de vídeo) que tiene una impedancia característica de 75 ohmios.

El punto final de la señal de vídeo transmitida debe terminarse; de otra manera puede producirse la reflexión de señales, que causan brillantez incorrecta de la imagen y/o efectos de imagen fantasma en la pantalla. La terminación se logra aplicando a la señal una resistencia de 75 ohmios en su punto final.

El monitor recibe y genera pasivamente una señal de vídeo. Es necesario terminar el monitor únicamente cuando es el último accesorio periférico conectado en el sistema de vídeo que recibe la señal. Muchos componentes, tales como videocaseteras e impresoras de vídeo reciben y a la vez generan señales activas de vídeo.

La terminación se logra automáticamente por medio de los circuitos internos del accesorio periférico o manualmente cuando el operador del equipo coloca un interruptor en el panel posterior de dicho periférico en la posición *Term* o *75 ohm*.

Para determinar si un accesorio periférico en su sistema de vídeo requiere terminación manual, revise la parte posterior de la unidad. Si existe un interruptor de terminación, está indicada la terminación manual y debe decidirse si el equipo se termina o no. Si no se encuentra ese interruptor, el equipo se termina automáticamente si es necesario.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Monitore

Manche Monitore verfügen über einen automatischen Abschluß, andere nicht. Auf der Rückseite des Monitors sicherheitshalber nach einem Abschlußschalter suchen. Ist ein Schalter vorhanden und der Monitor ist das letze Gerät, das an das System angeschlossen ist, muß der Schalter auf Abschluß eingestellt werden. Ist der Monitor nicht das letzte Gerät, so wird das Signal passiv weitergeleitet und kein Abschluß ist erforderlich. Den Schalter in die nicht abgeschlossene Stellung bringen. Hinweis: Bei Monitoren mit automatischem Abschluß befindet sich der Schalter in den Video-Eingangsbuchsen und wird aktiviert, wenn ein Koaxialkabelstecker eingesteckt wird. Auf ähnliche Weise de-aktivieren die Video-Ausgangsbuchsen den Abschluß, wenn ein Stecker eingesteckt wird. Falls ein Abschluß gewünscht wird, ist darauf zu achten, daß das verbindende Koaxialkabel in die Video-Eingangsbuchse und nicht in die Ausgangsbuchse gesteckt wird.

Videorecorder/Drucker

Manche Videorecorder oder Drucker verfügen über einen automatischen Abschluß, andere nicht. Auf der Rückseite des Monitors sicherheitshalber nach einem Abschlußschalter suchen. Ist ein Schalter vorhanden, diesen auf Abschluß einstellen, unabhängig davon, ob der Videorecorder oder Drucker als letztes Gerät an das System angeschlossen ist. Die einzige Ausnahme liegt dann vor, wenn T-Anschlußstücke verwendet werden, um das Signal an ein nachfolgendes Gerät weiterzuleiten. In diesem Fall wird das Signal passiv erzeugt oder weitergeleitet und kein Abschluß ist erforderlich. Den Schalter in die nicht abgeschlossene Stellung bringen.

Monitors

Some monitors are automatically terminating, others are not. Check the rear of the monitor for a termination switch to verify. If a switch exists and the monitor is the last device hooked up to the system, set the switch to terminate. If the monitor is not last, the signal is being passively looped through and termination is not required. Set the switch to the unterminated position. Note: on automatically terminating monitors, the termination switch is located in the video input receptacles and activated when a coaxial cable plug is inserted. Alternatively, the video output receptacles deactivate termination when a plug is inserted. If termination is required, ensure that the connecting coaxial cable is plugged into the video in receptacle and not the video out receptacle.

Video cassette recorders/printers

Some video cassette recorders/printers are automatically terminating, others are not. Check the rear of the device for a termination switch to verify. If one exists, set the switch to terminate regardless of whether or not the VCR or printer is the last device hooked up to the system. The only exception is if T-connectors are used to loop the signal through to a successive device. In this case, the signal is being passively generated or looped through and termination is not required. Set the switch to the unterminated position.

Monitores

Algunos monitores se terminan automáticamente; otros, no. Revise la parte posterior del monitor para ver si hay un interruptor de terminación. Si hay un interruptor y el monitor es el último accesorio periférico conectado al sistema, coloque el interruptor en la posición de terminación. Si el monitor no es el último, la señal hace el recorrido pasivamente y no será necesaria la terminación. Ajuste el interruptor a la posición de no terminación. Nota: en los monitores que se terminan automáticamente, el interruptor de terminación está en los receptáculos de entrada de vídeo y se activa al insertar en dicho receptáculo el conector de un cable coaxial. Asimismo, los receptáculos de las salidas de vídeo inactivan la terminación cuando se les inserta un conector. Si se requiere la terminación, asegúrese de que el cable coaxial se conecte al receptáculo de entrada de vídeo y no al de salida de vídeo.

Grabadoras e impresoras de videocasetes

Algunas grabadoras e impresoras de videocasetes se terminan automáticamente, pero otras no. Revise la parte posterior del equipo para ver si hay un interruptor de terminación. Si ese interruptor está presente, colóquelo en la posición de terminación independientemente de si la grabadora o la impresora sean el último accesorio periférico conectado al sistema. Se hace una única excepción cuando se usan conectores en T para derivar la señal a través de un equipo sucesivo. En este caso, la señal se está generando o derivando pasivamente y no se requiere la terminación. Coloque el interruptor en la posición de no terminado.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Technische Daten

DEI-750 CE
Bildsensor: 3 x 1/2" CCD-Chip, je einer pro Farbkanal
Bildformat: 6.4 x 4.8 mm
Bildpunkte (PAL):
752 x 582 Pixel je Chip, 1,312,992 gesamt
Bildpunkte (NTSC):
768 x 494 Pixel je Chip, 1,138,176 gesamt
Automatische Lichtwerregelung:
Mikroprozessorgesteuert, Proprietary Continuous Ratchet Algorithm, abschaltbar
Weißabgleich: 2280° K — 4420° K, automatisch
Objektiv: F 1.4, mit Primärfarbentrennung (RGB)
Instrumentenkupplung: "C"-mount
Video-Ausgang (PAL):
PAL 4.43-Signal an BNC-Buchse
Y/C-Signal an S-VHS-Buchse
RGB-Signal an BNC-Buchsen
Video-Ausgang (NTSC): NTSC 3.58-Signal an BNC-Buchse
Y/C-Signal an S-VHS-Buchse
RGB-Signal an BNC-Buchsen
Eingang: 5-poliger DIN-Stecker an Keyboard-Buchse
Netzsicherungen: 2 x F2.0A, 250V
Stromversorgung: 100 – 240V~, 50/60 Hz, 0.5A, 100 VA
Kamerakopf: 37.5 x 47.5 x 60.0 mm (B x H x T)
Gewicht: 0.37 kg
Gekühlter Kamerakopf: 114 x 173 x 106 mm (B x H x T)
Gewicht: 2,5 kg einschließlich Kabel
Kamera-Kontrolle-Einheit:
305 x 89 x 322 mm (B x H x T)
Gewicht: 3.8 kg
Lagerung:
Umgebungstemperatur: -10° bis +60° C (-14° bis +140° F)
Feuchtigkeit: 0 bis 80% (nicht kondensierend)
Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa
Betriebsbedingungen:
Maximale Höhe bei Verwendung in Innenräumen: 2.000 m
Temperaturbereich: +5° bis +35° C (41° bis 95° F)
Feuchtigkeit: 0 bis 80% (ohne Kondensation)
Netzspannungsschwankung ± 10%
Installations-Überspannung Kategorie II
Verschmutzungsgrad: 2

Technical data

DEI-750 CE
Image sensor: 3 x 1/2" CCD-chip, one per color channel
Picture format: 6.4 mm x 4.8 mm
Picture elements (PAL):
752 x 582 pixels per chip, 1,312,992 in total
Picture elements (NTSC):
768 x 494 pixels per chip, 1,138,176 in total
Auto exposure: Microprocessor controlled, Proprietary Continuous Ratchet Algorithm
Auto white balance: 2280° K — 4420° K
Internal lens: f 1.4, primary color (RGB) separation prism
Instrument coupling: "C"-mount
Video output (PAL): PAL 4.43 signal to BNC socket, Y/C signal to S-VHS socket, RGB signal to BNC sockets
Video output (NTSC): NTSC 3.58 signal to BNC socket, Y/C signal to S-VHS socket, RGB signal to BNC sockets
Input: 5-pole DIN connector to keyboard socket
Fuse: 2 x F2.0 A, 250V
Power requirements: 100 – 240V~, 50/60 Hz, 0.5A, 100 VA
Camera head: 37.5 x 47.5 x 60.0 mm (w x h x d)
Weight: 0.37 kg (13.1 oz)
Cooled camera head: 114 x 173 x 106 mm (w x h x d)
Weight: 2.5 kg (5.5 lb) with cable
Camera control unit (CCU):
305 x 89 x 322 mm (w x h x d)
Weight: 3.8 kg (8.4 lb)
Storage conditions:
Ambient temperature: -10° to +60° C (14° to +140° F)
Humidity: 0 to 80% (non-condensing)
Atmospheric pressure: 50 kPa to 106 kPa
Operating conditions:
Indoor use maximum altitude: 2,000 m
Temperature range: +5° to +35° C (41° to 95° F)
Humidity: 0 to 80% (non-condensing)
Mains supply voltage fluctuation ± 10%
Installation overvoltage category II
Pollution degree: 2

Ficha técnica

DEI-750 CE
Sencor de video: 3 x chips CCD 1/2", uno para cada color primario
Formato de imagen: 6.4 mm x 4.8 mm
Puntos de imagen (PAL):
752 x 582 pixels por cada chip, 1,312,992 en total
Picture elements (NTSC):
768 x 494 pixels por cada chip, 1,138,176 en total
Regulación automática del valor de exposición: Controlado por microprocesador, Proprietary Continuous Ratchet Algorithm
Balance del blanco: 2280° K — 4420° K
Objetivo: f 1.4, con separación de los colores primarios (RGB)
Conexión para equipos: "C"-mount
Salida de video (PAL): Señal PAL 4.43 mediante conectar BNC, señal Y/C mediante conexión S-VHS, señales RGB mediante conexiones BNC
Video output (NTSC): Señal NTSC 3.58 mediante conexión BNC, señal Y/C mediante conexión S-VHS, señales RGB mediante conexiones BNC
Entrada: Teclado: por medio de un enchufe de 5 polos DIN
Fusibles de la red: 2 x F2.0A, 250V
Requerimientos de energía: 100 – 240V~, 50/60 Hz, 0.5A, 100 VA
Cabezal de la cámara: 37.5 x 47.5 x 60.0 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso: 0.37 kg
Cabezal de cámara enfriadocon sistema de enfriamiento: 114 x 173 x 106 mm (a x a x p)
Peso: 2.5 kg (5.5 lb) con cable
CCU: 305 x 89 x 322 mm (a x a x p)
Peso: 3.8 kg
Condiciones de almacenamiento:
Temperatura ambiente: -10° a +60° C (-14° a +140° F)
Humedad: 0 a 80% (non condensación)
Presión Atmosférica: 50 kPa a 180 kPa
Condiciones de funcionamiento:
Altitud máxima para uso en interiores: 2,000 m
Rango de temperatura: +5° a +35° C (41° a 95° F)
Humedad: 0 a 80% (sin condensación)
Fluctuación promedio del voltaje suministrado: ± 10%
Instalación de sobrevoltaje categoría II
Grado de contaminación: 2

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS

Technische Beschreibung

Allgemeine Klassifizierung

Art des Feuchtigkeitsschutzes:
Normal

Art des Schutzes gegen elektr. Schlag:
Schutzklasse 1

Betriebsart:
Kontinuierlich

Labor-Klassifizierung

Netzspannungsschwankung ± 10%
Installations-Überspannung Kategorie II
Verschmutzungsgrad: 2

Geräte-Prüfbescheinigungen

Geräte gemäß UL-544, EN60601-1 (IEC 601-1) hergestellt.

Geräte-Prüfberichte

Geräte gemäß EN61010-1 konstruiert (nicht amtlich geprüft).

Technische Unterlagen

Auf Anfrage stellt der Hersteller ihm verfügbare Schaltpläne, ausführliche Ersatzteillisten, Beschreibungen, Einstallanweisungen und andere Unterlagen bereit, die dem entsprechend qualifizierten und vom Hersteller autorisierten Personal des Anwenders beim Reparieren von Geräteteilen, die vom Hersteller als reparierbar bezeichnet werden, von Nutzen sind.

Das Verfügen über technische Unterlagen zum Gerät stellt auch für technisch geschultes Personal keine Autorisierung durch den Hersteller zum Öffnen oder Reparieren des Gerätes dar. Ausgenommen sind im Text der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Eingriffe.

Technical description

General classification

Type of protection against moisture:
Ordinary

Type of protection against electric shocks:
Protection Class 1

Mode of operation:
Continuous

Laboratory classification

Mains supply voltage fluctuation: ± 10%
Installation overvoltage category II
Pollution degree: 2

Equipment test certificates

Instruments are manufactured in accordance with UL-544, EN60601-1 (IEC 601-1).

Equipment test reports

Instruments are designed in accordance with EN61010-1 (not agency certified).

Technical documentation

On request, the manufacturer will provide those circuit diagrams, itemized parts listings, descriptions, sets of adjustment instructions, and other items of available documentation to suitably qualified user personnel duly authorized by the manufacturer for their use in repairing those components of the instrument that have been designated by their respective manufacturers as repairable.

Supply of such technical documentation relating to the instrument shall not be construed as constituting manufacturer's authorization of user's personnel, regardless of their levels of technical training, to open or repair the instrument. Explicitly exempted herefrom are those maintenance and repair operations described in this manual.

Descripciones técnicas

Clasificación general

Tipo de protección contra humedad:
Común

Tipo de protección contra choque eléctrico:
Categoría de protección 1

Modo de operación:
Continua

Clasificación de laboratorio

Fluctuación promedio del voltaje suministrado: ± 10%
Instalación de sobrevoltaje categoría II
Grado de contaminación: 2

Certificados de pruebas de equipo

Los instrumentos se fabrican de acuerdo a la norma UL-544, EN60601-1 (IEC 601-1).

Informes de pruebas de equipos

Los instrumentos se han diseñado de acuerdo a las normas EN61010-1 (no están certificados por la agencia).

Documentación técnica

El personal calificado del usuario que haya sido debidamente autorizado por el fabricante para reparar los componentes del equipo, que por el fabricante sean calificados de reparables, podrá pedir al fabricante los esquemas de distribución, listas completas de piezas de repuesto, descripciones, instrucciones de ajuste y demás documentación útil para ese propósito.

La posesión de documentación técnica sobre el aparato no significa tener la autorización del fabricante para abrir o reparar del equipo, ni siquiera tratándose de personal técnico especializado. Se excluyen las intervenciones descritas en el texto de este manual de instrucciones.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

OPTRONICS
Picture This™

DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Optronics
175 Cremona Drive, Goleta, California 93117 - USA

declare under our sole responsibility that the product(s) to which this declaration relates is in conformity with the following EU Directives, standard(s) or other normative document(s):

Standards:	**Directives:**
EN 60601-1	MD (93/42/EEC)
EN 60601-1-2	

Performed on units bearing CE marking.

Goleta, CA. USA

30 APRIL 2001
(Place and date of issue)

T.P. Fernandez
Director, Regulatory and Standards Compliance

(Name and signature or equivalent marking of authorized person)

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Autorisierter Beauftragter für EU-Verordnungen bei Optronics:
KARL STORZ GmbH & Co.
Mittelstrasse 8, D-78532 Tuttlingen
Postfach 230, D-78503 Tuttlingen, Germany
Verordnungsabteilung
Fax: +49/7461/708 304

The authorized EU Regulatory Representative for Optronics is:
KARL STORZ GmbH & Co.
Mittelstrasse 8, D-78532 Tuttlingen
Postfach 230, D-78503 Tuttlingen, Germany
Regulatory Department
Fax: +49/7461/708 304

El representante reglamentario de la Unión Europea autorizado
para Optronics es el siguiente:
KARL STORZ GmbH & Co.
Mittelstrasse 8, D-78532 Tuttlingen
Postfach 230, D-78503 Tuttlingen, Germany
Departamento de Reglamentación
Fax: +49/7461/708 304



OPTRONICS
175 Cremona Drive
Goleta, CA 93117
Tel: (805) 968-3568
FAX: (805) 968-0933

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Artisan Technology Group is an independent supplier of quality pre-owned equipment

Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

Learn more!

Visit us at **artisantg.com** for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

ARTISAN® TECHNOLOGY GROUP