

ARTISAN®
TECHNOLOGY GROUP

Your **definitive** source for quality pre-owned equipment.

Artisan Technology Group
(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

Full-service, independent repair center
with experienced engineers and technicians on staff.

We buy your excess, underutilized, and idle equipment
along with credit for buybacks and trade-ins.

Custom engineering
so your equipment works exactly as you specify.


- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship
- Leasing / Rentals / Demos
- ITAR-certified secure asset solutions

Expert team | Trust guarantee | 100% satisfaction


All trademarks, brand names, and brands appearing herein are the property of their respective owners.

Find the *Wild Heerbrugg TYP 327615* at our website: *Click HERE*


Zchng. Nr.
M20-00 00(

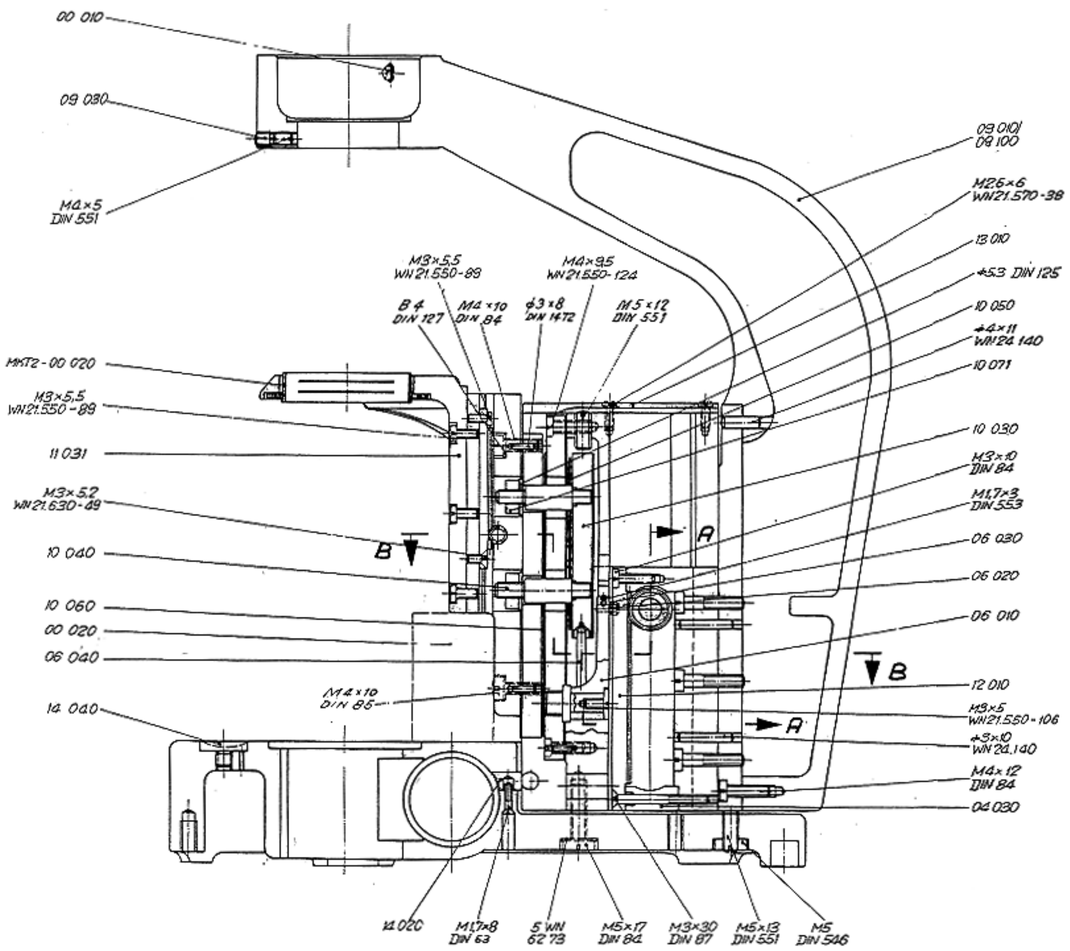

Teilschnitt A÷A

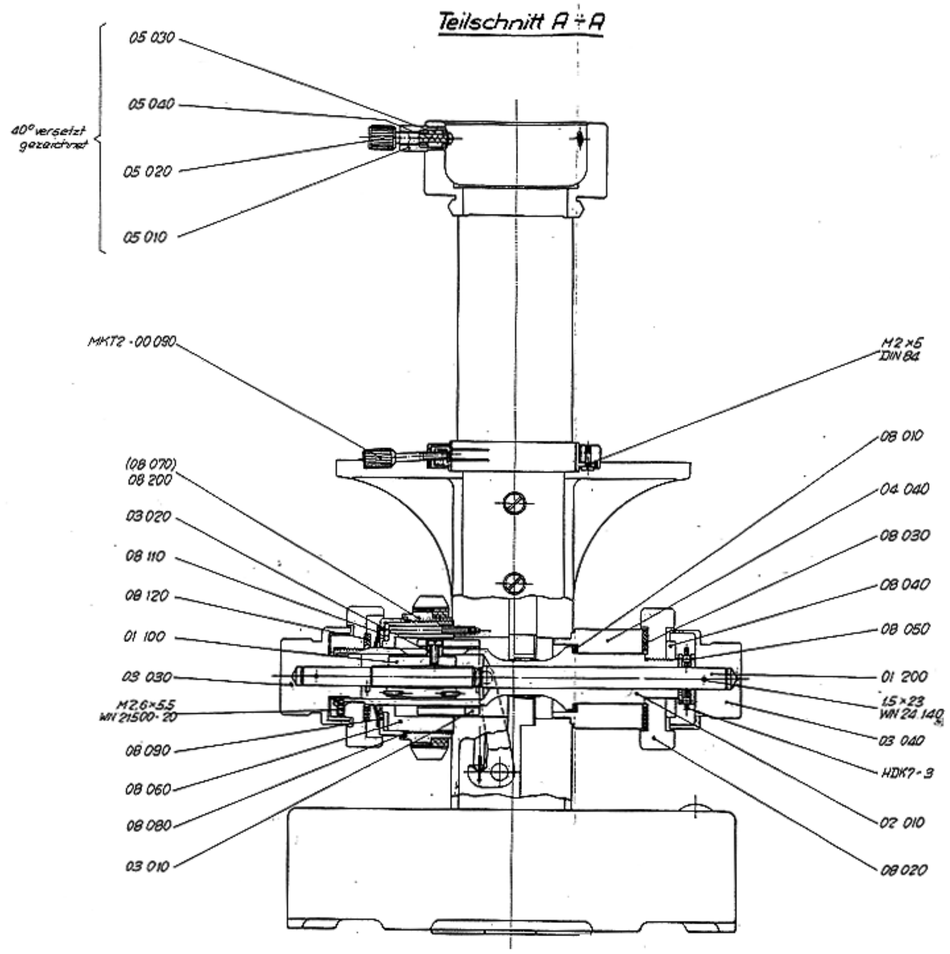

Schnitt B÷B

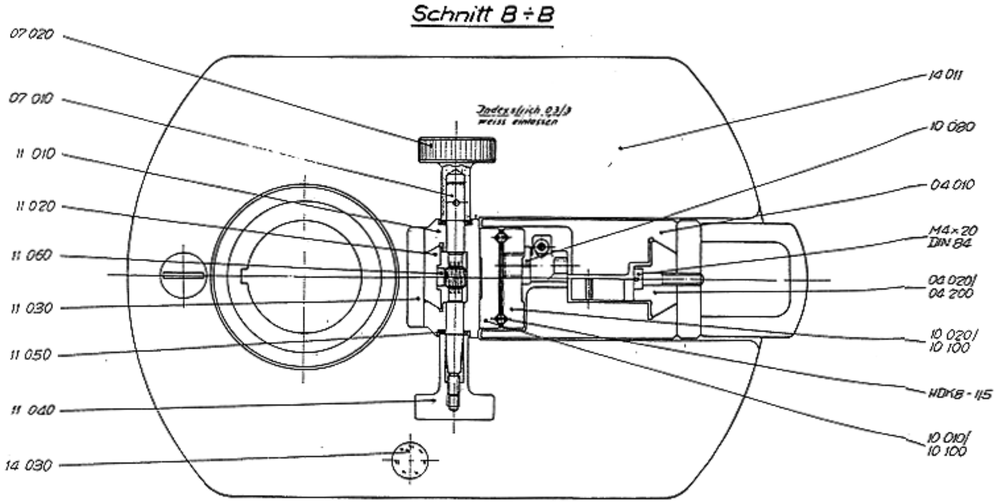



Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung			Bearbeitung:
Aenderungen:	Bezeichnung: Grundinstrument M20	1963	Datum	Name
		Gezeich.	27.3.	
	Material:	Geprüft		
	Oberfläche:	Norm-Genehmigt		
	Ersetzt für:	Ersetzt durch:		

MaStabe: WILD HEERBRUGG

Zchng.-Nr. M20-00000

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

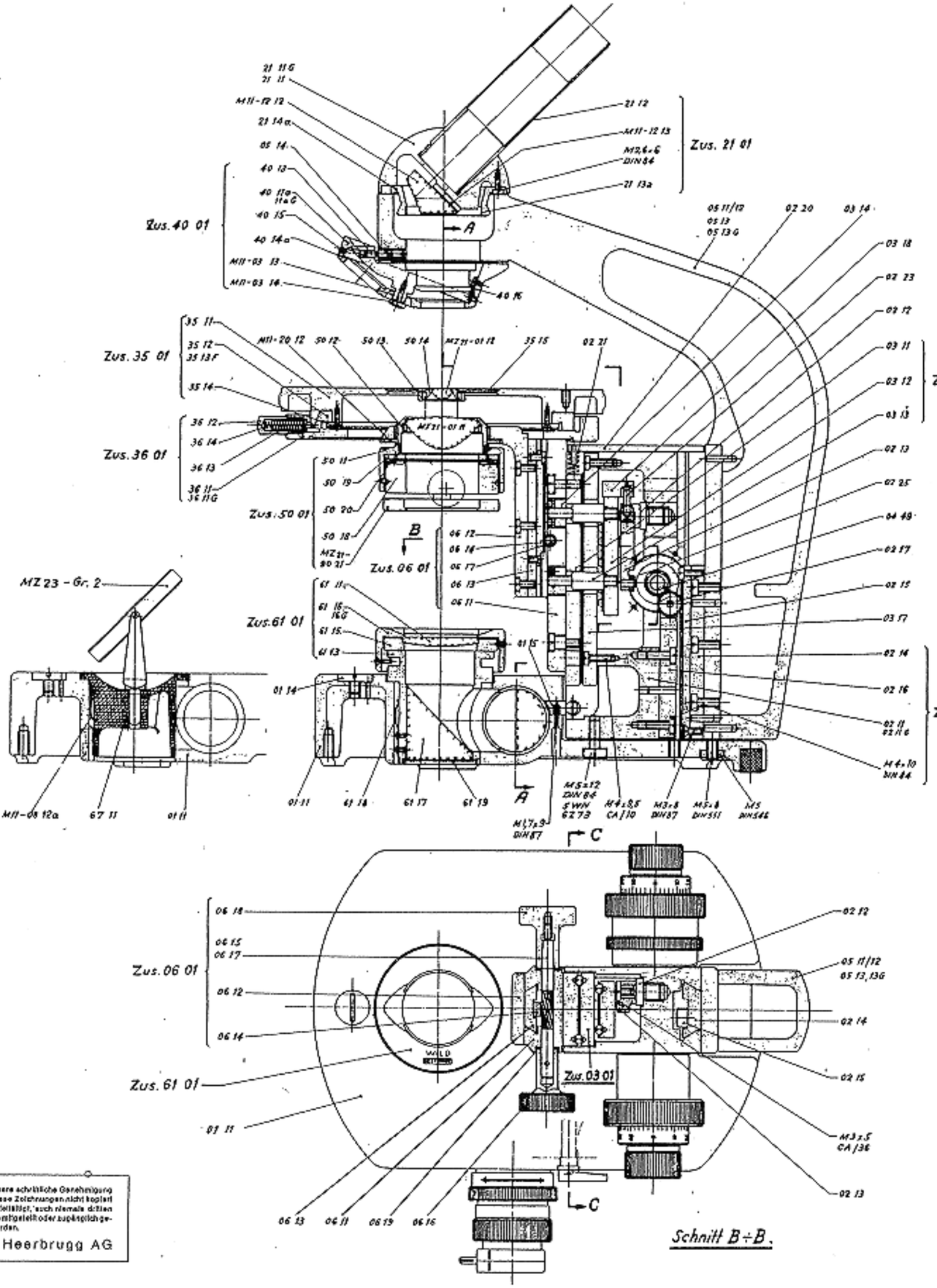

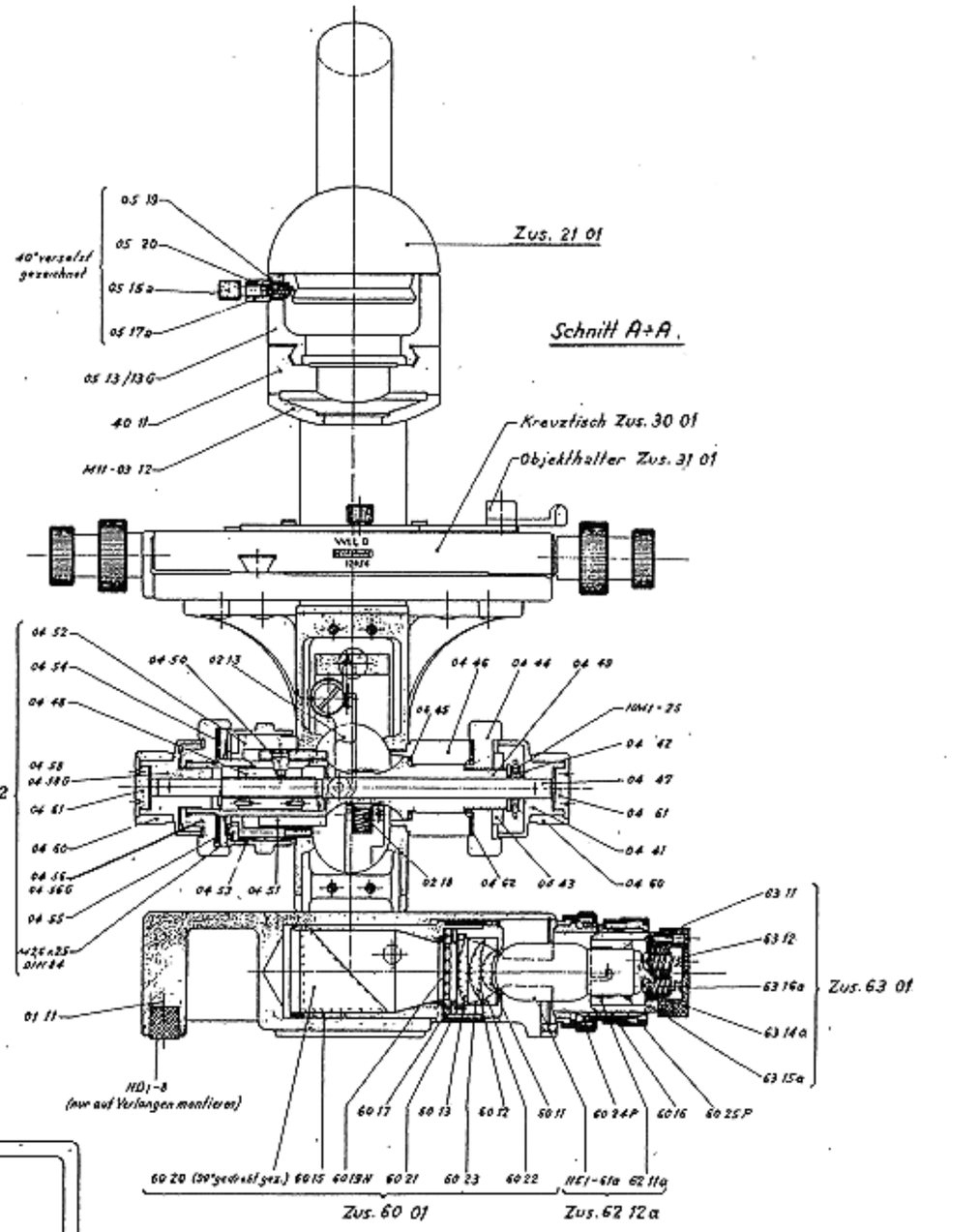

Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen diese Zeichnungen nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Wild Heerbrugg AG

Teil-Nr.	Stück	Benennung	Mat.	Bemerkungen
Optische Daten:				
Änderungen:				
ⓔ 12.1.55 ff			Ersetzt durch:	
			Ersatz für:	

Forschungsmikroskop.


Maßstab | Datum: 27.5.53 ff | Name

Verkaufs-A.G. H. Wild Heerbrugg

M 20-00 01

M 20 | 0402

Präz. Stahlkugel Φ 2
HM1-25
M.2×4 Din 553
0462
0447
0451
0450
M2,6×25 DIN84
04 64
04 53a
04 40
04 63
0454
M2,6×5,5 ABK11
Präz. Stahlkugel Φ 2
0459
0460
0461
Φ1,5×16 VSM12771
0459
0460
0461
Φ1,5×16 VSM12771
Φ1,5×7 VSM12771
Φ1,5×5 VSM12771 Rundung abfeilen
0441
0442
0443a
0444
0445
0446
0449
0448
0452
0455
0456
0458
04 65
M.2×5,3 CAz/5

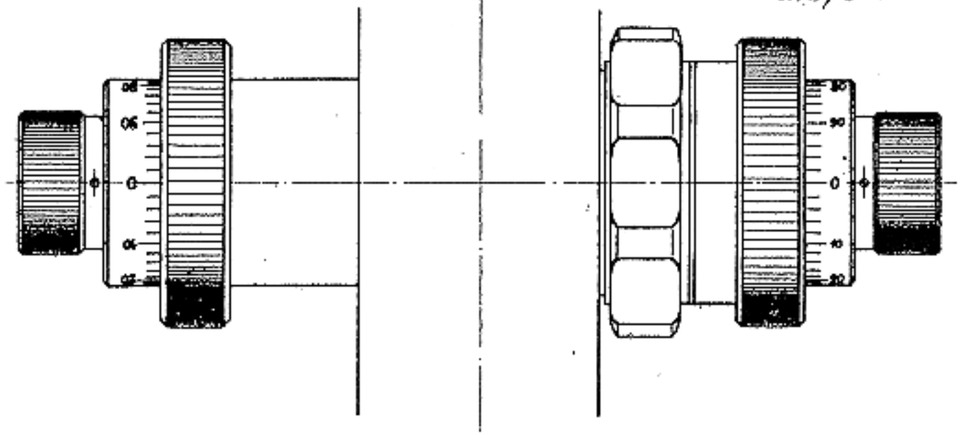



Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen diese Zeichnungen nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Wild Heerbrugg AG

29.1.53 Hdg

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.
				MKT2-00 000

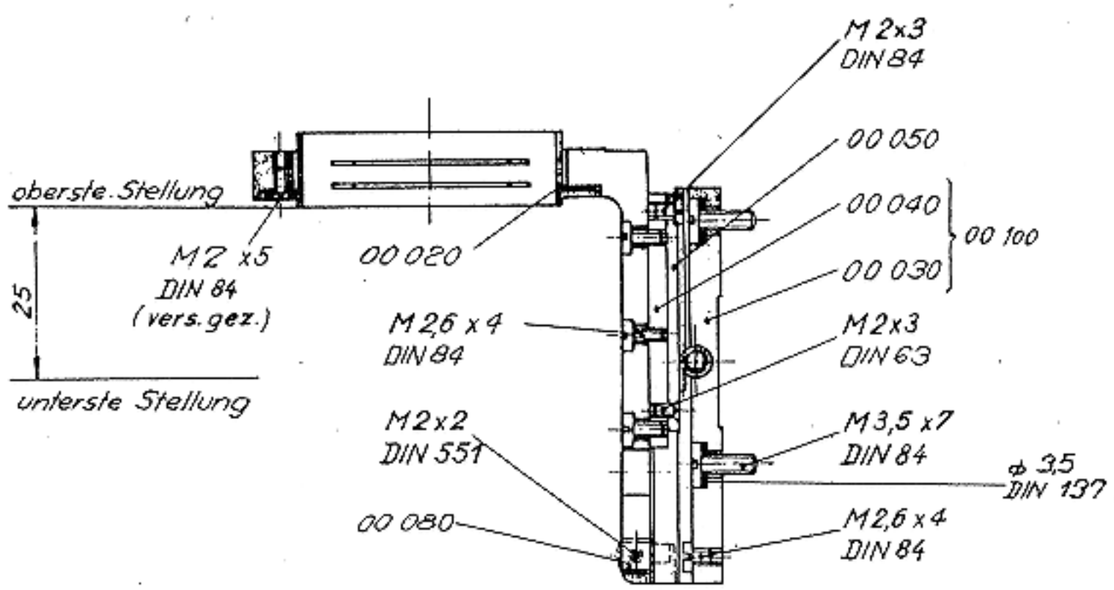


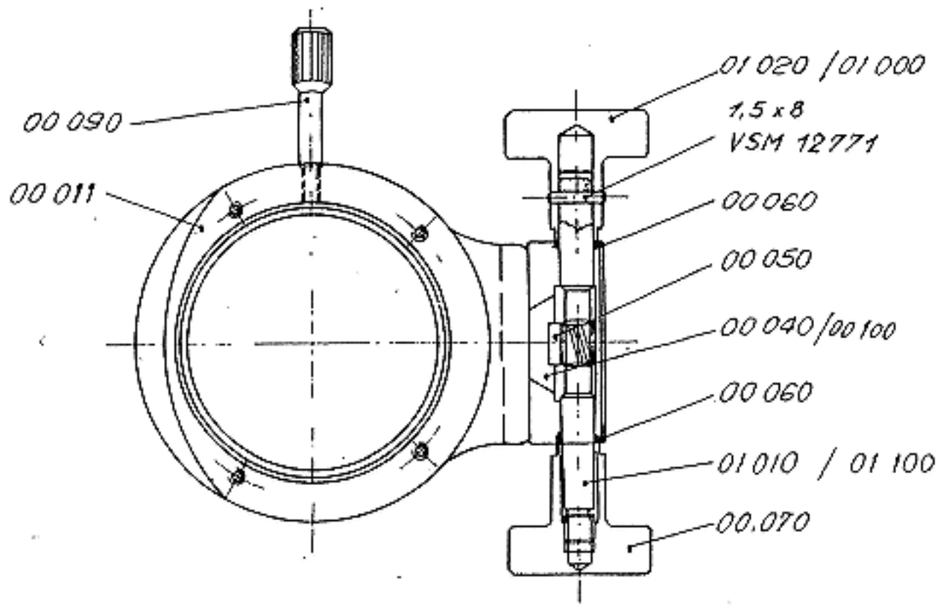

Aenderungen:	Bezeichnung:		Datum	Name	Ersatz für: =
	Kondensortrieb M11	Gezeich	18.4.61	Ra-Ly	M11-2001
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MKT3-00000

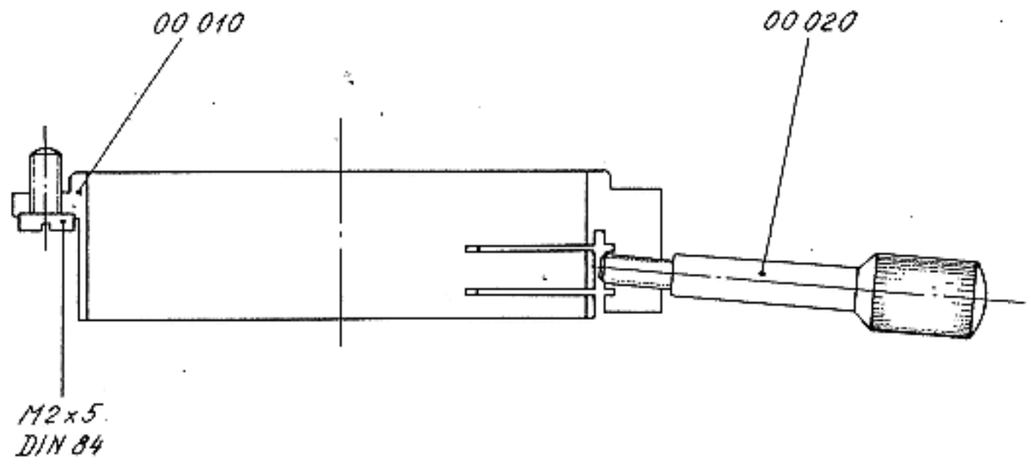



Aenderungen:	Bezeichnung:	1963	Datum	Name	Ersatz für: =
	Kondensorschiebehülse	Gezeich	27.9.	Ry	1111-1801
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			


WILD HEERBRUGG

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				M0F2-00000

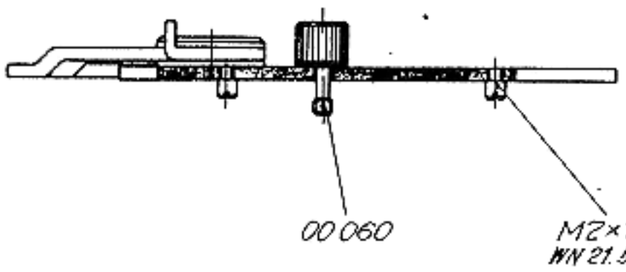

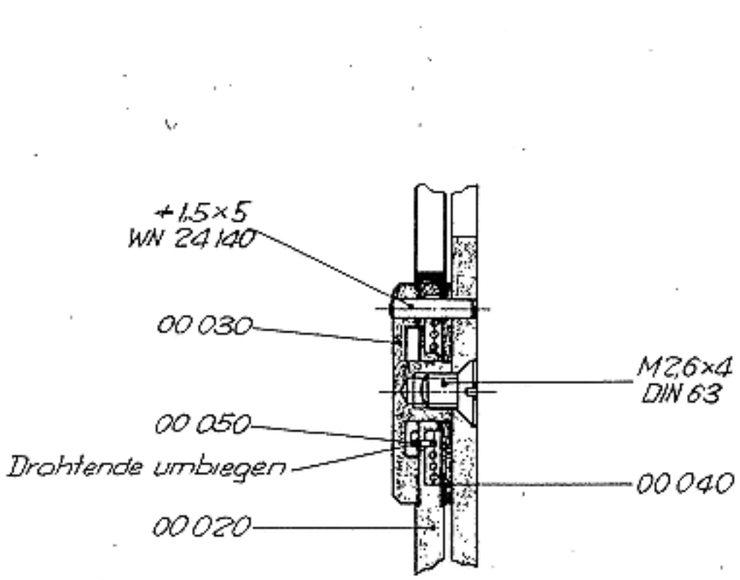

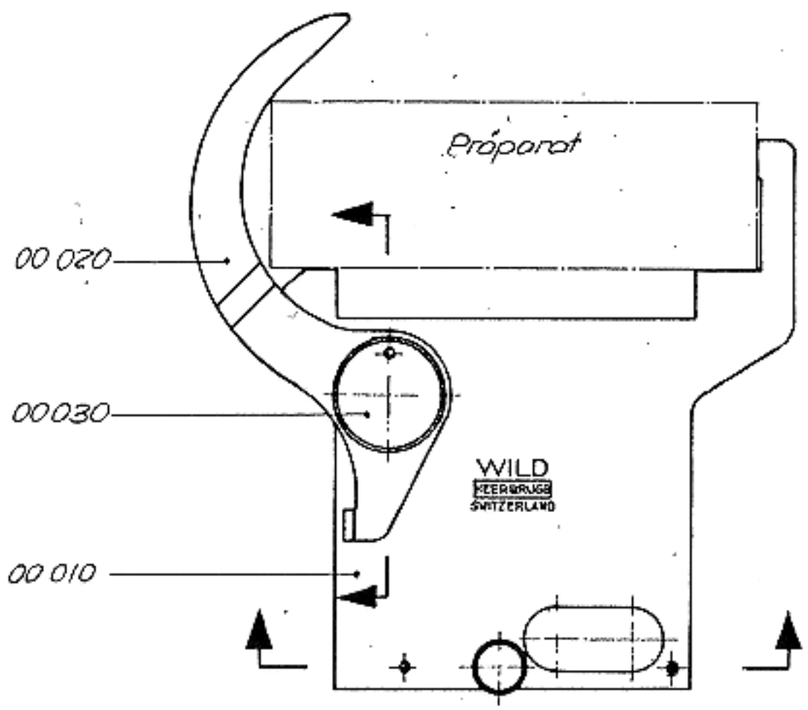


Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für: =
	Objektführer M20 Kreuztisch	Gezeich	16. 10.	Keg	M20-3102
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

NORM. 03.003


M20 | 23 01

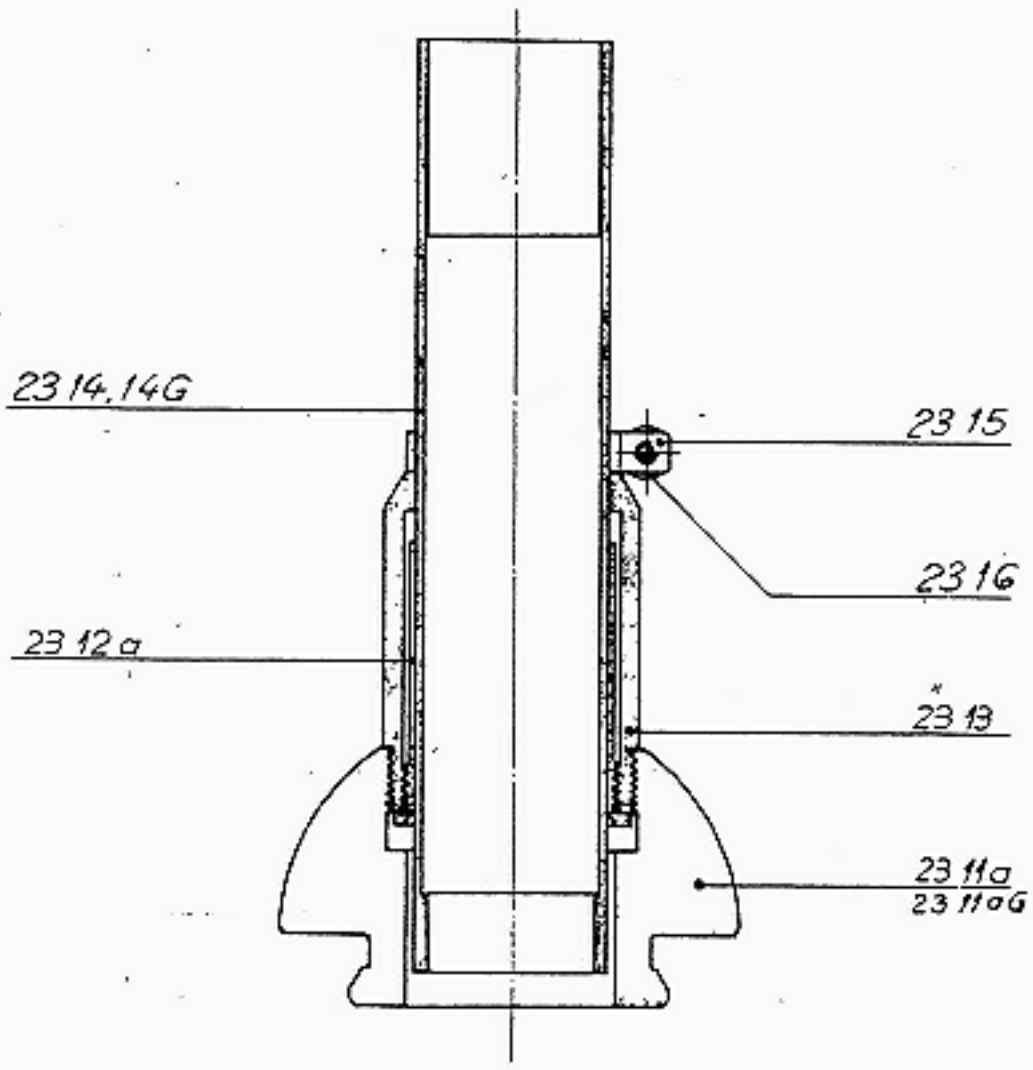


23 4 54

M20 | 24 01


Monok. Schrägtubus ausziehbar.

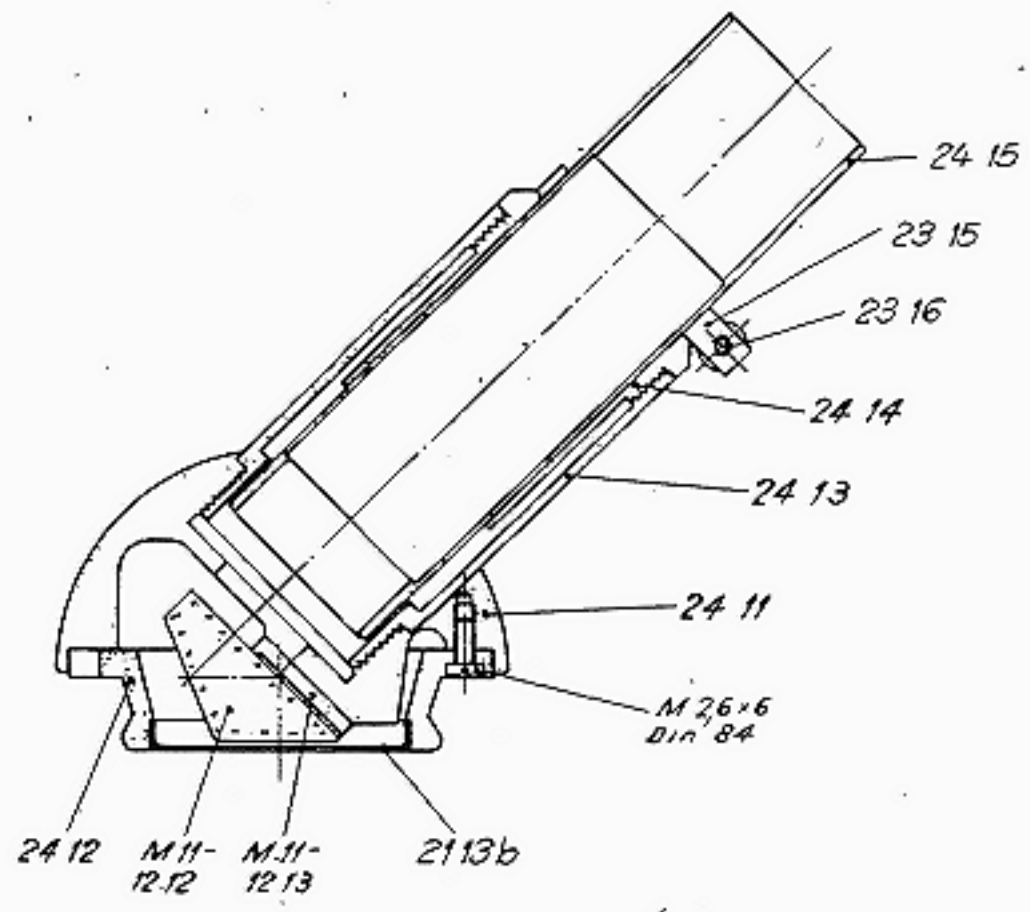


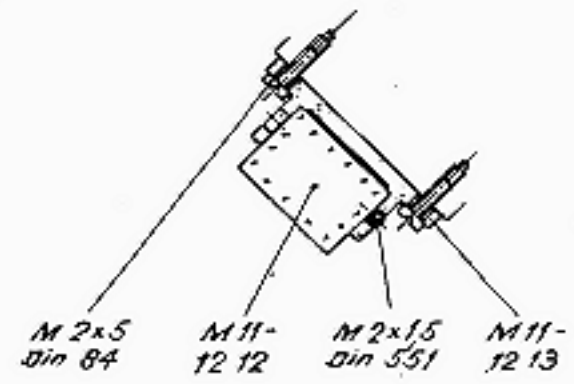

11. 1 55

M20 | 31 01

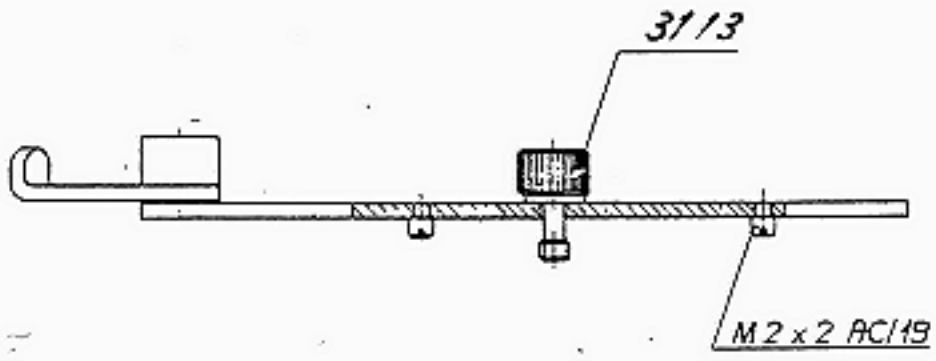

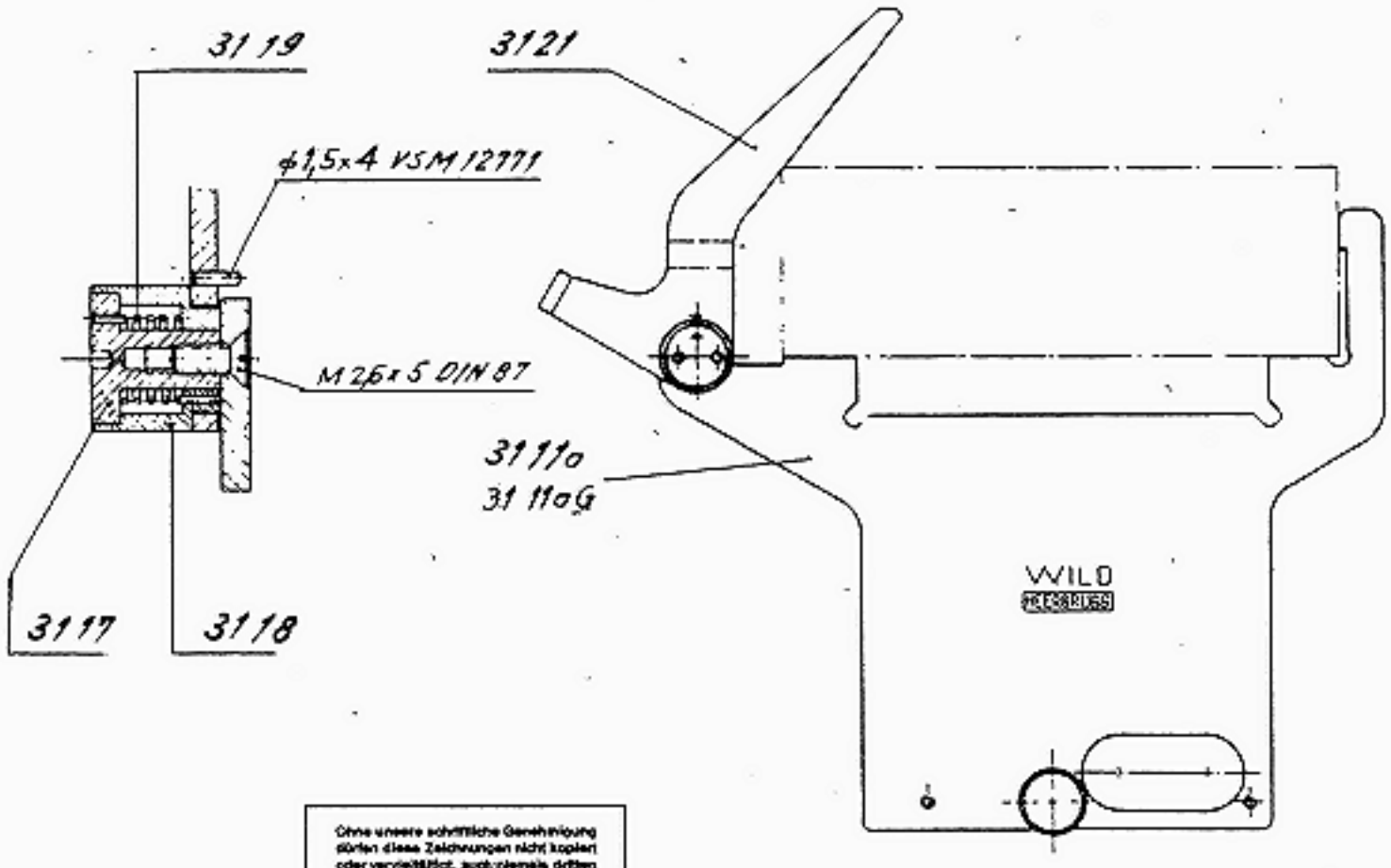





Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen diese Zeichnungen nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Wild Heerbrugg AG

22 10. 52


Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen diese Zeichnungen nicht kopiert oder vervielfältigt, auch Abteile davon Fremden nicht zugänglich gemacht werden.
Wild Heerbrugg AG

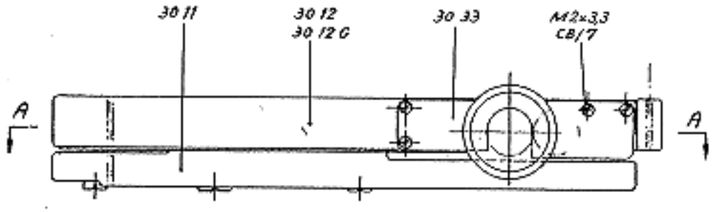



Schnitt D÷D.

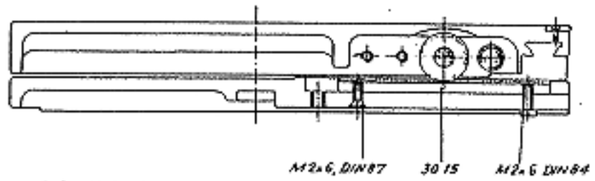


Schnitt C÷C.

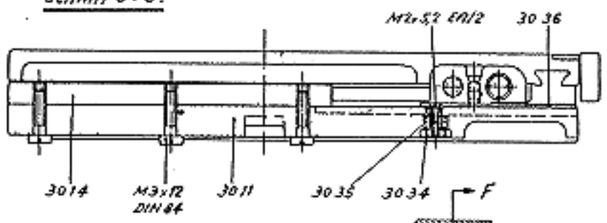

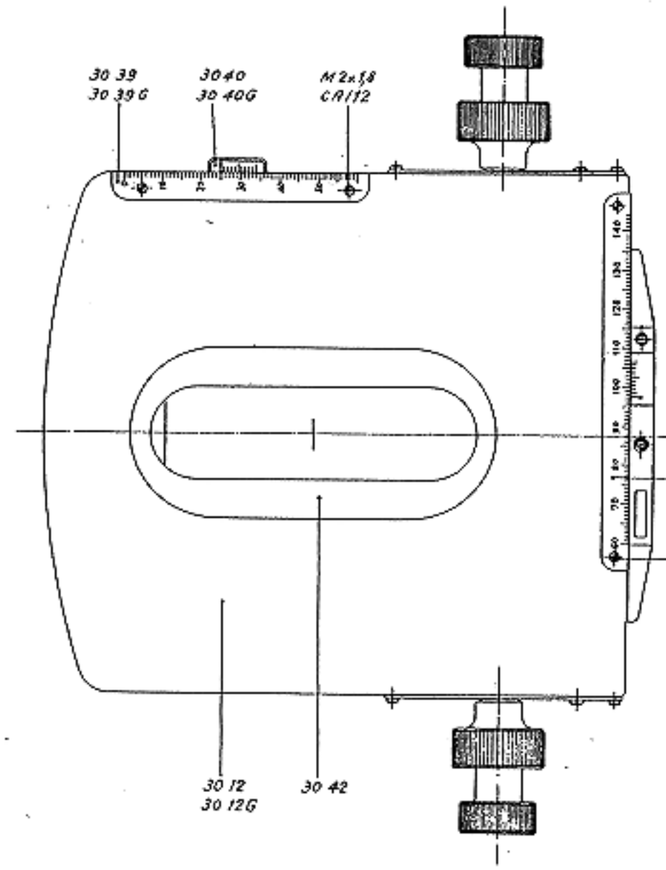


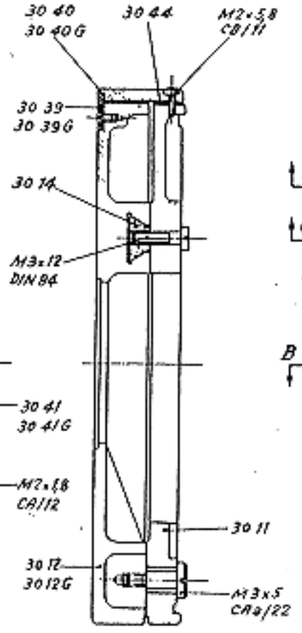


Schnitt E÷E.

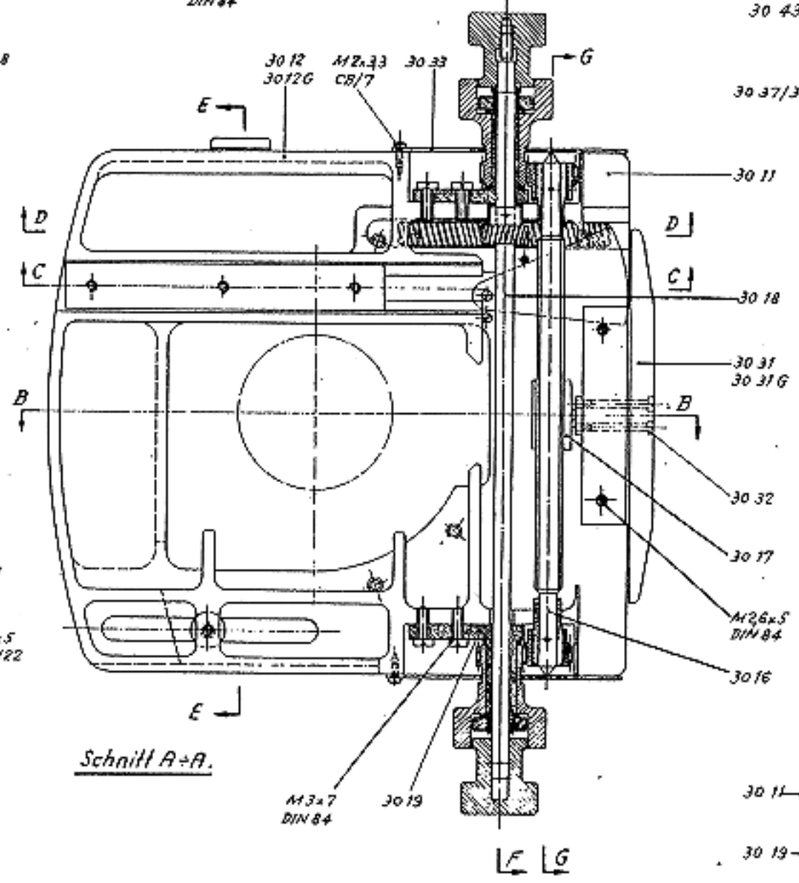


Schnitt A÷A.

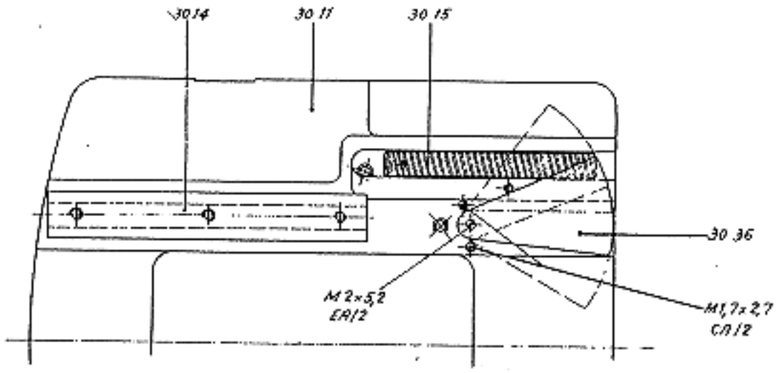

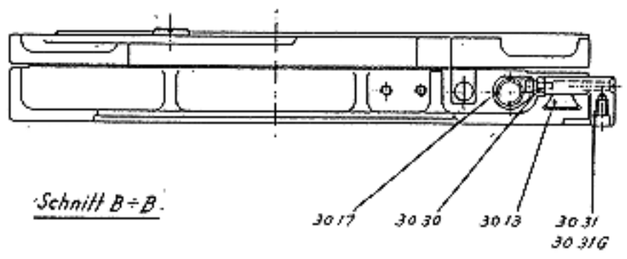


Schnitt B÷B.

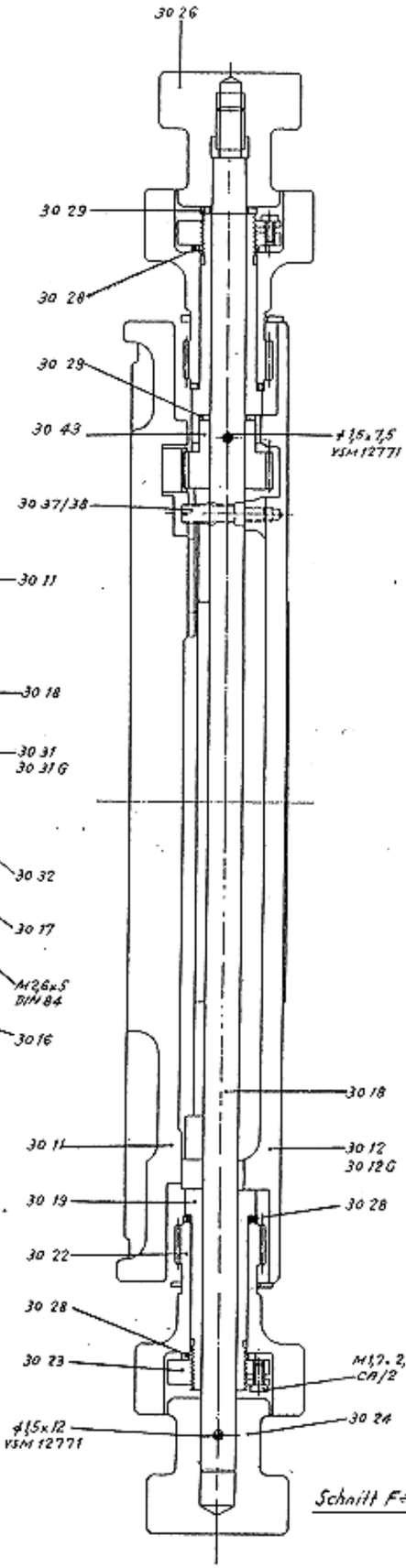


Schnitt F÷F.


Schnitt G÷G

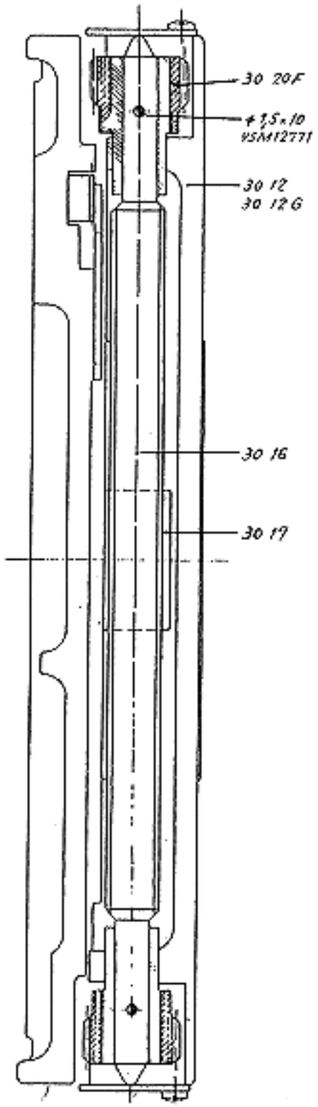


Zchng. Nr.
MTi31-000 000

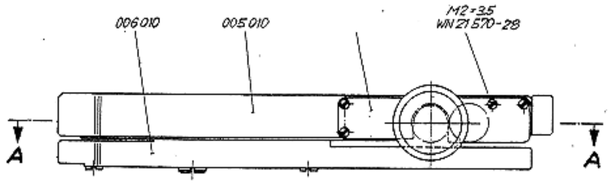



Schnitt D+D

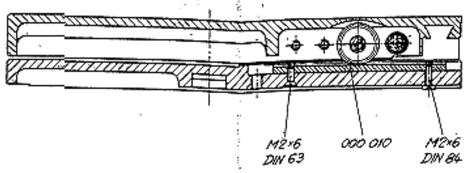


Schnitt C+C

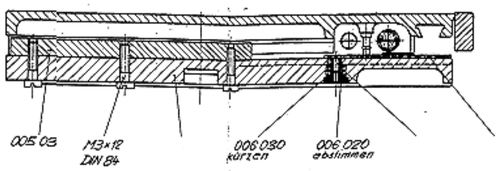

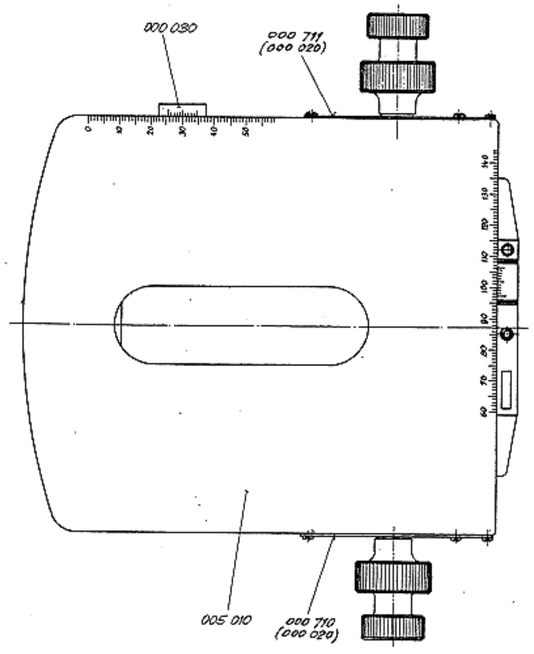


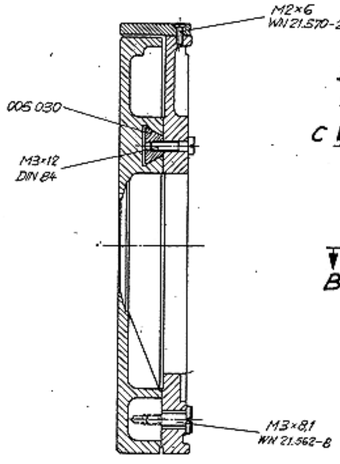


Schnitt E+E

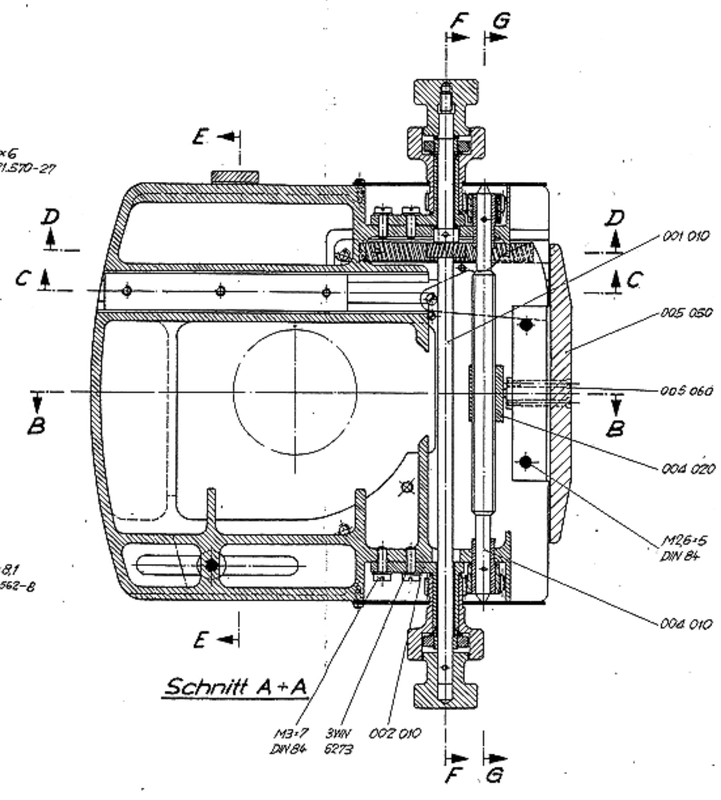


Schnitt A+A

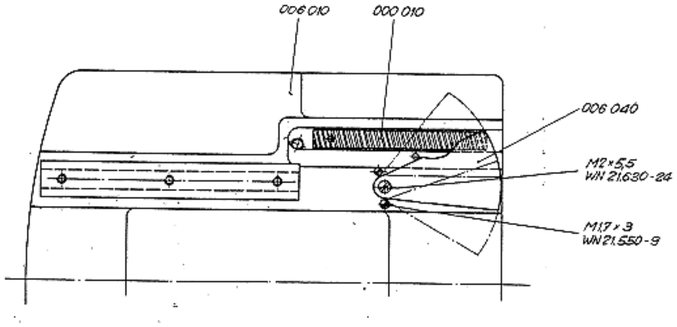

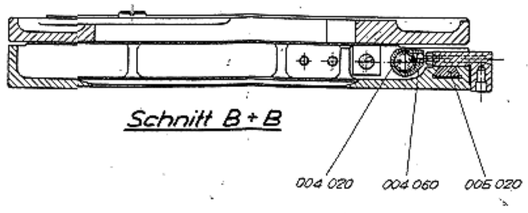


Schnitt B+B

Schnitt F+F

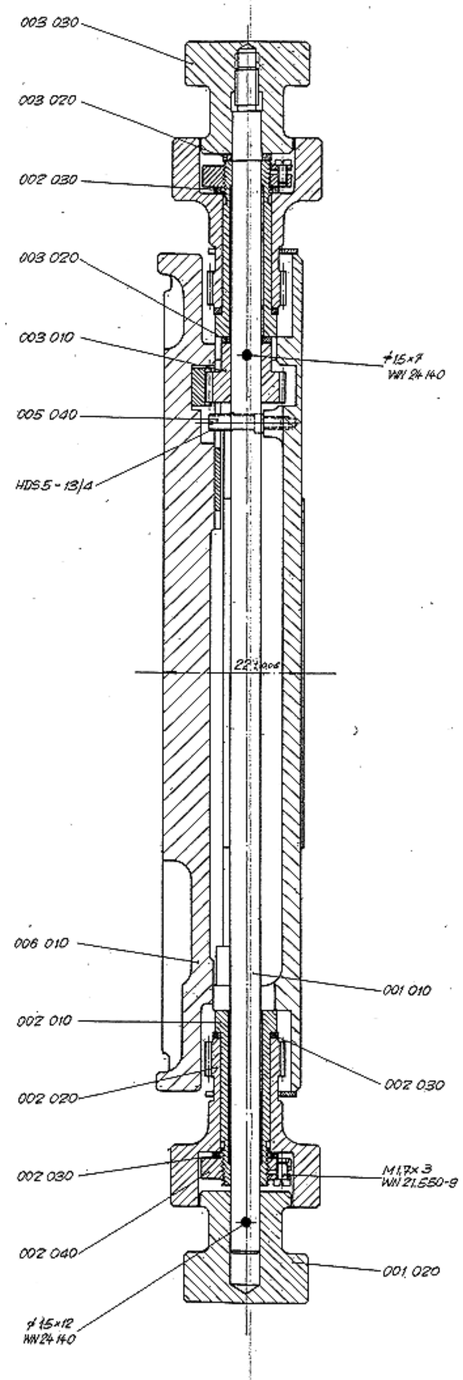

Schnitt G+G

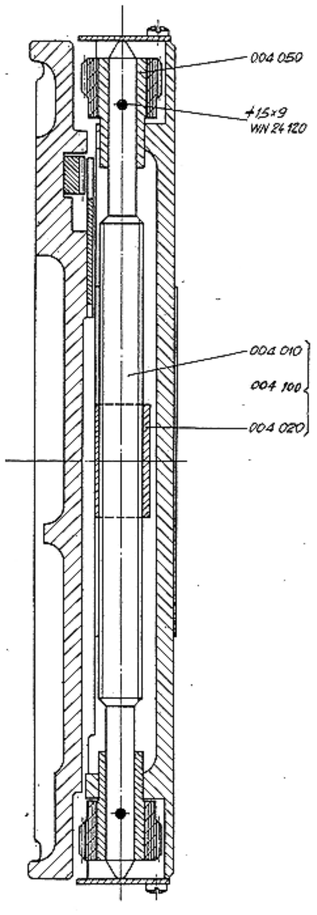


Falzbearbeitung: ——	Therm. Behandlung ——				Bearbeitung: ——
Aenderungen:	Bezeichnung: Kreuztisch M20	1962	Datum	Name	Maßstab:
		Gezeich.	1. 12.		WILD
	Material: ——	Geprüft	19.2.64		
	Oberfläche: ——	Norm-Geprüft			Zchng.-Nr. MTi31-000 000
	Ersatz für: M20 - 3002	Ersetzt durch:			


Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.


Zchng. Nr.
MTi32-00000


Schnitt B÷B

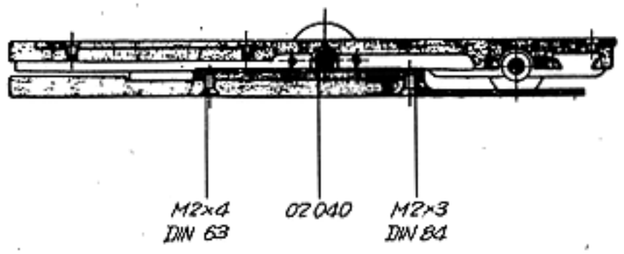


Schnitt A÷A

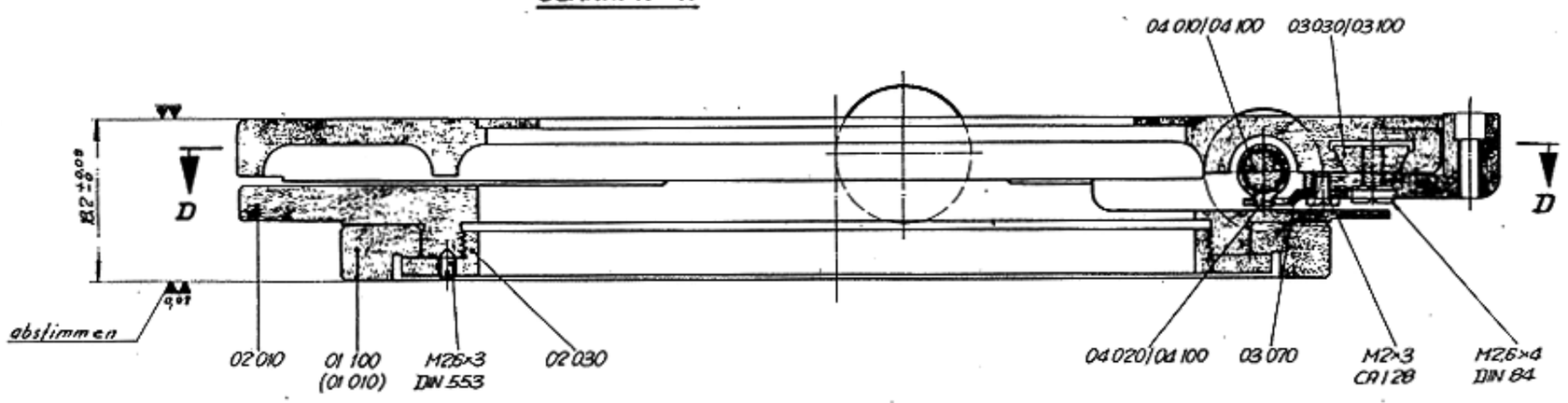

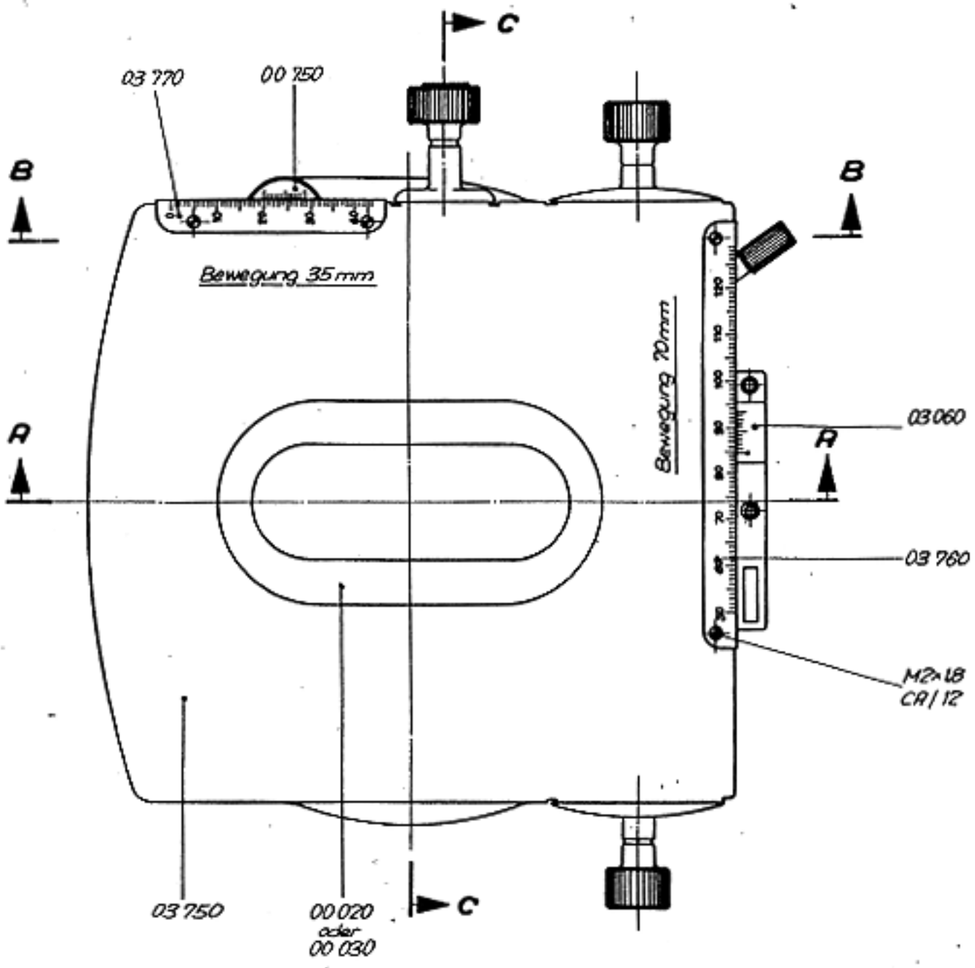

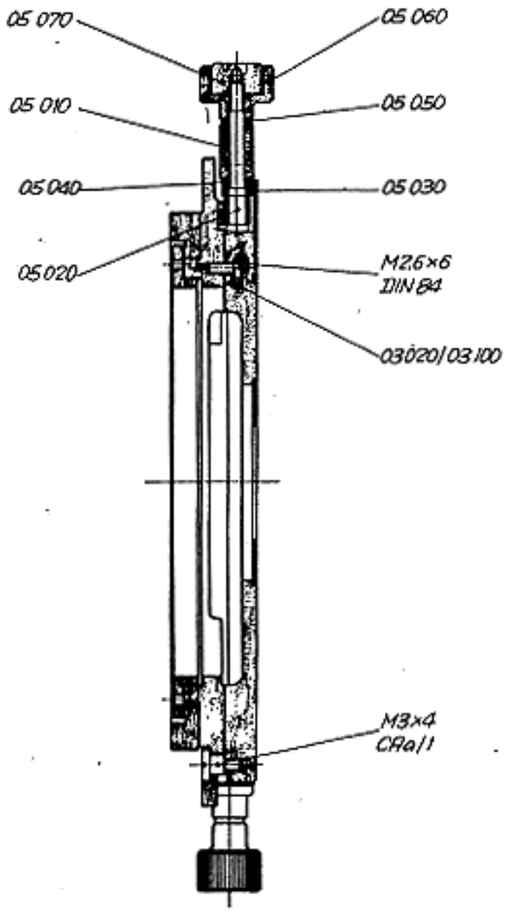

Schnitt C÷C

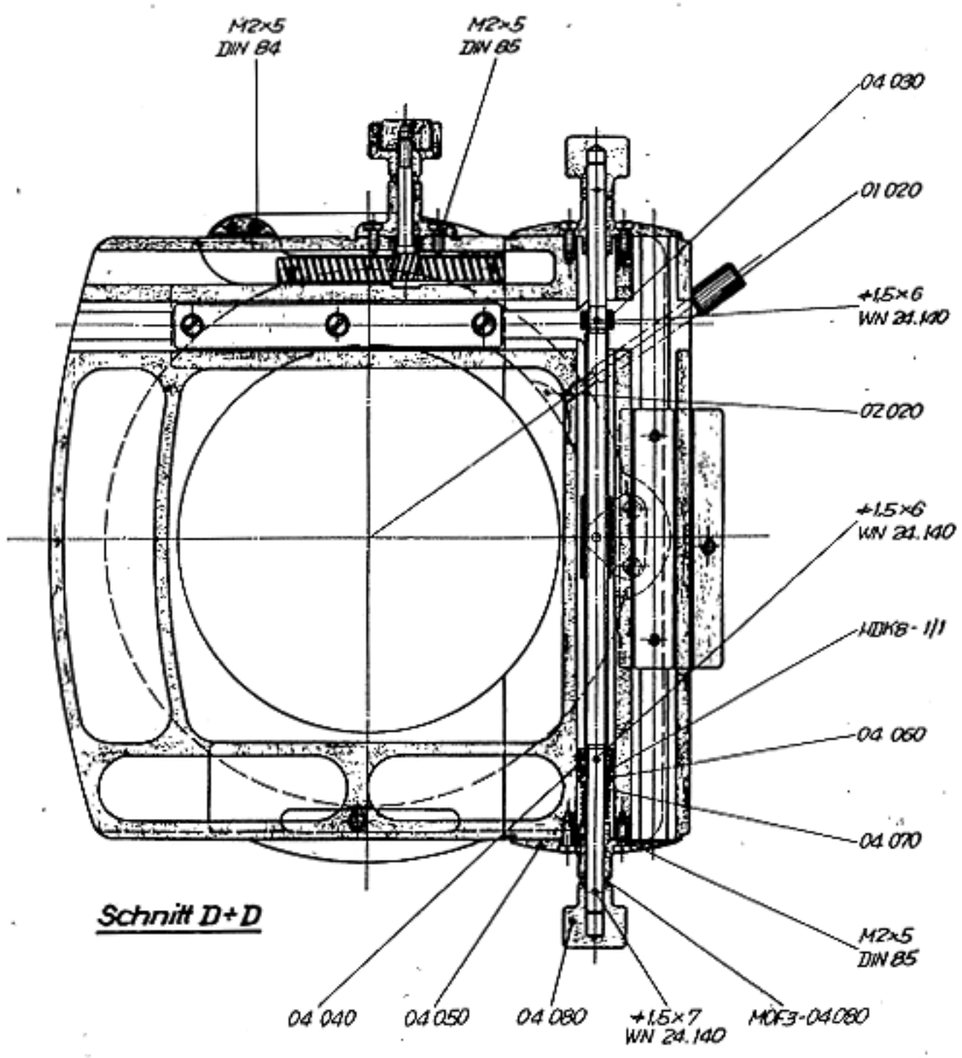



Schnitt D÷D

Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung				Bearbeitung
Aenderungen:	Bezeichnung: Kd-Tisch M20	1962	Datum	Name	Maßstab: WILD
		Gezeich	12. 11.		
	Material:	Geprüft			
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			Zchng.-Nr. MTi32-00000
	Ersatz für: M20-3701	Ersetzt durch:			

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MTi 34-000 000

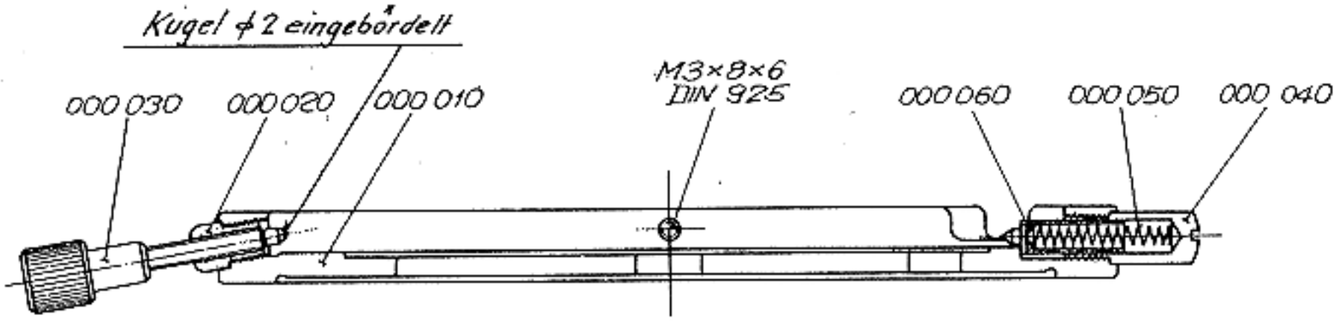

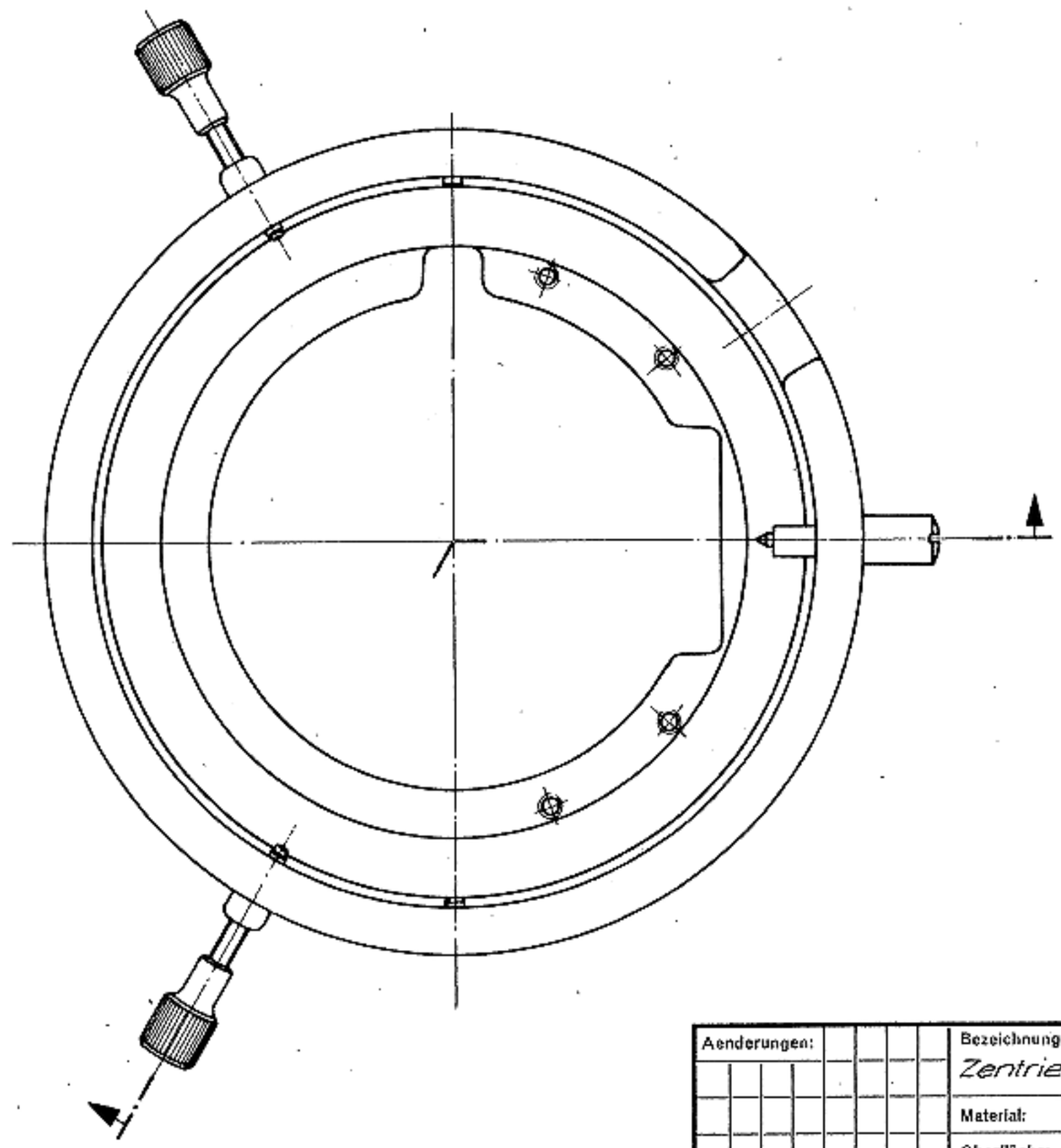


Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen diese Zeichnungen nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Wild Heerbrugg AG

Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für: =
	Zentrieraufnahme	Gezeich	16.10.		M 20-3601
	Material:	Geprüft	14.10.62		Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			


WILD HEERBRUGG


Zchng. Nr.
MTu1-00 000

Schnitt A÷A

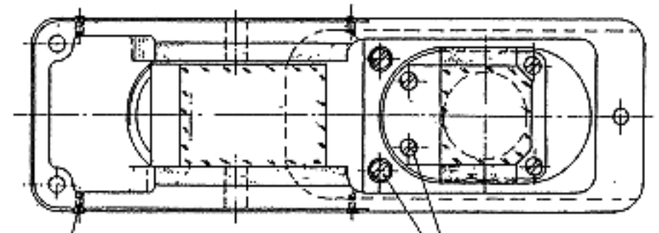


Schnitt B÷B

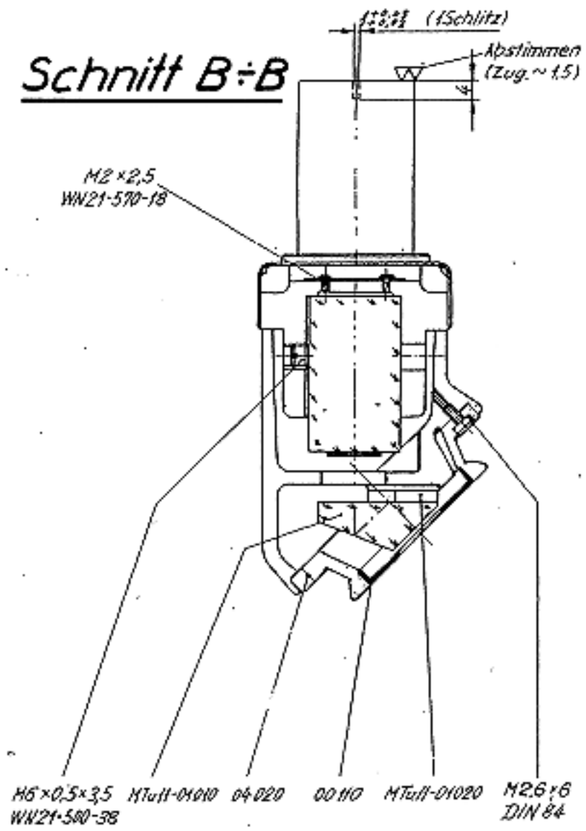

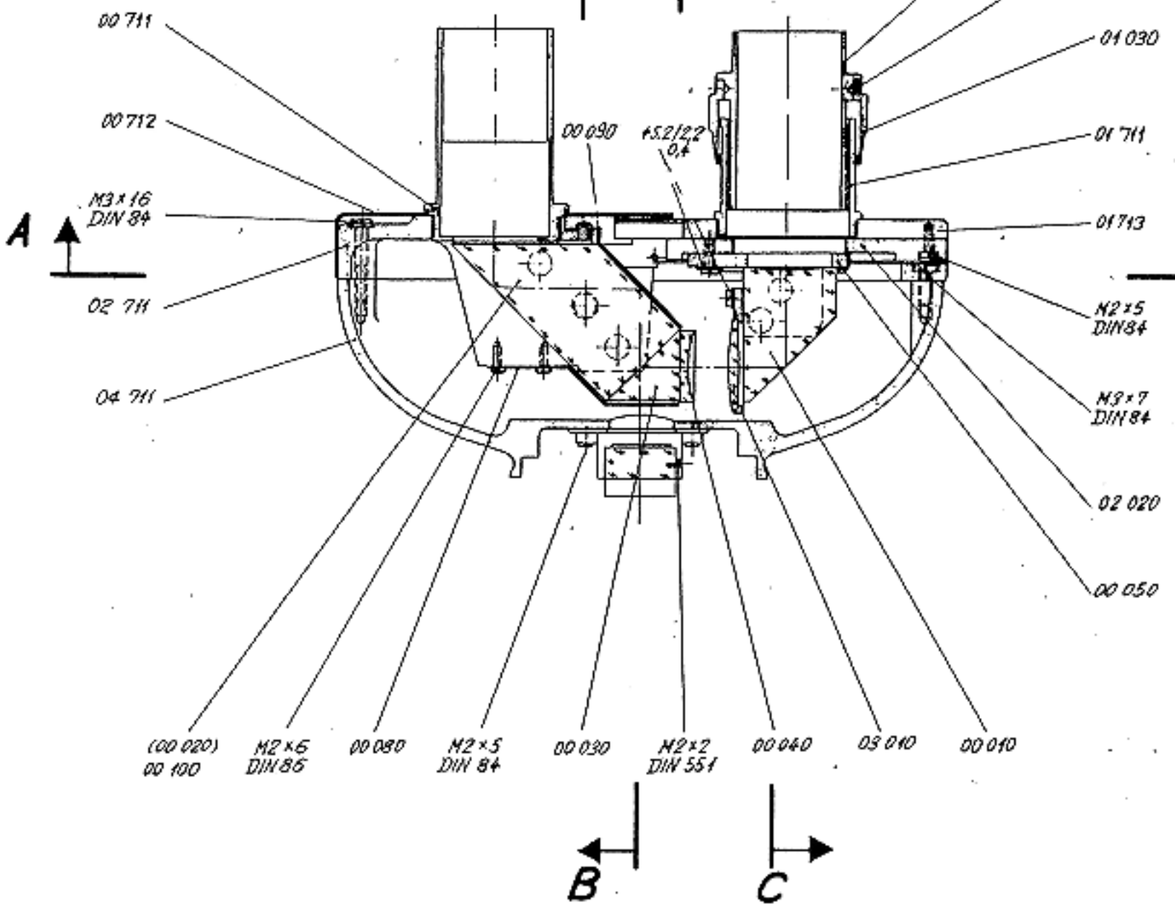

Schnitt C÷C

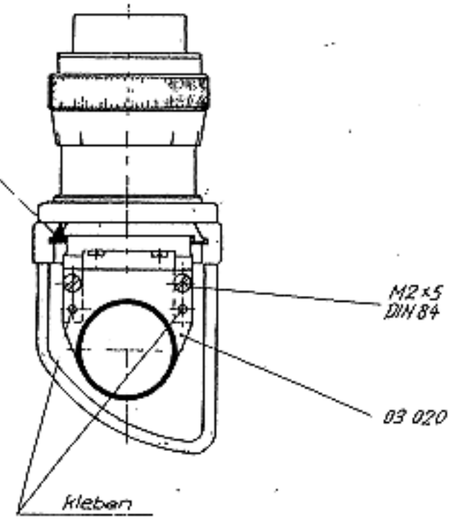



Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung				Bearbeitung
Aenderungen:	Bezeichnung: Binokulartubus G/M20	1963	Datum	Name	Maßstab: WILD HEERBRUGG
	Material:	Gezeich	2.9.	Kün	
	Oberfläche:	Geprüft	4.9.	Kf.	
	Ersatz für: M20-20 01	Norm-Geprüft			Zchng.-Nr. MTu1-00 000
		Ersetzt durch:			

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MTu2-000 000

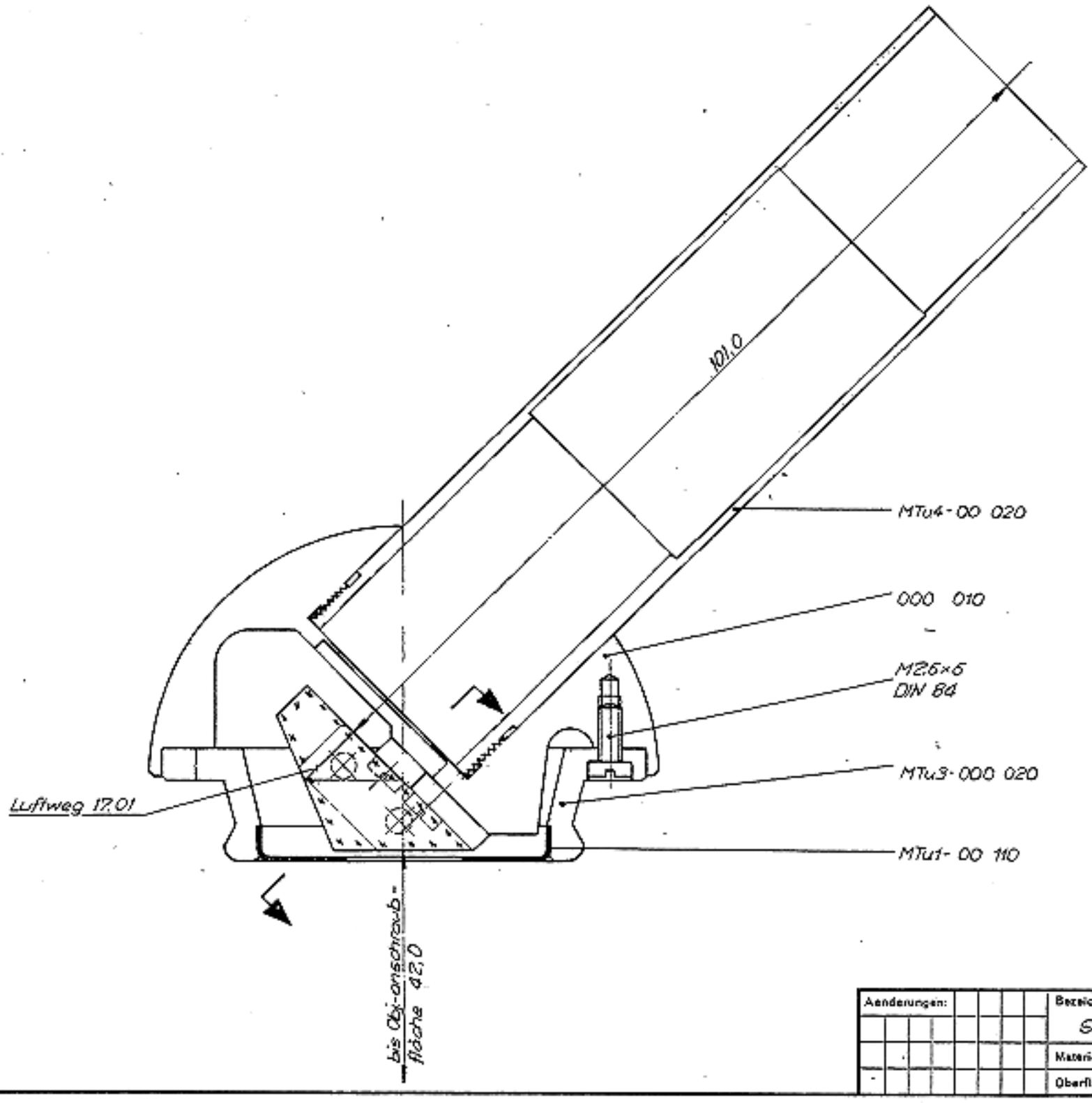


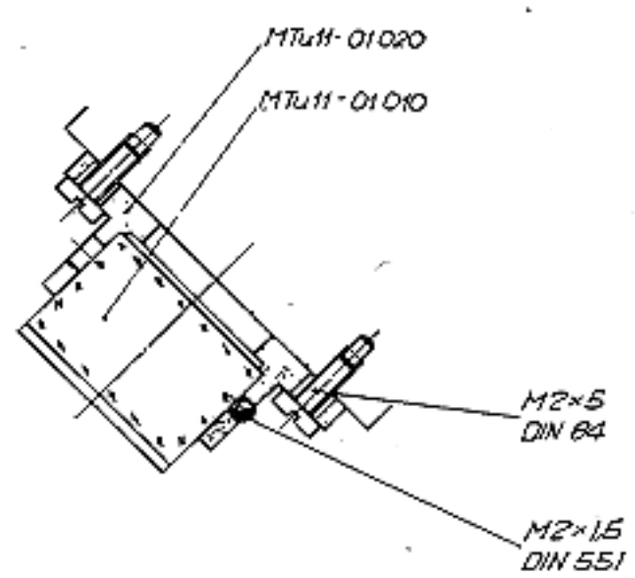

Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für: MTu2-000 000	WILD HEERBRUGG
	Schrägtubus F	Gezeich	11. 7.			
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:	
	Oberfläche:	Norm-Geprüft				

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MTu4 -00 000


Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

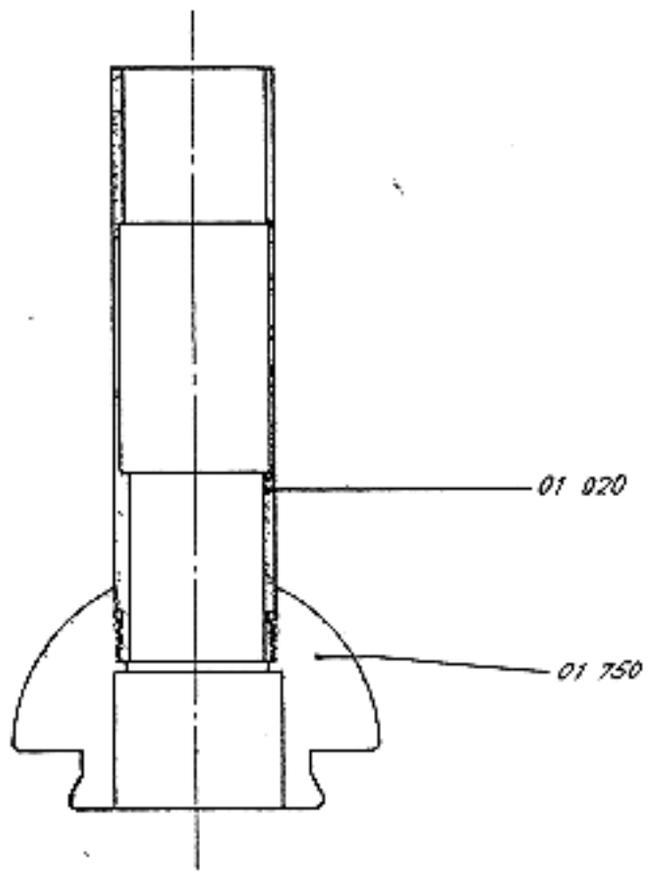


Aenderungen:	Bezeichnung:		Name	Datum	Ersatz für: MTu2-22 01	WILD HEERBRUGG
	Gerodtubus E	Gezeich		14.6.61		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:	
	Oberfläche:	Norm-Geprüft				

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
	—	—	—	MTu3-000 000


Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

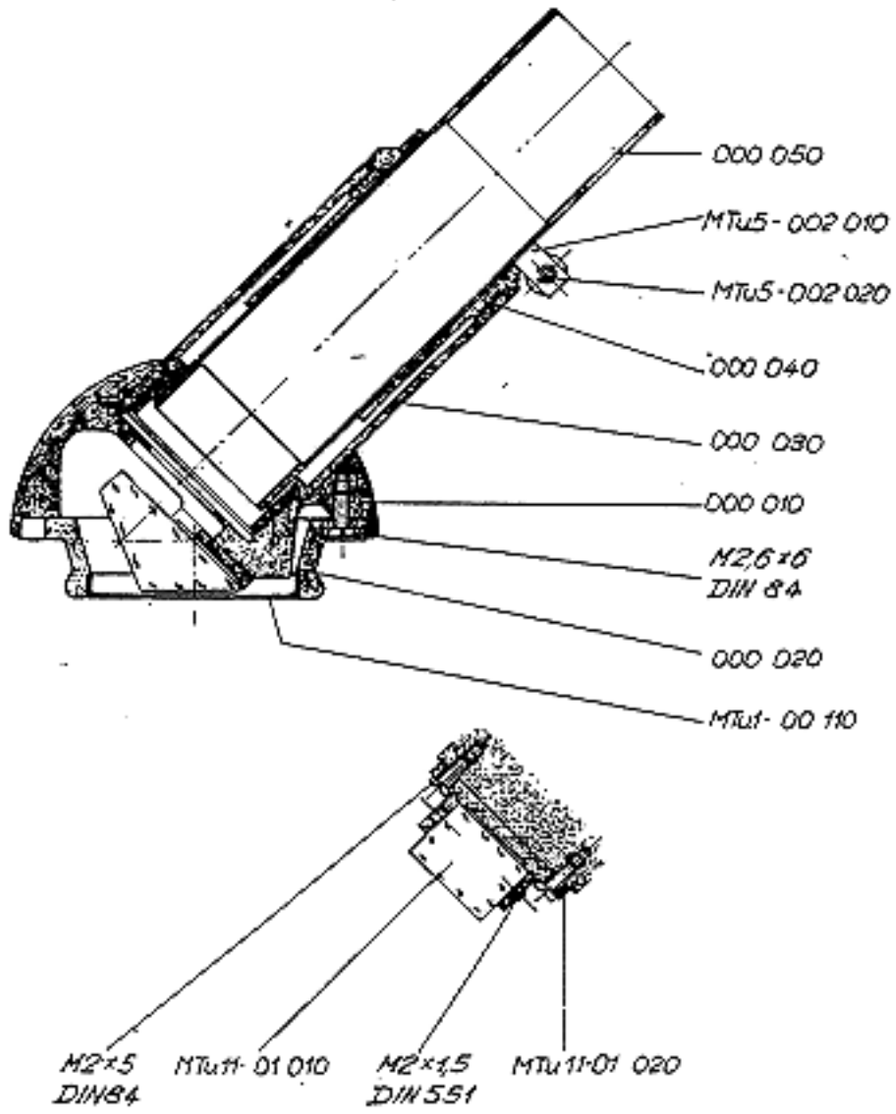


Aenderungen:	Bezeichnung:	1963	Datum	Name	Ersatz für: M20-2401	WILD HEERBRUGG
	Schrägtubus ausziehbar fa.	Gezeich	17.10.			
	Material: —	Geprüft	8.11.		Ersetzt durch:	
	Oberfläche: —	Norm-Geprüft				

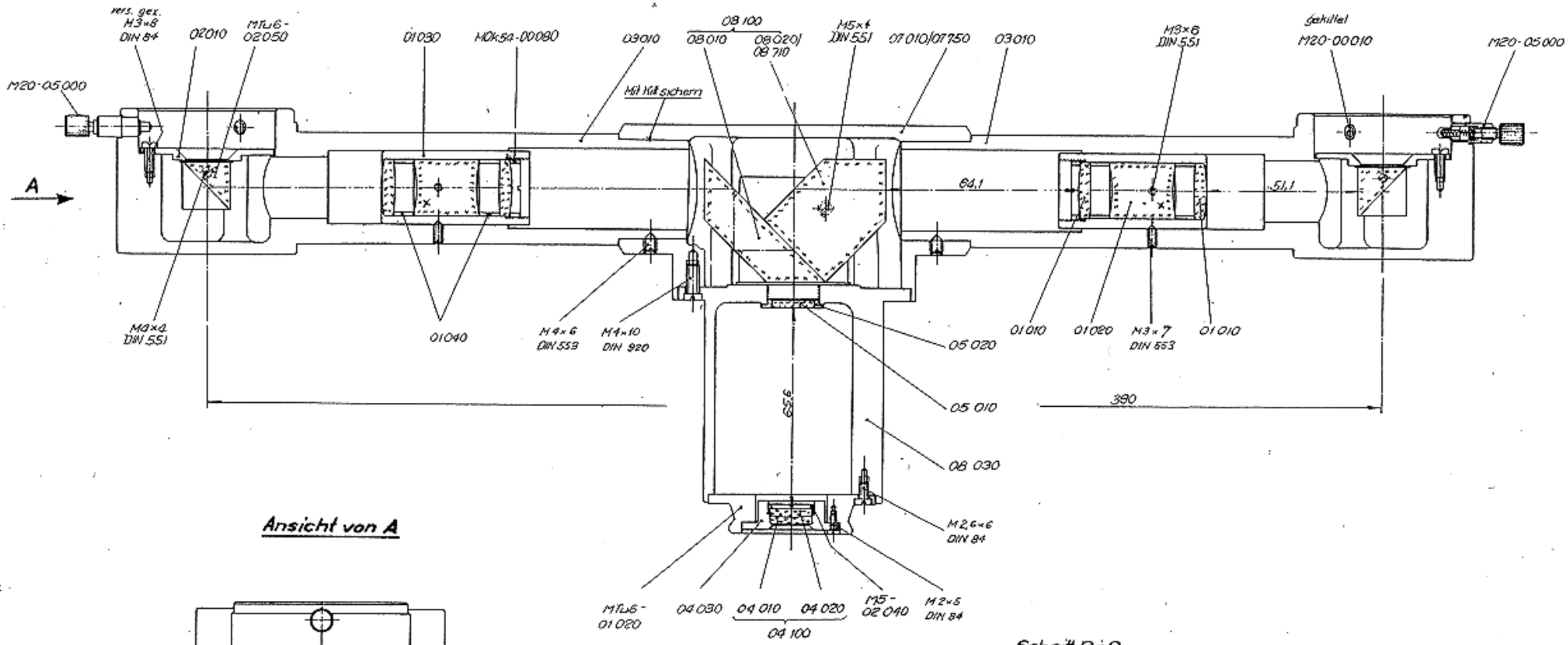

Ansicht von A

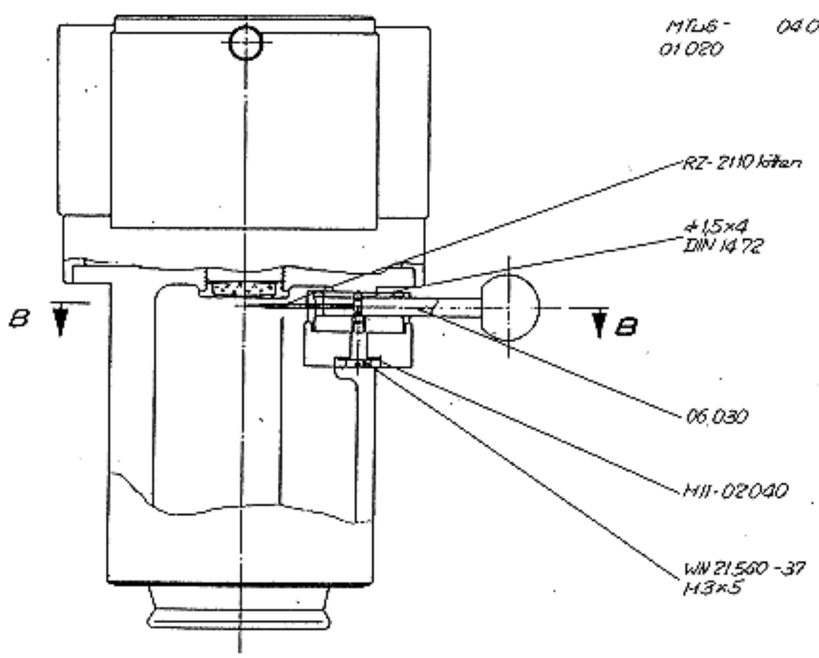

Schnitt B÷B

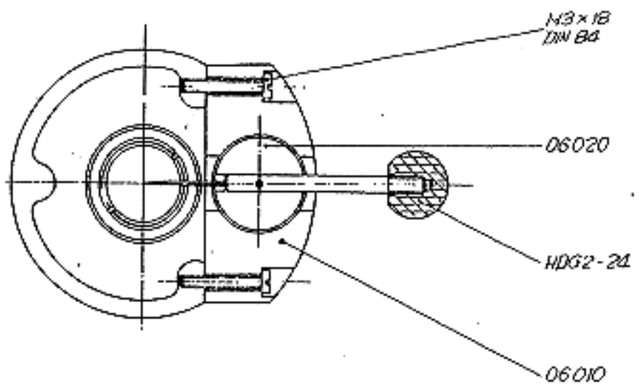

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.


Benennung	**Diskussionstubus**	Datum	16.1.61
Material		Gewicht	
Erstellt bei	MZ87-01 01	Maßstab	1:1
Ersatz für		Ersetzt durch	

WILD HEERBRUGG

Zeichn.-Nr. **MTu9-00 000**


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MTu5 - 000 000

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

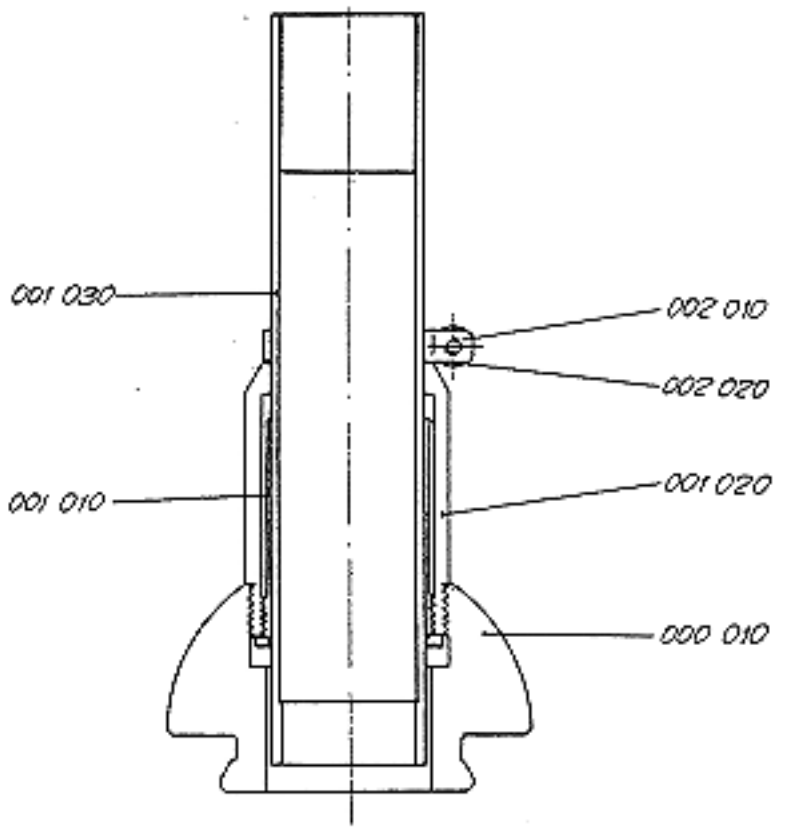

Änderungen:	Bezeichnung: Eo/M20 Gerader Ausziehtubus	1963	Datum	Name	Ersatz für: — M20-2301	WILD HEERBRUGG
		Gezeich	11. 7.	Sg		
	Material:	Geprüft		fi	Ersetzt durch:	
	Oberfläche:	Norm-Geprüft				


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MTu6 - 00 000

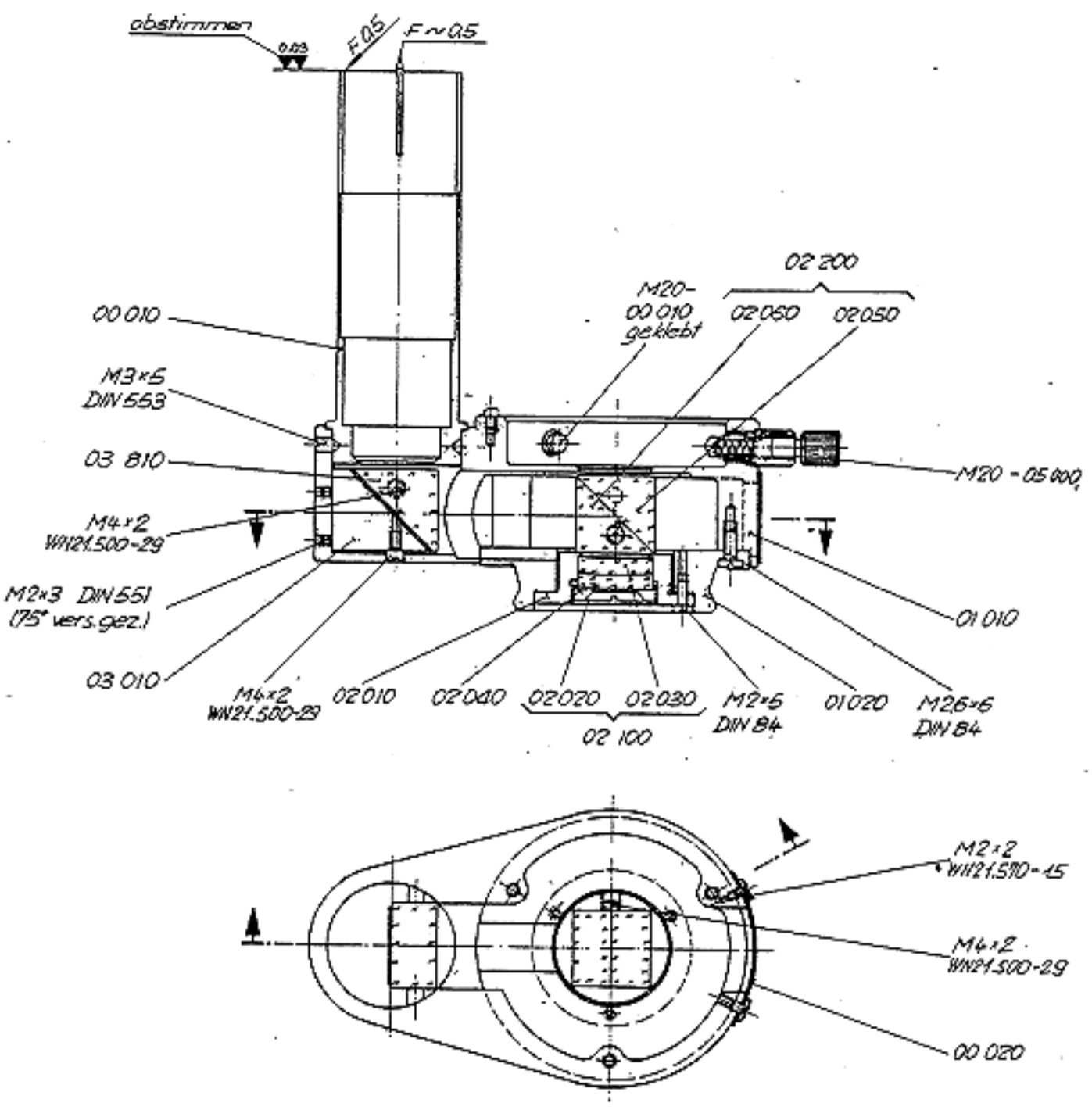

Änderungen:	Bezeichnung: Photolubus H/M20	1962	Datum	Name	Ersatz für:	WILD HEERBRUGG
		Gezeich	22.10.			
	Material:	Geprüft	30.11.62.		Ersetzt durch:	
	Oberfläche:	Norm-Geprüft				

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritt


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.: MTu 7-000 000

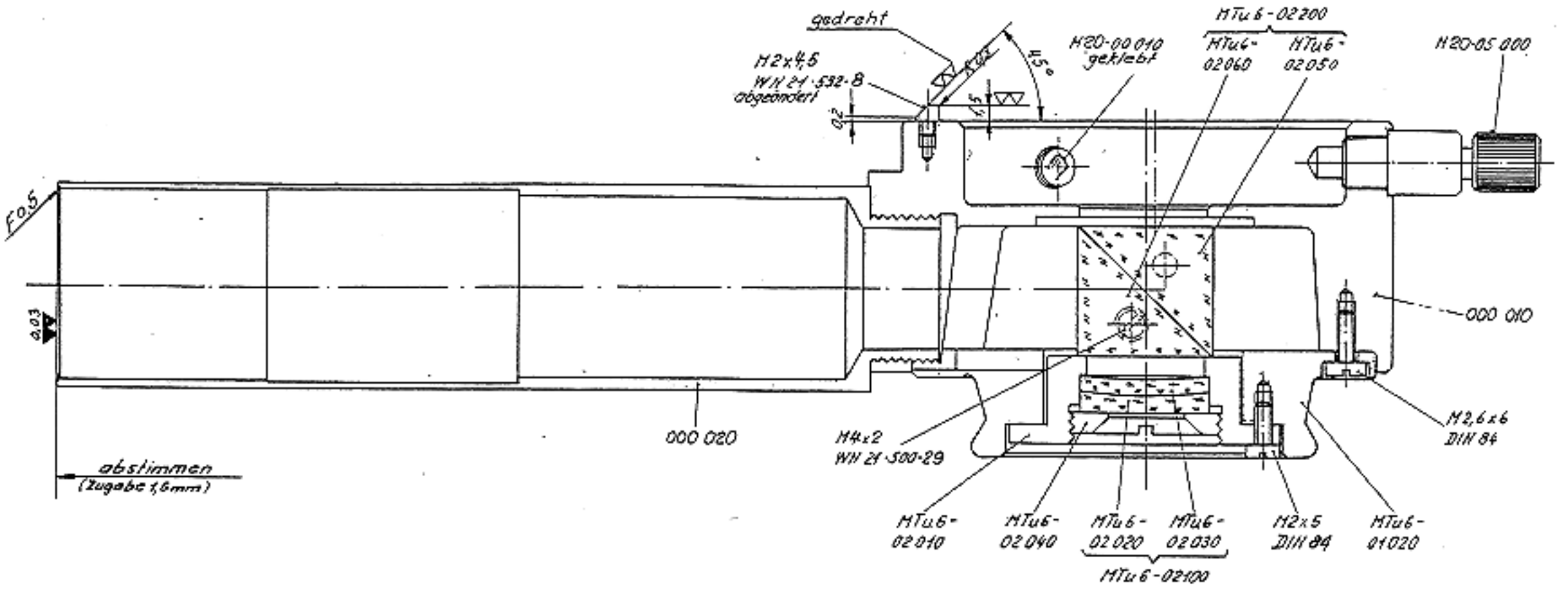

Änderungen:	Bezeichnung: M20-Horiz.-Tubus Hz 75/25%	1963	Datum	Name	Ersatz für: —
		Gezeich	18.9.		M20-73 01
	Material: —	Geprüft	27.11.64		Ersetzt durch:
	Oberfläche: —	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.: MTu 8-000 000

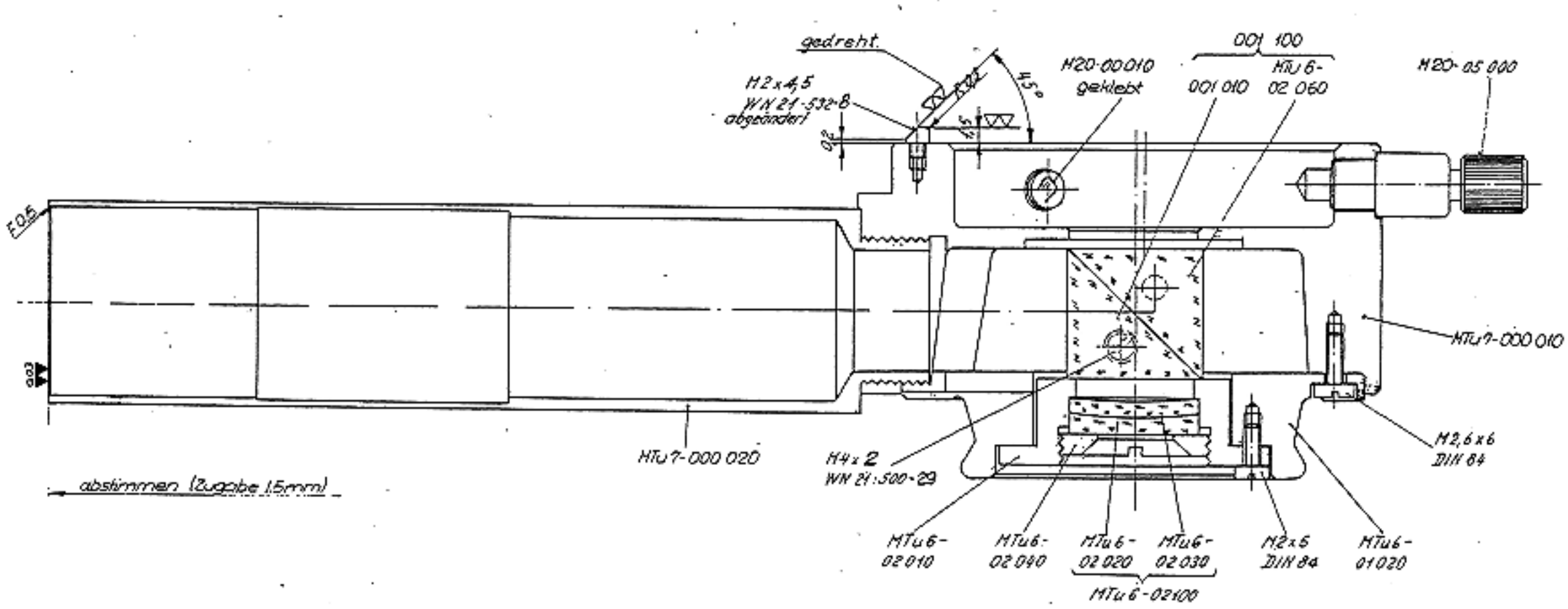

Änderungen:	Bezeichnung: H20-Horiz.-Tubus Hz. 95/5 %	1963	Datum	Name	Ersatz für: —
		Gezeich	18.9.		H20-73 01
	Material: —	Geprüft	30.11.64		Ersetzt durch:
	Oberfläche: —	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MKd1-00000

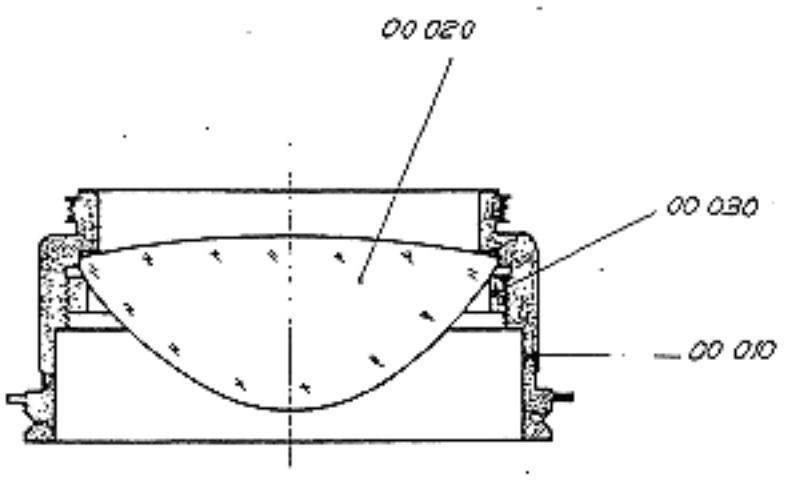

Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für:
	Apl. Kondensor nA. 065	Gezeich.	8.6.		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD Heerbrugg


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MKd2-00000

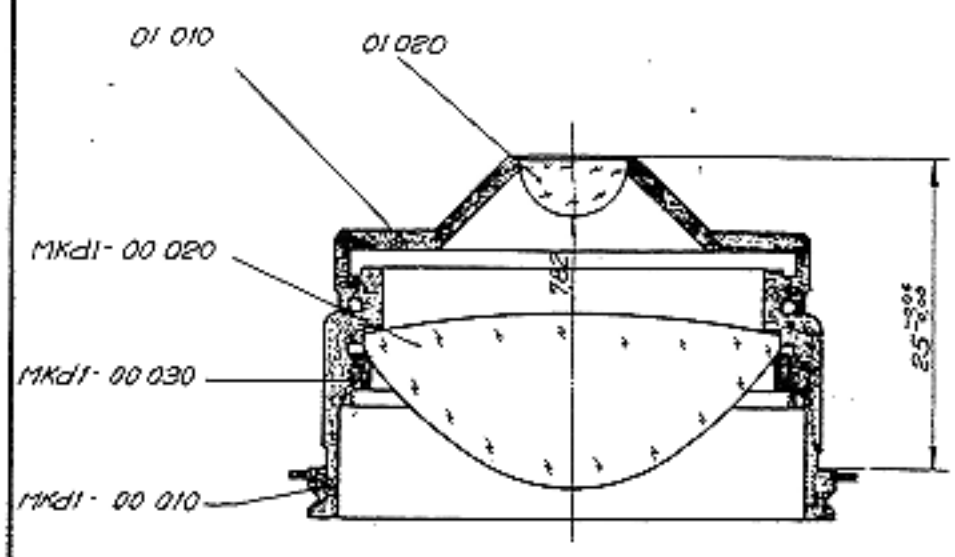

Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für: MZ21-0101
	Apl. Kondensor nA 1,3	Gezeich.	1.6.		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD Heerbrugg

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MKd3-00000

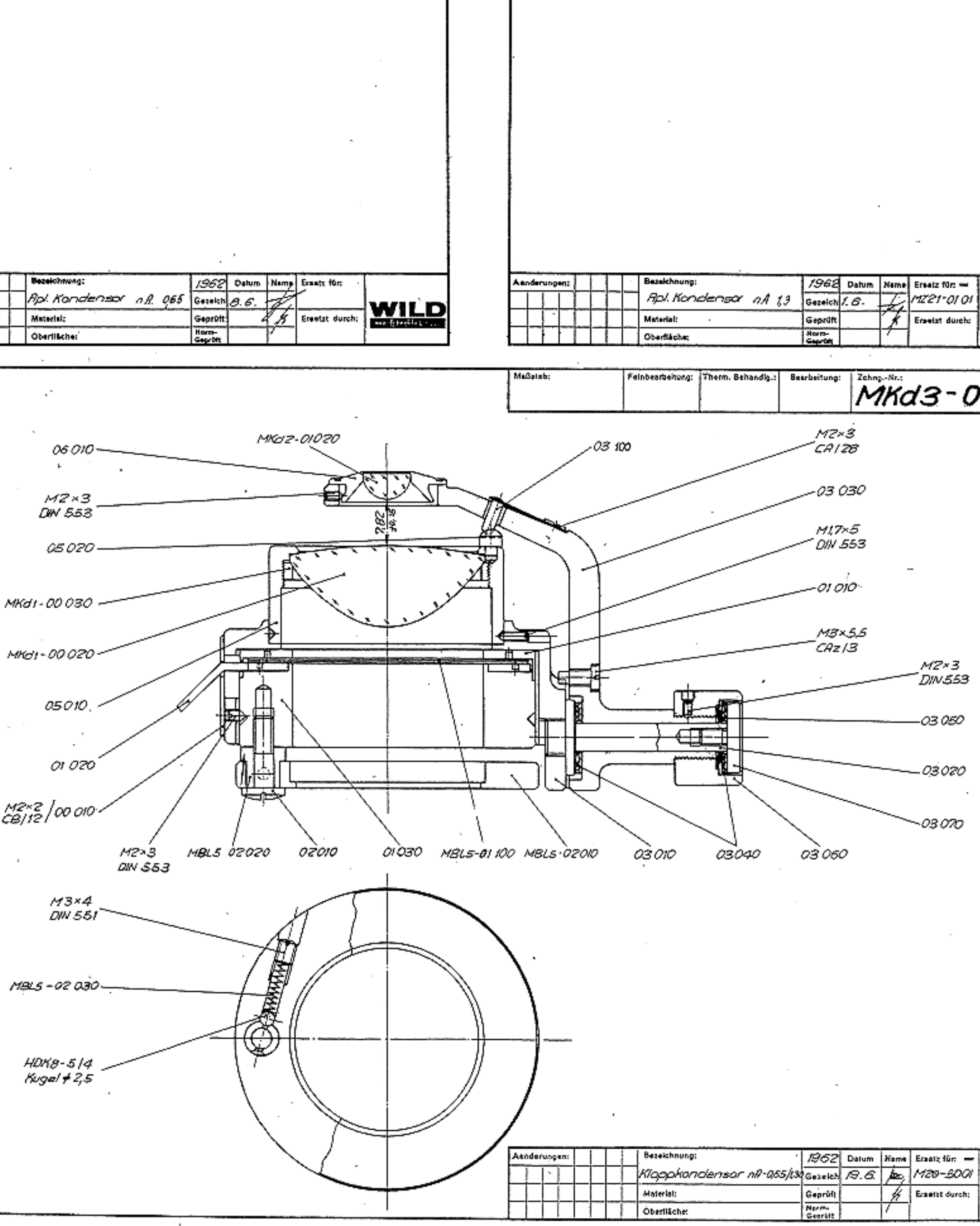


Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für: M20-5001
	Klappkondensor nA-065/130	Gezeich.	19.6.		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD Heerbrugg

NORM. 03.003


Maßstab: | Feinbearbeitung: | Therm. Behandlg.: | Bearbeitung: | Zchng.-Nr.: MKd5-000 000

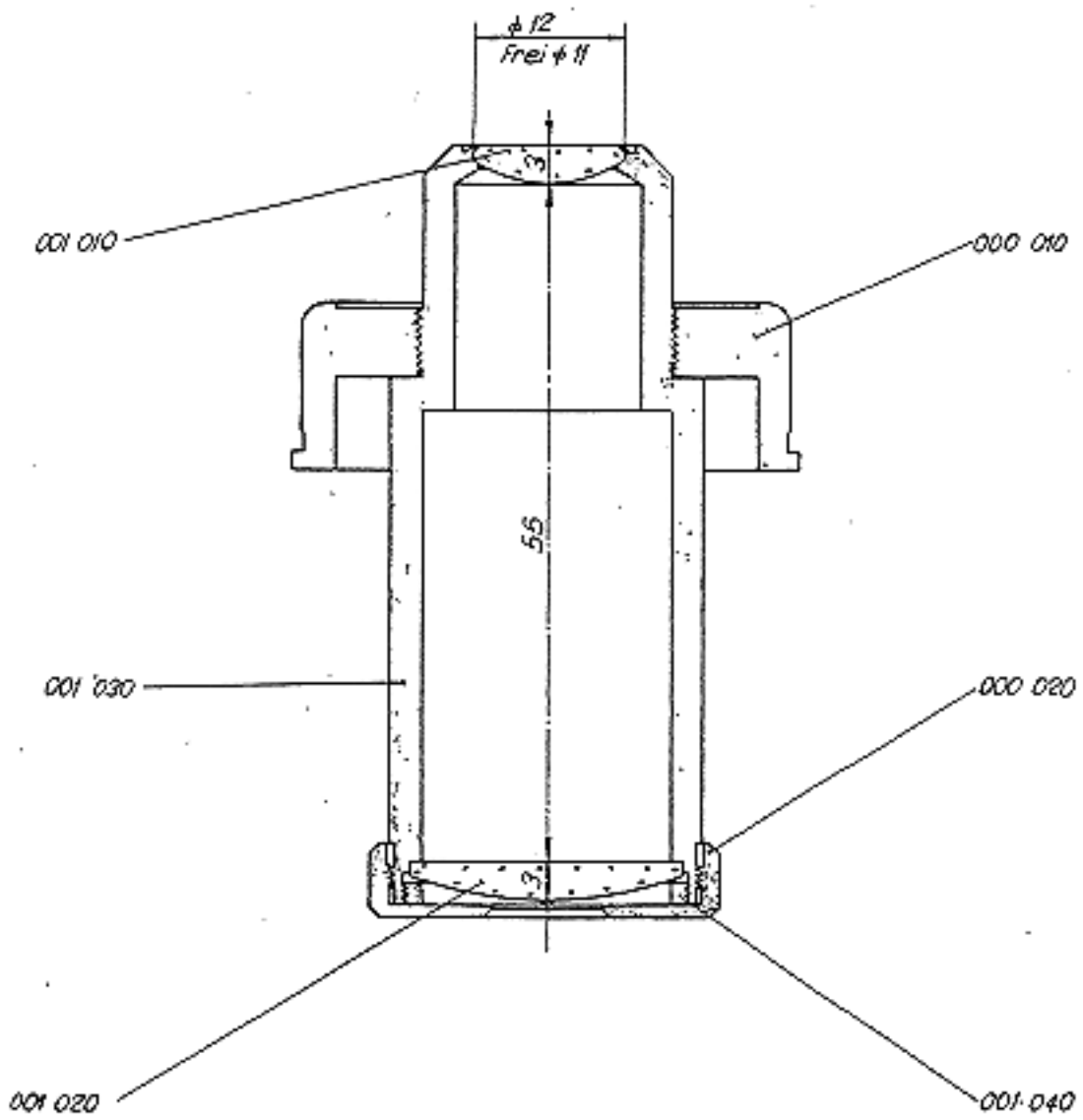

Änderungen:	Bezeichnung: Übersichtskondensor n A.02	1963	Datum	Name	Ersatz für: 11221-0301
		Gezeich	10.7.	L	
	Material:	Geprüft	17.7	Ref.	Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG


Maßstab: | Feinbearbeitung: | Therm. Behandlg.: | Bearbeitung: | Zchng.-Nr.: MKd6-00 000

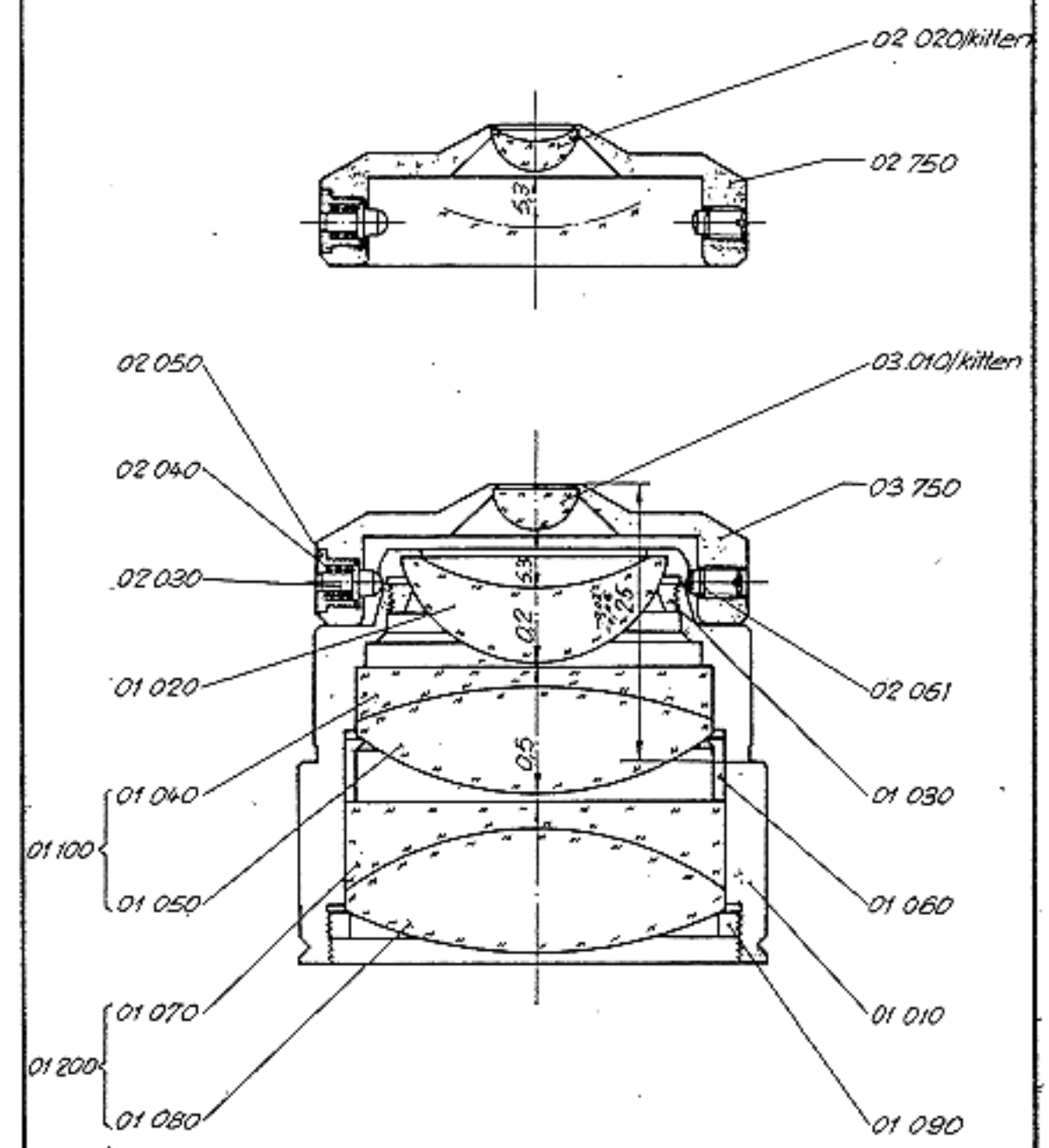

Änderungen:	Bezeichnung: Achr. apl Kondensor 0,7/095/1,3	1962	Datum	Name	Ersatz für: MZ21-0201
		Gezeich	19. 6.		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG


Maßstab: | Feinbearbeitung: | Therm. Behandlg.: | Bearbeitung: | Zchng.-Nr.: MKd7-00 000

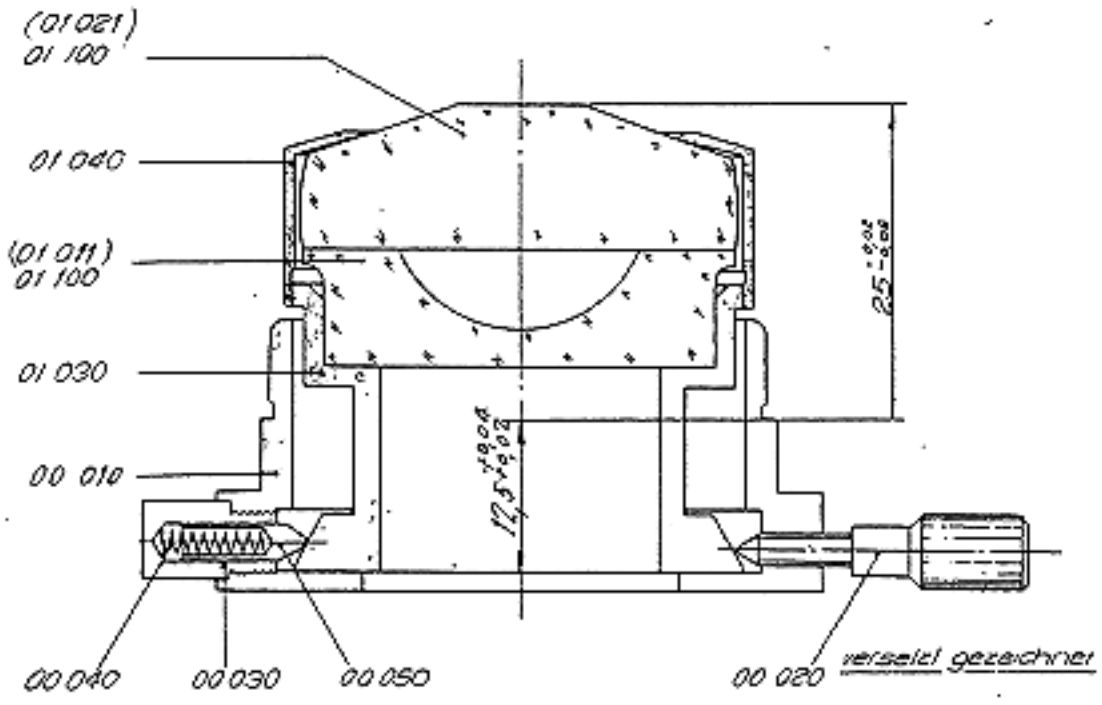

Änderungen:	Bezeichnung: Dunkelfeld-Irisionsband	1962	Datum	Name	Ersatz für: 11221-0601
		Gezeich	21.5.		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Maßstab: | Feinbearbeitung: | Therm. Behandlg.: | Bearbeitung: | Zchng.-Nr.: MKd9-00000

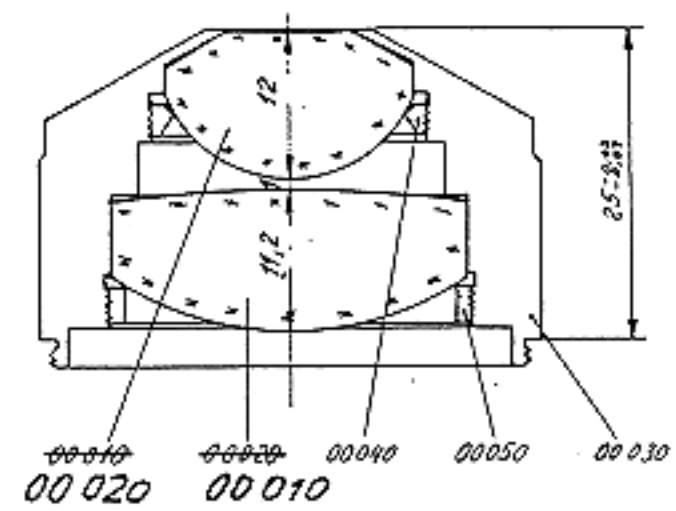



Änderungen:	Bezeichnung: Normal-Phasenkondensor 09	1963	Datum	Name	Ersatz für:
		Gezeich	6.8.		
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritt[illegible] zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr. MPh8-00000

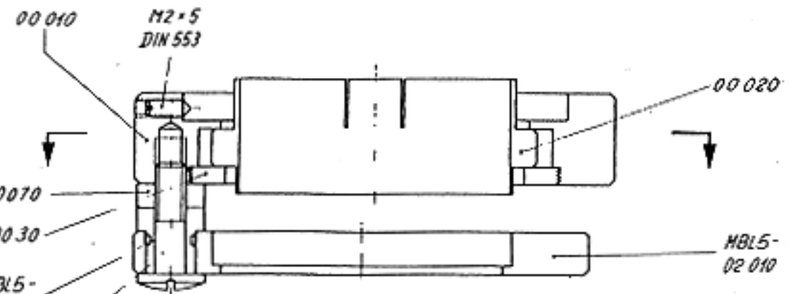

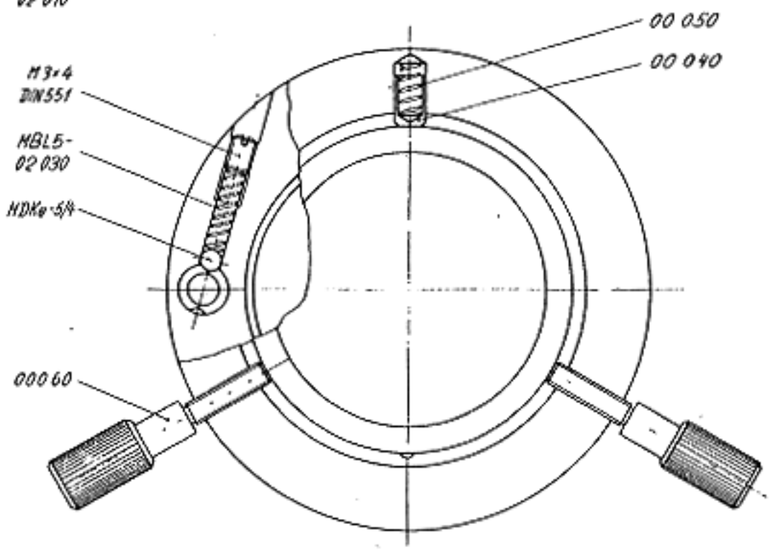


Aenderungen:	Bezeichnung: Zentrierensatz f. Kondensor lg. Schnittweite		Name	Datum	Ersatz für: MZ22-0501
		Gezeich.	Jung	14.6.61	
	Material:	Geprüft	W.R.	[illegible]	Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			


WILD HEERBRUGG

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Zchng.-Nr. MPh1-00000

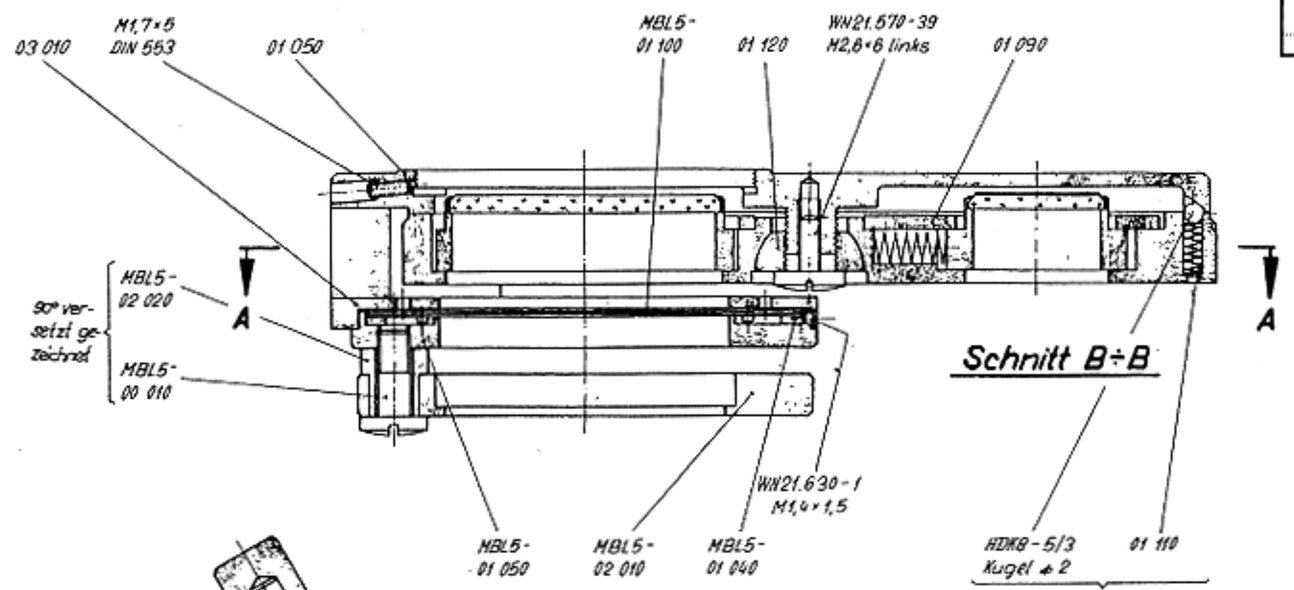

Schnitt B÷B

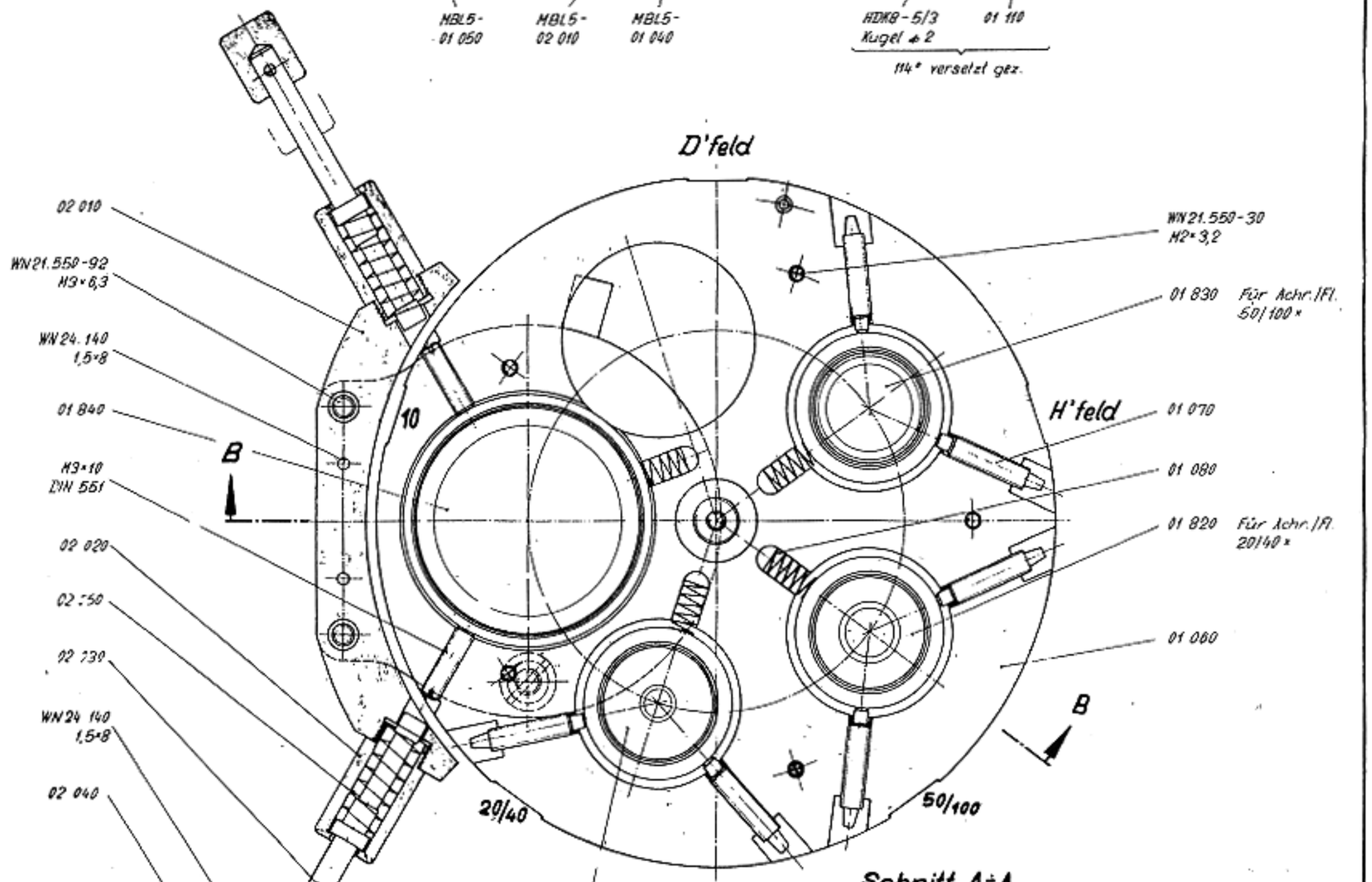


Schnitt A÷A

Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung			Bearbeitung
Aenderungen:	Bezeichnung: Universal-Phasenrevolver	1963	Datum	Name
		Gezeich.	7.8.	
	Material:	Geprüft		
	Oberfläche:	Norm-Geprüft		
	Ersatz für:	Ersetzt durch:		

Maßstab:

WILD HEERBRUGG


Zchng.-Nr. MPh1-00000

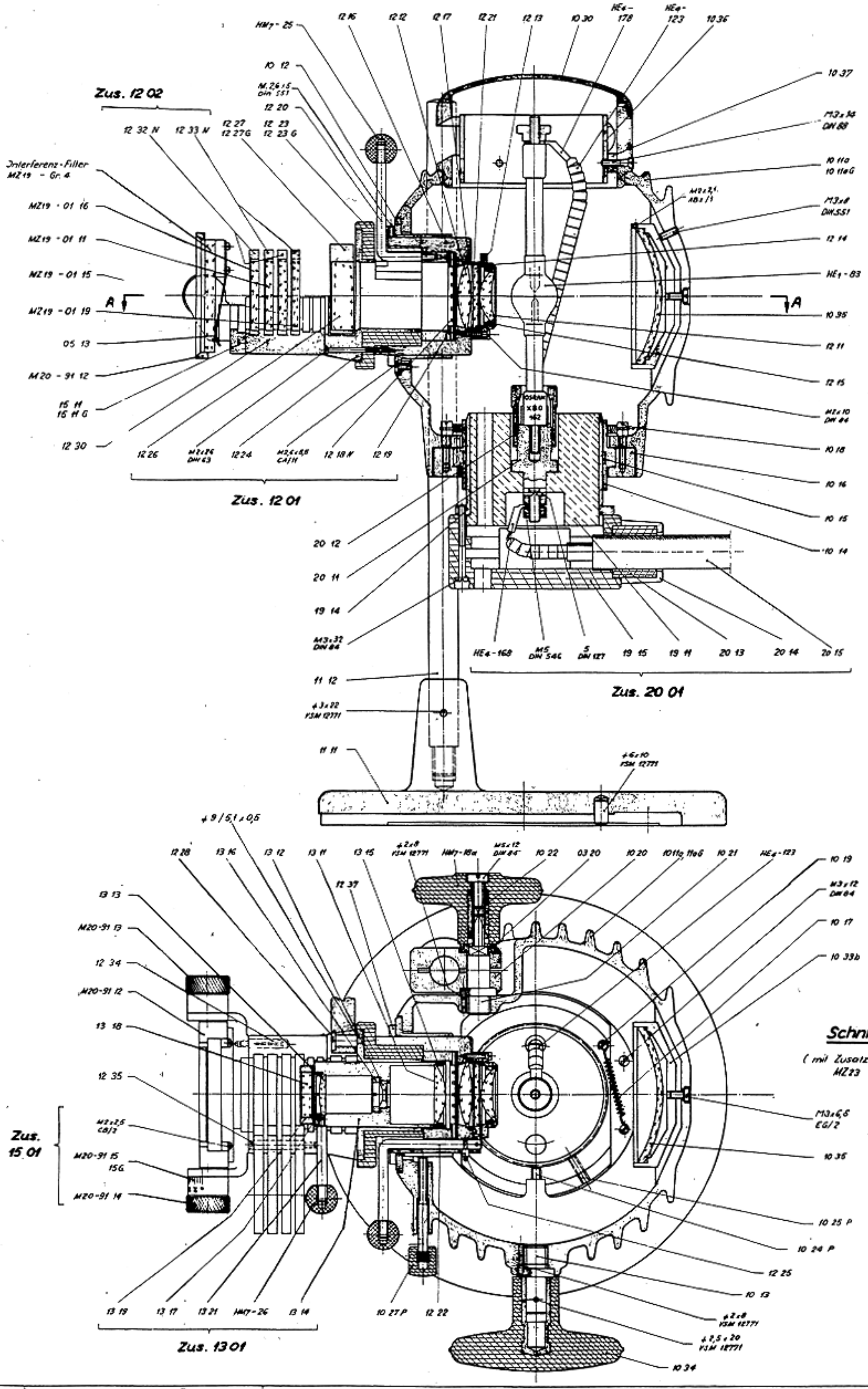


a) 7.12.58
4 7.56

Universal - Lampe MZ23 -	10 01a

Zchng. Nr.
MZ23-1201

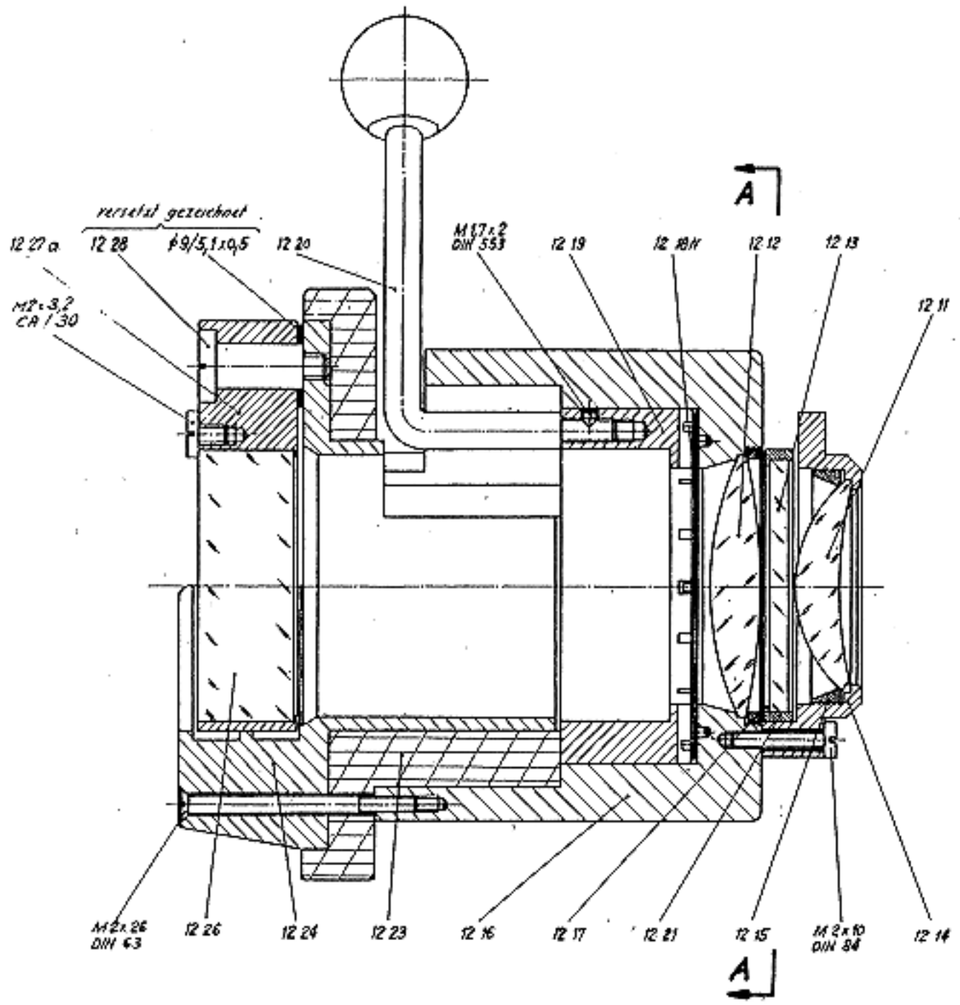

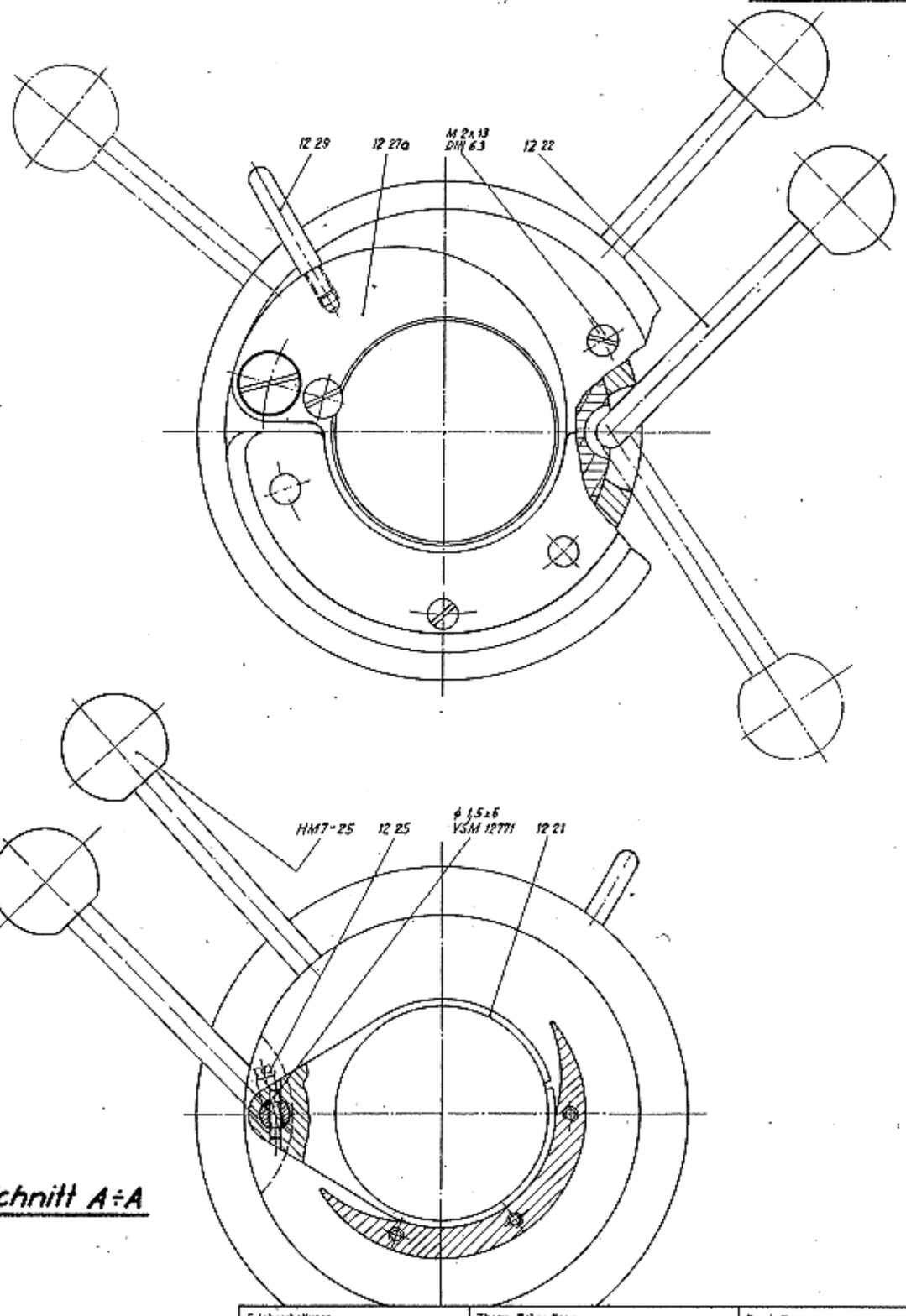


Schnitt A÷A

Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung				Bearbeitung
Aenderungen:	Bezeichnung: Quarzkollektor zur Universallampe		Datum	Name	Maßstab:
		Gezeich.	3. 5. 56	Hg	WILD HEERBRUGG
	Material:	Geprüft			
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			Zchng.-Nr. MZ23-1201
	Ersatz für:	Ersetzt durch:			

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritlpersonen zugänglich gemacht werden.

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritt personen zugänglich gemacht werden.


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MEB2-000 000

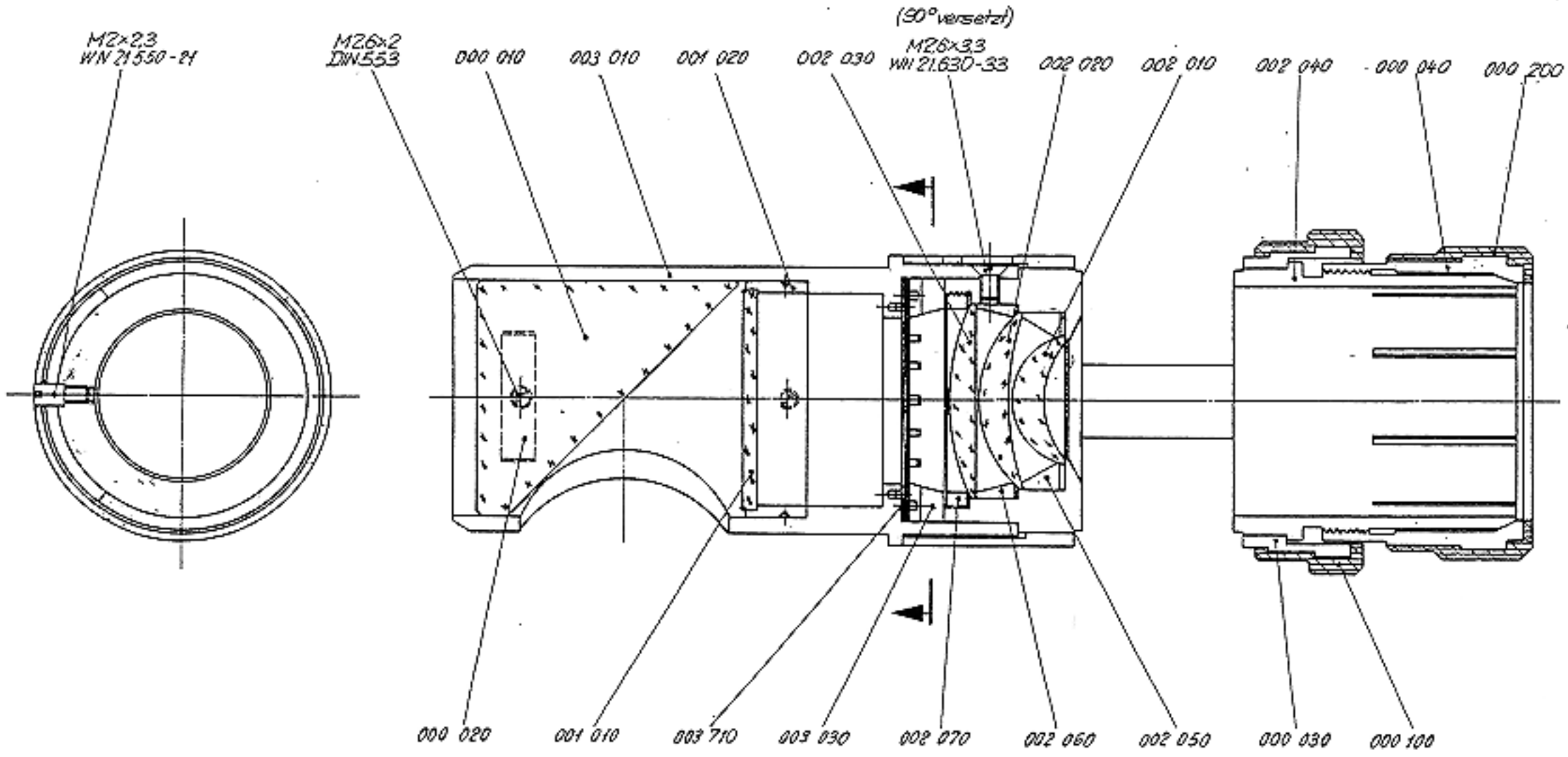

Aenderungen:	Bezeichnung:	1963	Datum	Name	Ersatz für: —
	Kollektor mit Iris	Gezeich	26.4.		M20-6001
	Material:	Geprüft	16.3.64		Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG


Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MEB3-000 000

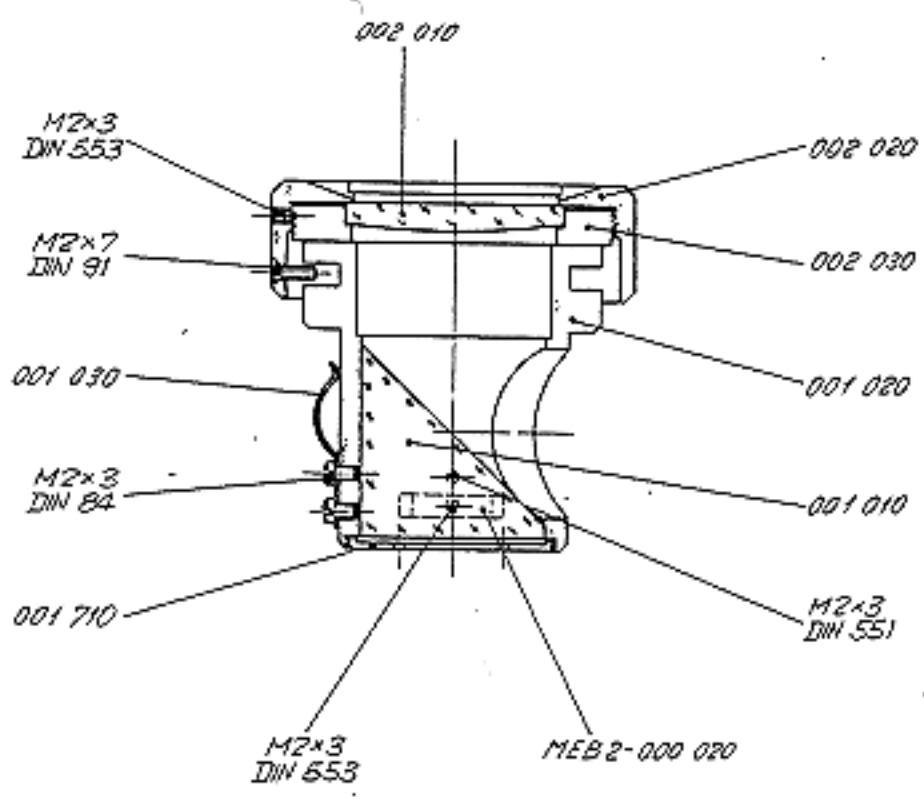

Aenderungen:	Bezeichnung:	1963	Datum	Name	Ersatz für: —
	Gleit-Zentrieransatz M20	Gezeich	30.4.		M20-6101
	Material:	Geprüft	13.3.64		Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MEB4-00 000

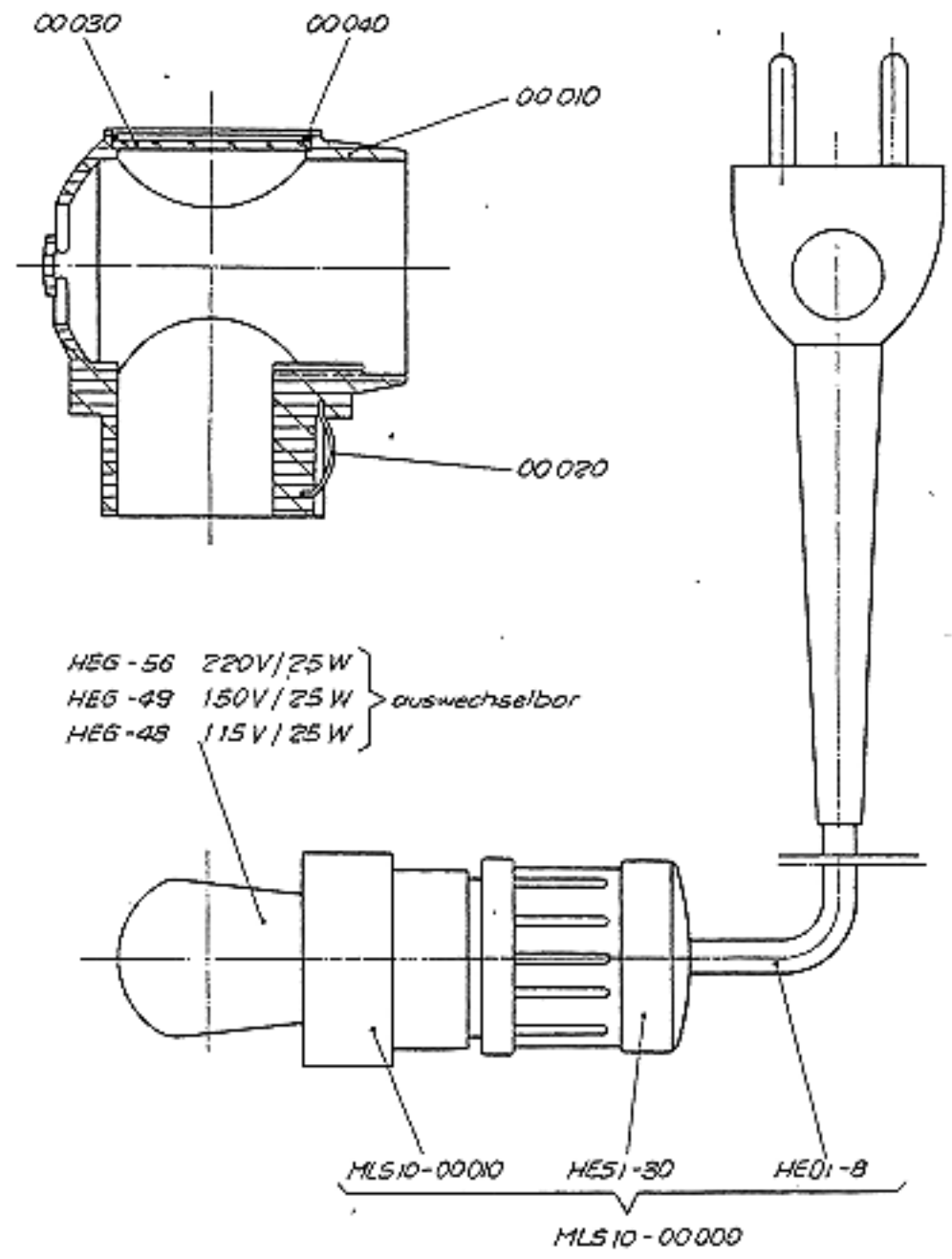


Aenderungen:	Bezeichnung:		Datum	Name	Ersatz für: —
	Netzanschlusslampe M	Gezeich	5.1.62		M11-3001
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG


Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritt personen zugänglich gemacht werden.


Zchng. Nr.
MEB9-000 000

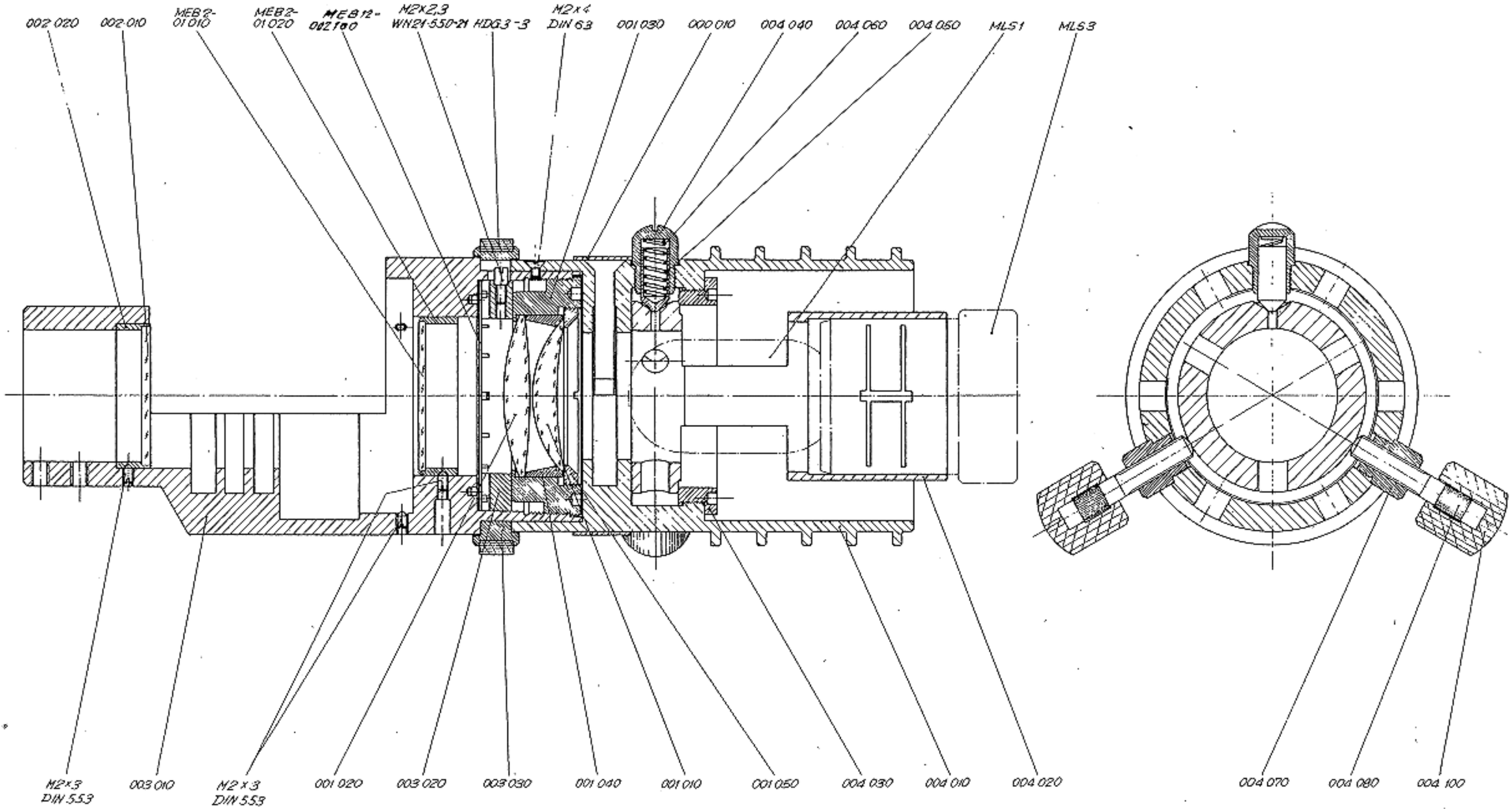


Feinbearbeitung: ——	Therm. Behandlung ——				Bearbeitung ——
Aenderungen:	Bezeichnung: M20 Auflicht - Beleuchtung	1963	Datum	Name	Maßstab: WILD HEERBRUGG
	Material: ——	Gezeich.	23.9		
	Oberfläche: ——	Geprüft	8.10		Zchng.-Nr. MEB9-000 000
	Ersatz für: — M20-4501	Norm-Gen.			Ersetzt durch:

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritt personen zugänglich gemacht werden.

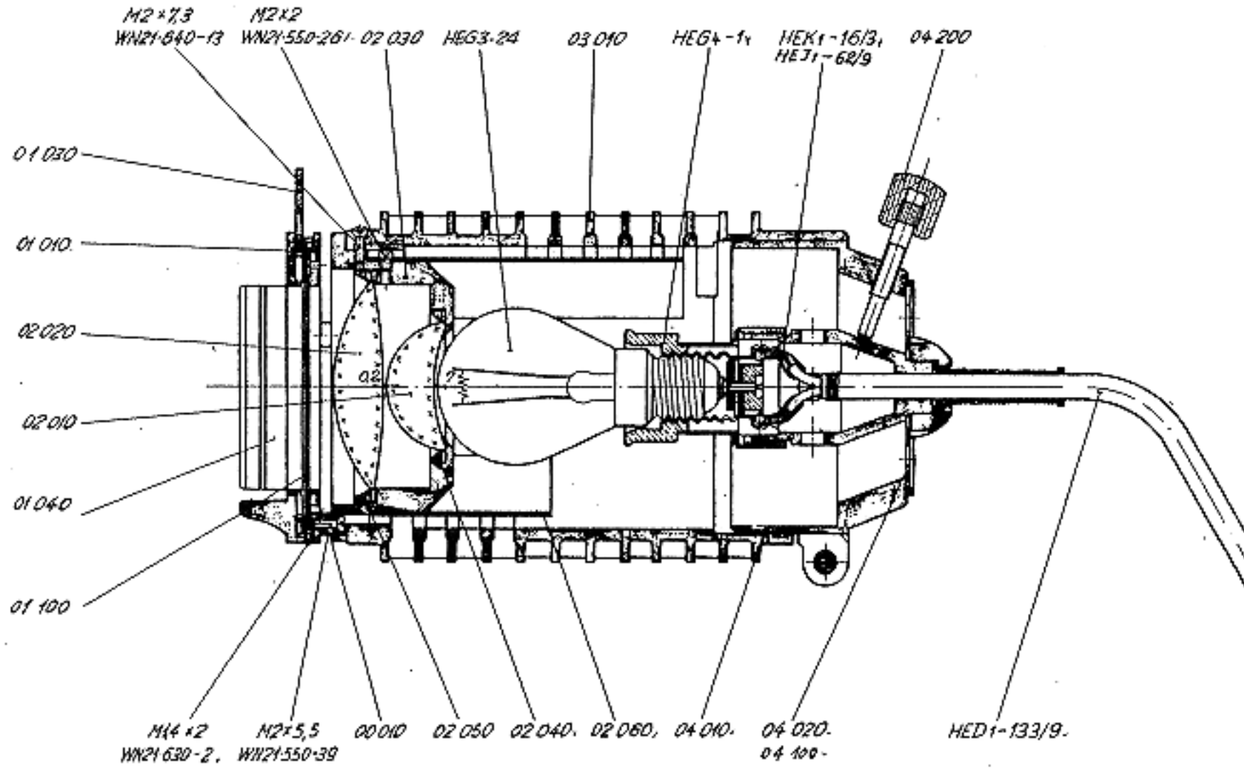

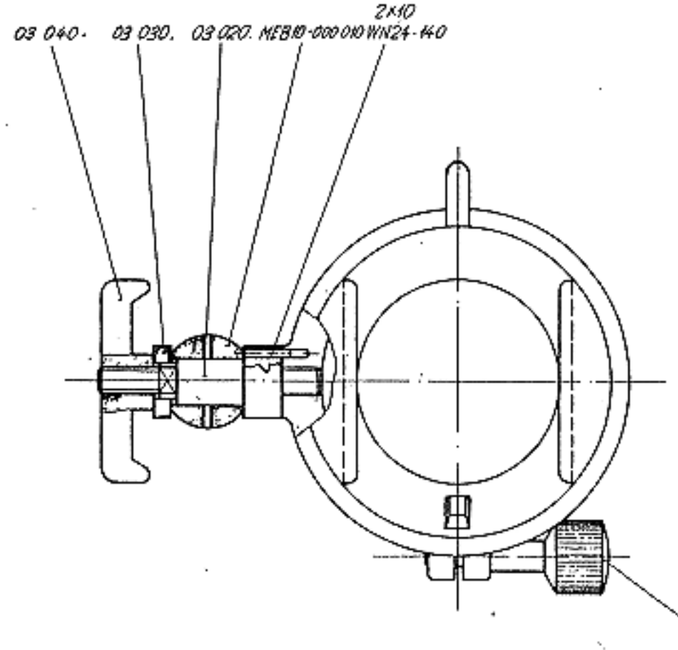


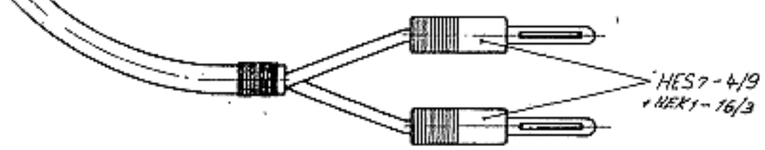

Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung				Bearbeitung:
Aenderungen:	Bezeichnung: Niedervolt-Lampengehäuse m. Kollektor	1962	Datum	Name	Maßstab: WILD HEERBRUGG
		Gezeich	18.5.		
	Material:	Geprüft			
	Oberfläche:	Herst.-Geprüft			Zchng.-Nr. MEB11-00 000
	Ersatz für: HZ23-03 01	Ersatzt durch:			

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritt personen zugänglich gemacht werden.


Zchng. Nr.
MEB 12-000 000

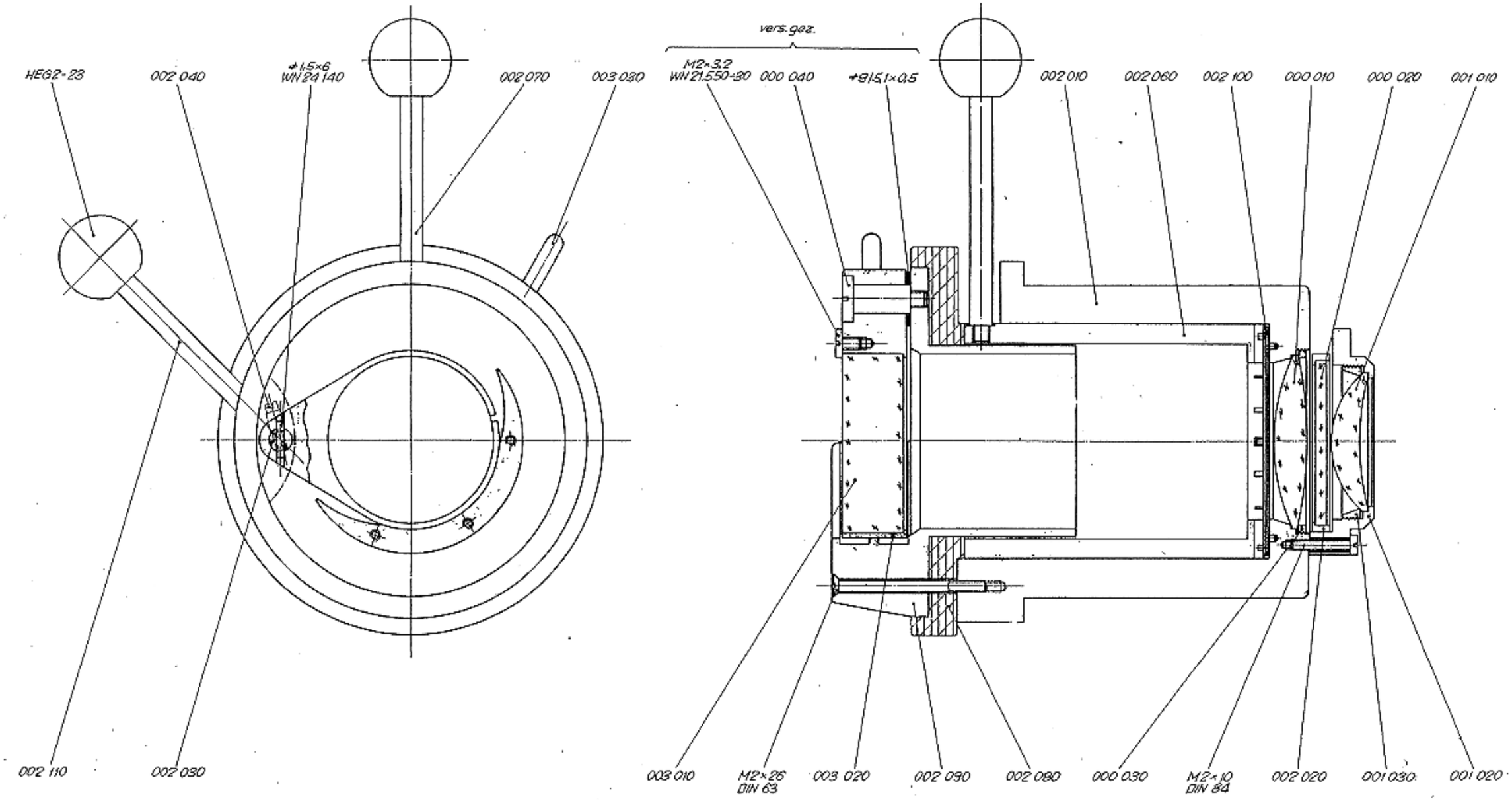


Feinbearbeitung:	Therm. Behandlung				Bearbeitung
Aenderungen:	Bezeichnung: Quarzkollektor zur Universallampe MEB10	1964	Datum	Name	Maßstab: WILD HEERBRUGG
	Material:	Gezeich	1. 10.		
	Oberfläche:	Geprüft			Zchng.-Nr.: MEB 12-000 000
	Ersatz für: MZ 23-1201a	Norm-Gepräft			
		Ersetzt durch:			

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MFT2-00 000

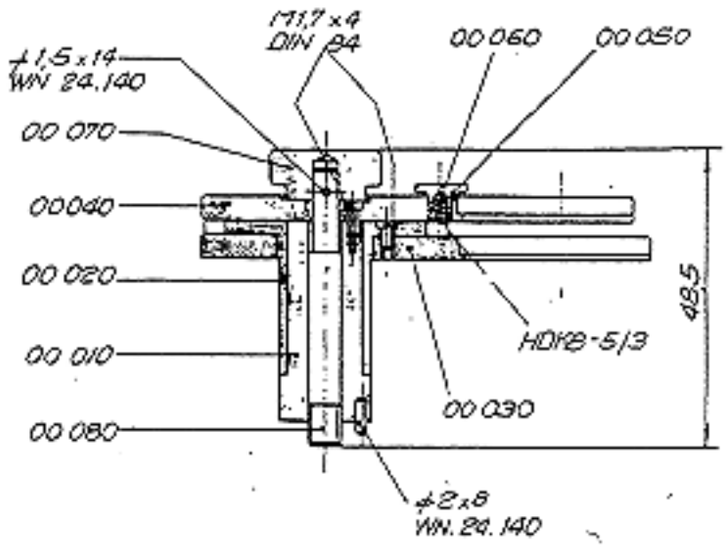

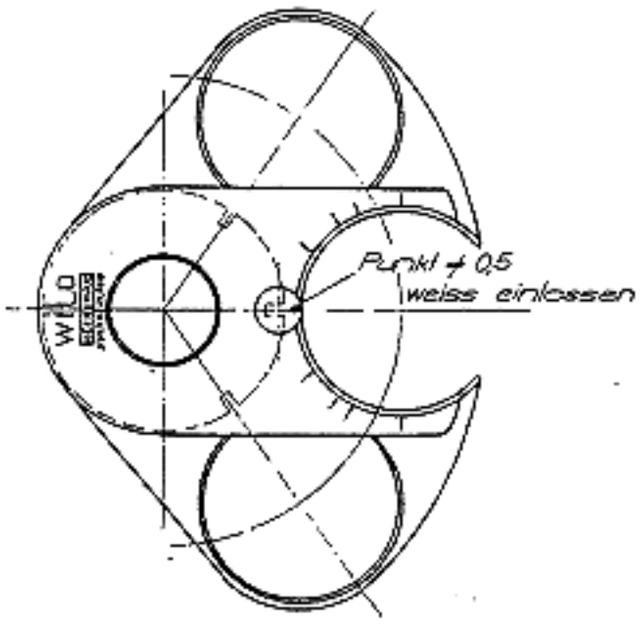



Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für:
	Filterwechsler T/M20	Gezeich	29.10.		M20-9001
	Material:	Geprüft			Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MFT 3 - 000 000

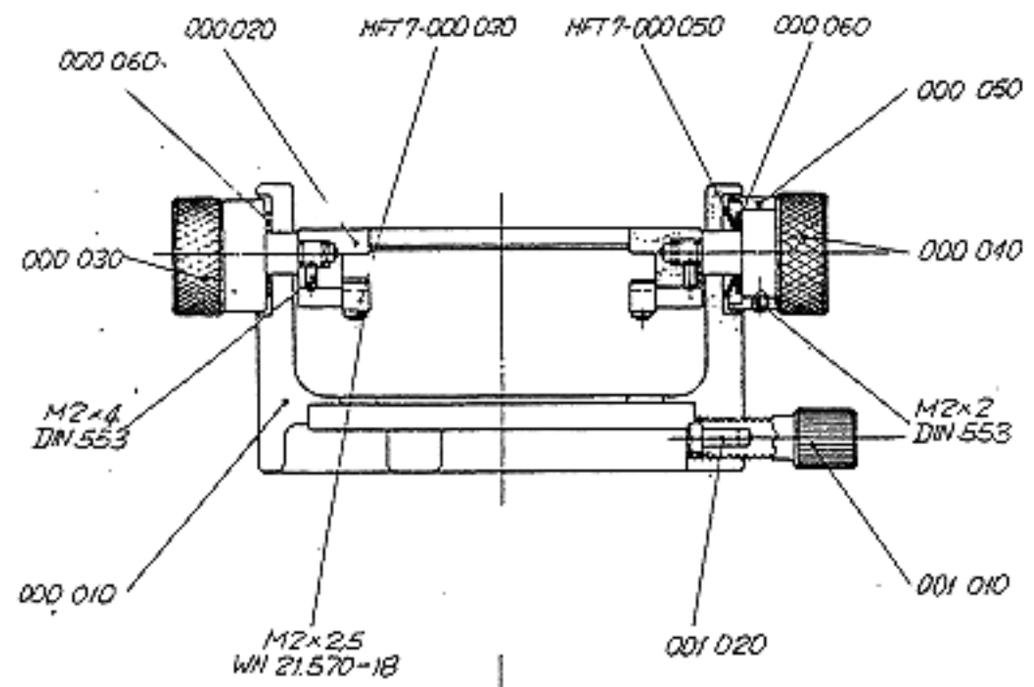

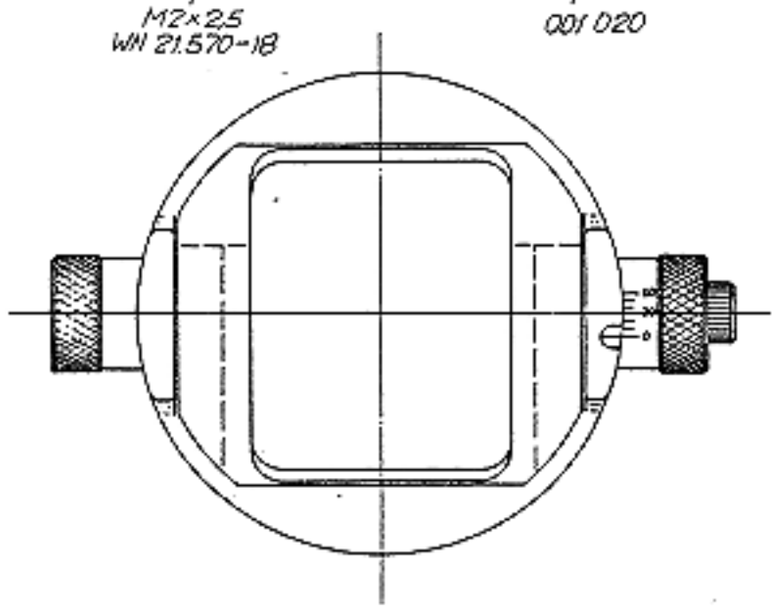


Aenderungen:	Bezeichnung: U/M20	1963	Datum	Name	Ersatz für:
	Interferenzfilter-Halter	Gezeich	7.5.		M20-91 01
	Material:	Geprüft	5.1.65		Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MFT4-000 000

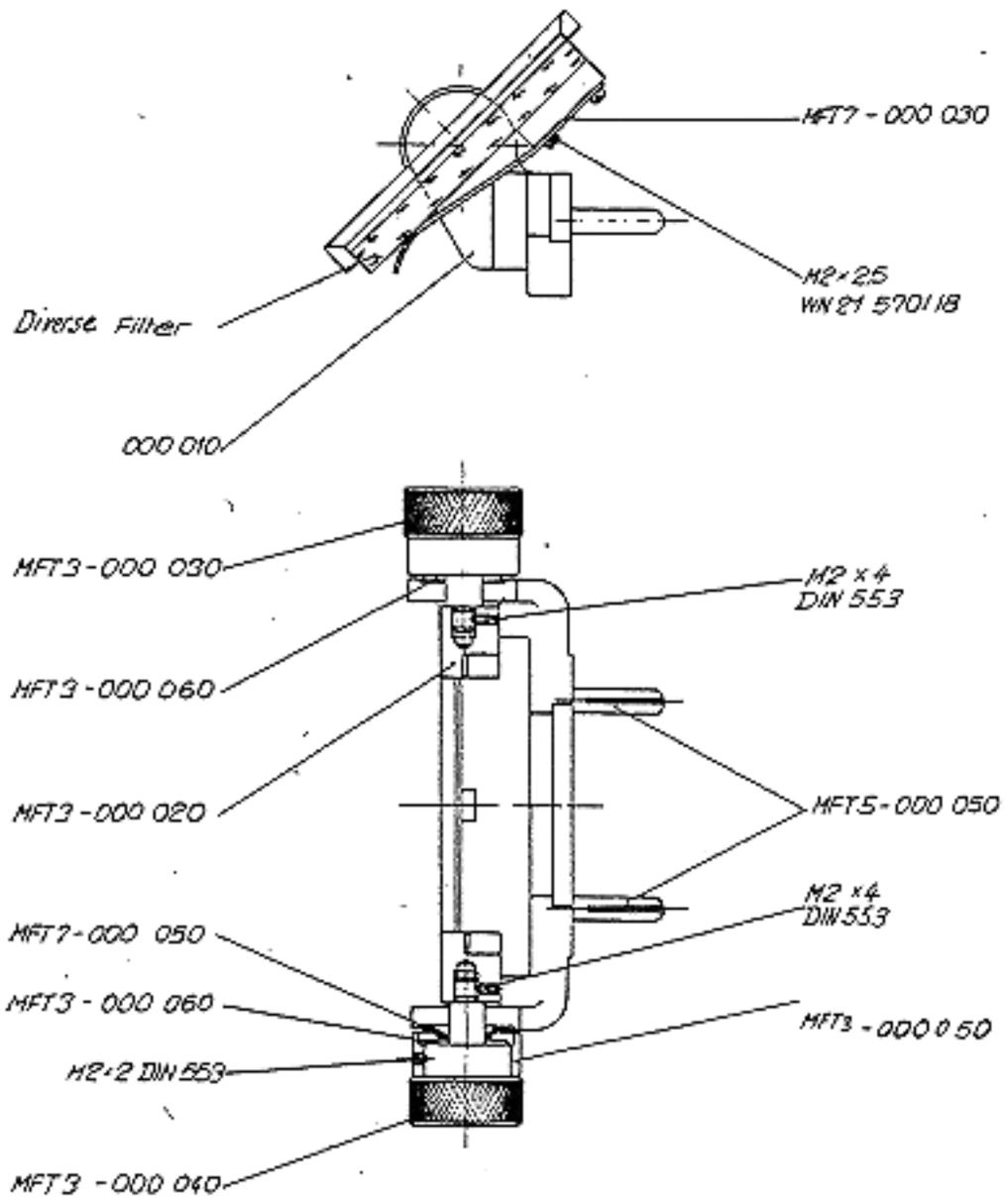


Aenderungen:	Bezeichnung:	1963	Datum	Name	Ersatz für:
	Interferenzfilterhalter zur Universallampe	Gezeich	6.9.		M23 - 1501
	Material:	Geprüft	25.8.64		Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.

Maßstab:	Feinbearbeitung:	Therm. Behandlg.:	Bearbeitung:	Zchng.-Nr.:
				MFT5 - 000 000

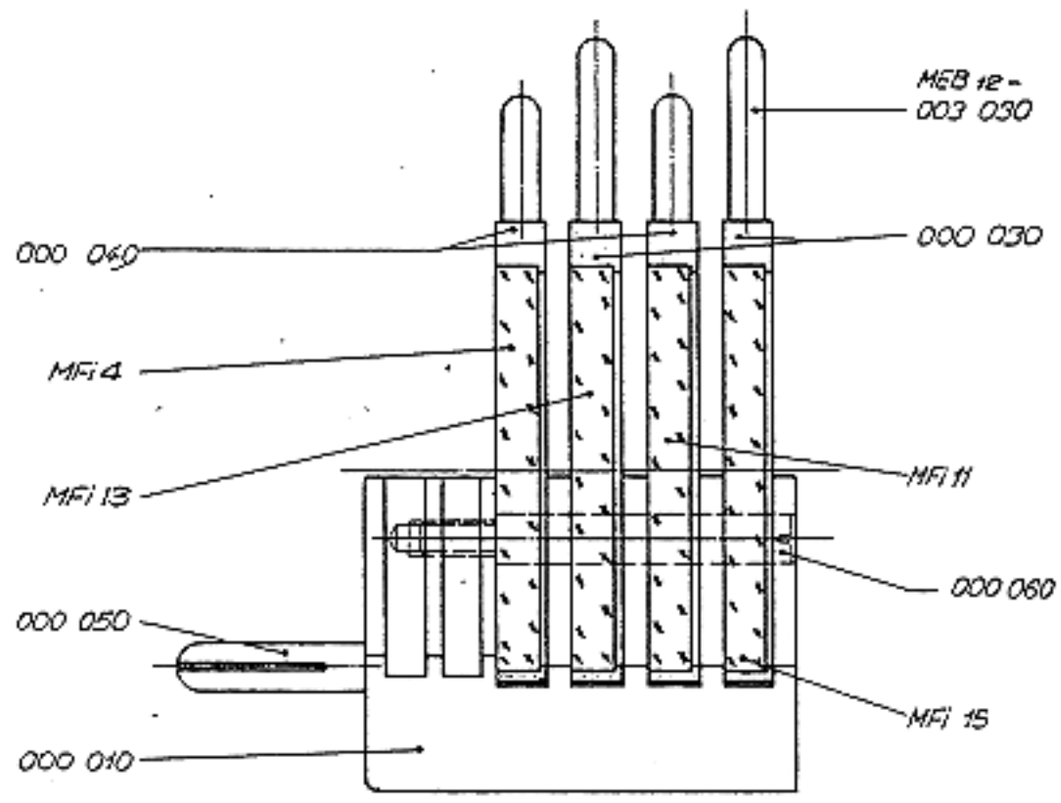

Aenderungen:	Bezeichnung:	1962	Datum	Name	Ersatz für:
	Filterhalter für Universallampe	Gezeich	9.5.		M223-1202
	Material:	Geprüft	14.8.64		Ersetzt durch:
	Oberfläche:	Norm-Geprüft			

WILD HEERBRUGG

Artisan Technology Group is an independent supplier of quality pre-owned equipment

Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

Learn more!

Visit us at **artisantg.com** for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

ARTISAN® TECHNOLOGY GROUP